



INSTRUÇÃO DE USO

Nome Técnico: Placa Especial para Osteossíntese

Nome Comercial: Sistema de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados

Fabricante / Distribuidor: TORIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 54.673.199/0001-48

Endereço: AV. Caetano Schincariol, Nº97, Pq. das Empresas, CEP 13803-340, Mogi Mirim, São Paulo – Brasil.

Fone/Fax: +55 19 3805 7580

Site: <https://toride.com.br>

Email: sac@torideimplantes.com.br

Responsável Técnico: Eng. Dr. Tóride S. Celegatti Filho - CREA/SP 5061019918

Registro ANVISA nº: 80084420019

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO

PRODUTO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZAR

1. Descrição detalhada do dispositivo médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

1.1. Identificação técnica do dispositivo médico

A identificação do dispositivo médico está apresentada na tabela 1.

Tabela 1 - Identificação do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS

Nome Técnico: PLACA ESPECIAL PARA OSTEOSSÍNTESE**Nome Comercial:** SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS**Enquadramento:** Regra 8 - Classe de Risco III - Resolução - RDC Nº 751 2022

1.2. Descrição do produto médico

Os modelos comerciais que integram o SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS são implantes indicados para fraturas na clavícula, escápula, úmero proximal, úmero distal, radio distal, olecrano, artrodese de punho, pelvis, fêmur proximal, fêmur distal, osteotomia fêmur, tibia proximal, osteotomia tibia, tibia distal, fibula distal, pé (retro pé, médio pé e ante pé). Promovendo alinhamento e estabilização das fraturas através da fixação interna, seu meio de fixação é feito por parafusos bloqueados e corticais.



Clavícula



Escápula



Úmero Proximal



Úmero Distal



Olecrano



Artrodese de Punho



Radio Distal

Placa de Pelvis e
AcetabuloPlaca Fêmur
proximal.Fêmur distal
Osteotomia



Figura 1 – Montagem do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS

(Imagem meramente ilustrativa)

1.3. Composição

A Tabela 2 apresenta a classificação da matéria-prima utilizada dos produtos.

Tabela 2 - Classificação química da matéria-prima dos produtos desse processo de registro.

Produto	Material	Norma Aplicada
Parafusos	Liga de Titânio Ti6Al4V	ASTM F136**
Placas	Titânio Puro Grau 2.	ASTM F67*
** Conforme Norma ASTM F136 "Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications"		
* Conforme Norma ASTM F67 "Standard Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications".		

1.4. Fundamentos de funcionamento e mecanismo de ação

Após a escolha da placa, procede-se à preparação do sítio cirúrgico por meio da perfuração da região para determinar o diâmetro e comprimento apropriados do parafuso. Em sequência, a placa é

posicionada, seguida pela realização das reduções anatômicas e inserção de todos os parafusos, resultando na obtenção de uma fixação estável dos fragmentos ósseos conforme ilustrado na figura 2.

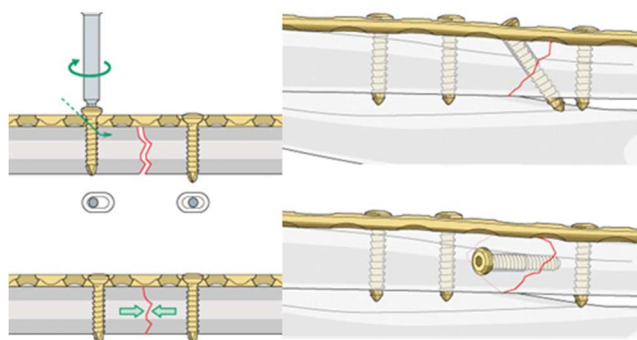


Figura 2 – Fundamentos de funcionamento e mecanismos de ação do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS.

1.5. Modelos comerciais

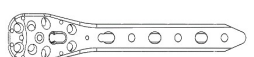
Os componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS fabricados pela TORIDE apresentam-se em dimensões que permitem ao profissional escolher o modelo mais adequado conforme o caso clínico. A apresentação das placas e parafusos do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS estão disponíveis nos modelos conforme tabela 3 e tabela 4.

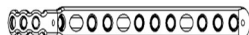
Tabela 3 - Apresentação dos componentes do Sistema de Fixação Rígida de Placas Especiais para Grandes e Pequenos Fragmentos - (Placas).

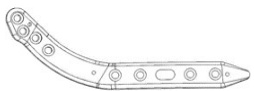
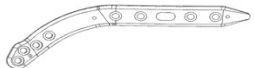
Placas de Clavícula					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
1.67.35.08.08.068	Placa DCP Congruente "D" da Clavícula 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	68,35 x 10,5 mm	
1.67.35.09.08.068	Placa DCP Congruente "E" da Clavícula 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	68,35 x 10,5 mm	
1.67.35.08.08.079	Placa DCP Congruente Direita da Clavícula 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	93,5 x 10,5 mm	

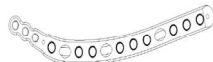
1.67.35.09.08.079	Placa DCP Congruente Esquerda da Clavícula 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	93,5 x 10,5 mm	
1.67.35.08.10.096	Placa DCP Congruente Direita da Clavícula 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111 x 10,5 mm	
1.67.35.09.10.096	Placa DCP Congruente Esquerda da Clavícula 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111 x 10,5 mm	
1.67.35.08.12.115	Placa DCP Congruente Direita da Clavícula 12 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,4 x 10,5 mm	
1.67.35.09.12.115	Placa DCP Congruente Esquerda da Clavícula 12 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,4 x 10,5 mm	
35.0302.005	Placa FR Clavícula Lateral Anterior P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	77 x 10,5 mm	
35.0402.006	Placa FR Clavícula Lateral Anterior M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84 x 10,5 mm	
35.0403.007	Placa FR Clavícula Lateral Anterior G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	105,5 x 10,5 mm	
35.0404.008	Placa FR Clavícula Lateral Anterior EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	126 x 10,5 mm	
1.67.35.78.07.110	Placa Grande Direita Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	108,4 x 10,5 mm	
1.67.35.79.07.110	Placa Grande Esquerdo Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	108,4 x 10,5 mm	
1.67.35.78.07.136	Placa Extra Grande Direita Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	134,83 x 10,5 mm	
1.67.35.79.07.136	Placa Extra Grande Esquerda Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	134,83 x 10,5 mm	
1.67.35.78.05.080	Placa Média Direita Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização,	TITÂNIO ASTM F67	80,4 x 10,5 mm	

		alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.35.79.05.080	Placa Média Esquerda Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	80,4 x 10,5 mm	
1.67.35.78.04.055	Placa Pequena Direita Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	64,1 x 10,5 mm	
1.67.35.79.04.055	Placa Pequena Esquerda Clavícula	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	64,1 x 10,5 mm	
35.0012.001	Placa Gancho FR Clavícula “D” 12 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	12 x 32 mm	
35.0015.001	Placa Gancho FR Clavícula “D” 15 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	15 x 35 mm	
35.0018.001	Placa Gancho FR Clavícula “D” 18 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	18 x 38 mm	
35.0012.002	Placa Gancho FR Clavícula “E” 12 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	12 x 32 mm	
35.0015.002	Placa Gancho FR Clavícula “E” 15 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	15 x 35 mm	
35.0018.002	Placa Gancho FR Clavícula “E” 18 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	18 x 38 mm	
Placas de Úmero Proximal					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	DIMENSÕES	IMAGEM
1.67.35.04.08.050	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84 x 12,6 mm	
1.67.35.04.08.079	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	113 x 12,6 mm	

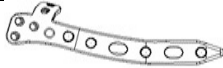
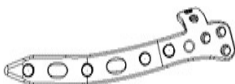
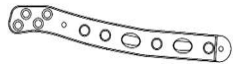
1.67.35.04.09.107	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142 x 12,6 mm	
1.67.35.04.10.136	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	171 x 12,6 mm	
1.67.35.04.11.164	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 11 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	200 x 12,6 mm	
1.67.35.05.08.050	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84 x 12,6 mm	
1.67.35.05.08.079	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	113 x 12,6 mm	
1.67.35.05.09.107	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142 x 12,6 mm	
1.67.35.05.10.136	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	171 x 12,6 mm	
1.67.35.05.11.164	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 11 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	200 x 12,6 mm	
35.3511.000	Placa FR Úmero Proximal P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88 x 12,6 mm	
35.3512.000	Placa FR Úmero Proximal M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116,2 x 12,6 mm	
35.3513.000	Placa FR Úmero Proximal G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144,4 x 12,6 mm	
35.3514.000	Placa FR Úmero Proximal EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	172,6 x 12,6 mm	
35.3515.000	Placa FR Úmero Proximal SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	200 x 12,6 mm	
35.3501.001	Placa FR Úmero Proximal "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização,	TITÂNIO ASTM F67	88 x 12,6 mm	

		alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.3502.001	Placa FR Úmero Proximal "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 12,6 mm	
35.3503.001	Placa FR Úmero Proximal "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144 x 12,6 mm	
35.3504.001	Placa FR Úmero Proximal "D" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	172 x 12,6 mm	
35.3505.001	Placa FR Úmero Proximal "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	200 x 12,6 mm	
35.3501.002	Placa FR Úmero Proximal "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88 x 12,6 mm	
35.3502.002	Placa FR Úmero Proximal "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 12,6 mm	
35.3503.002	Placa FR Úmero Proximal "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144 x 12,6 mm	
35.3504.002	Placa FR Úmero Proximal "E" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	172 x 12,6 mm	
35.3505.002	Placa FR Úmero Proximal "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	200 x 12,6 mm	
Placas de Úmero Distal					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.2501.000	Placa FR Úmero Medial "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,5 x 11 mm	
35.2502.000	Placa FR Úmero Medial "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107 x 11 mm	
35.2503.000	Placa FR Úmero Medial "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	126 x 11 mm	

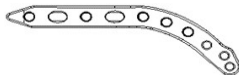
35.2504.000	Placa FR Úmero Medial "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	154,5 x 11 mm	
35.0128.001	Placa FR Úmero Posteromedial "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120,5 x 11 mm	
35.0228.001	Placa FR Úmero Posteromedial "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146,5 x 11 mm	
35.0328.001	Placa FR Úmero Posteromedial "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190,5 x 11 mm	
35.0428.001	Placa FR Úmero Posteromedial "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	218,5 x 11 mm	
35.0128.002	Placa FR Úmero Posteromedial "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120,5 x 11 mm	
35.0228.002	Placa FR Úmero Posteromedial "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146,5 x 11 mm	
35.0328.002	Placa FR Úmero Posteromedial "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190,5 x 11 mm	
35.0428.002	Placa FR Úmero Posteromedial "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	218,5 x 11 mm	
35.0528.001	Placa FR Úmero Lateral "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	77,5 x 11 mm	
35.0628.001	Placa FR Úmero Lateral "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	96 x 11 mm	
35.0728.001	Placa FR Úmero Lateral "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	114,5 x 11 mm	
35.0828.001	Placa FR Úmero Lateral "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142 x 11 mm	
35.0528.002	Placa FR Úmero Lateral "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização,	TITÂNIO ASTM F67	77,5 x 11 mm	

		alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.0628.002	Placa FR Úmero Lateral "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	96 x 11 mm	
35.0728.002	Placa FR Úmero Lateral "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	114,5 x 11 mm	
35.0828.002	Placa FR Úmero Lateral "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142 x 11 mm	
35.0928.001	Placa FR Úmero Posterolateral "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	101 x 11 mm	
35.1028.001	Placa FR Úmero Posterolateral "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122 x 11 mm	
35.1128.001	Placa FR Úmero Posterolateral "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	143 x 11 mm	
35.1228.001	Placa FR Úmero Posterolateral "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164 x 11 mm	
35.0928.002	Placa FR Úmero Posterolateral "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	101 x 11 mm	
35.1028.002	Placa FR Úmero Posterolateral "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122 x 11 mm	
35.1128.002	Placa FR Úmero Posterolateral "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	143 x 11 mm	
35.1228.002	Placa FR Úmero Posterolateral "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164 x 11 mm	
35.3513.001	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110,5 x 11 mm	
35.3514.001	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,5 x 11 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.3535.001	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,5 x 11 mm	
35.3513.002	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110,5 x 11 mm	
35.3514.002	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,5 x 11 mm	
35.3535.002	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,5 x 11 mm	
1.67.35.03.04.044	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	54,5 x 11 mm	
1.67.35.03.06.084	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	92 x 11 mm	
1.67.35.03.08.134	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	137,8 x 11 mm	
1.67.35.03.11.184	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	187,8 x 11 mm	
1.67.35.02.04.044	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	54,5 x 11 mm	
1.67.35.02.06.084	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	92 x 11 mm	
1.67.35.02.08.134	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	137,8 x 11 mm	
1.67.35.02.11.184	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	187,8 x 11 mm	
35.2836.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" com Suporte P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	72,6 x 11 mm	

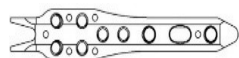
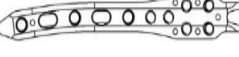
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.2837.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" com Suporte M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	97,7 x 11 mm	
35.2838.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" com Suporte G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,7 x 11 mm	
35.2836.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" com Suporte P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	72,6 x 11 mm	
35.2837.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" com Suporte M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	97,7 x 11 mm	
35.2838.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" com Suporte G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,7 x 11 mm	
35.2839.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	76,2 x 11 mm	
35.2840.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	99,5 x 11 mm	
35.2841.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,7 x 11 mm	
35.2839.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	76,2 x 11 mm	
35.2840.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	99,5 x 11 mm	
35.2841.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,7 x 11 mm	
35.2844.001	Placa FR Epicôndilo Anteromedial "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,3 x 11 mm	
35.2845.001	Placa FR Epicôndilo Anteromedial "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	104,3 x 11 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.2873.001	Placa FR Epicôndilo Anteromedial "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	129,3 x 11 mm	
35.2844.002	Placa FR Epicôndilo Anteromedial "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,3 x 11 mm	
35.2845.002	Placa FR Epicôndilo Anteromedial "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	104,3 x 11 mm	
35.2873.002	Placa FR Epicôndilo Anteromedial "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	129,3 x 11 mm	
1.67.35.01.04.075	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 2 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	74 x 11 mm	
1.67.35.01.05.081	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	81,5 x 11 mm	
1.67.35.01.06.107	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	106,5 x 11 mm	
1.67.35.01.07.132	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	132 x 11 mm	
1.67.35.01.08.158	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	157,5 x 11 mm	
1.67.35.01.09.184	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	183 x 11 mm	
35.2842.001	Placa FR Epicôndilo Posteromedial "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	77 x 11 mm	
35.2843.001	Placa FR Epicôndilo Posteromedial "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	102 x 11 mm	
35.2872.001	Placa FR Epicôndilo Posteromedial "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127 x 11 mm	

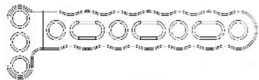
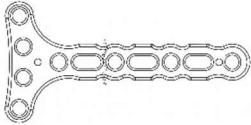
35.2842.002	Placa FR Epicôndilo Posteromedial "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	77 x 11 mm	
35.2843.002	Placa FR Epicôndilo Posteromedial "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	102 x 11 mm	
35.2872.002	Placa FR Epicôndilo Posteromedial "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127 x 11 mm	

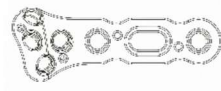
Placas de Rádio e Ulna

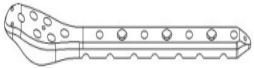
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
1.67.27.58.10.078	Placa p/ Olecrano Esquerda 10 Furos Espessura 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,75 x 10 mm	
1.67.27.58.11.108	Placa p/ Olecrano Esquerda 11 Furos Espessura 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131,55 x 10 mm	
1.67.27.58.12.138	Placa p/ Olecrano Esquerda 12 Furos Espessura 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146,25 x 10 mm	
1.67.27.61.10.078	Placa p/ Olecrano Esquerda 10 Furos Espessura 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,75 x 10 mm	
1.67.27.61.11.108	Placa p/ Olecrano Esquerda 11 Furos Espessura 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131,55 x 10 mm	
1.67.27.61.12.138	Placa p/ Olecrano Esquerda 12 Furos Espessura 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146,25 x 10 mm	
1.67.27.59.10.078	Placa p/ Olecrano Direita 10 Furos Espessura 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,75 x 10 mm	
1.67.27.59.11.108	Placa p/ Olecrano Direita 11 Furos Espessura 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131,55 x 10 mm	
1.67.27.59.12.138	Placa p/ Olecrano Direita 12 Furos Espessura 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146,25 x 10 mm	
1.67.27.62.10.078	Placa p/ Olecrano Direita 10 Furos Espessura 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,75 x 10 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.27.62.11.108	Placa p/ Olecrano Direita 11 Furos Espessura 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131,55 x 10 mm	
1.67.27.62.12.138	Placa p/ Olecrano Direita 12 Furos Espessura 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146,25 x 10 mm	
35.2862.000	Placa FR Olecrano com Gancho P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	87,9 x 10 mm	
35.2828.001	Placa FR Olecrano "D" com Gancho M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,5 x 10 mm	
35.2827.001	Placa FR Olecrano "D" com Gancho G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,05 x 10 mm	
35.2829.001	Placa FR Olecrano "D" com Gancho EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	158,6 x 10 mm	
35.2828.002	Placa FR Olecrano "E" com Gancho M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,5 x 10 mm	
35.2827.002	Placa FR Olecrano "E" com Gancho G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,05 x 10 mm	
35.2829.002	Placa FR Olecrano "E" com Gancho EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	158,6 x 10 mm	
1.67.32.34.06.120	Placa 6 Furos Fixação Rígida para Artrodese de Punho	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120,1 x 10,5 mm	
1.67.32.34.07.144	Placa 7 Furos Fixação Rígida para Artrodese de Punho	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144 x 10,5 mm	
1.67.40.51.07.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 5 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	49,7 x 10 mm	
1.67.40.51.08.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 5 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	55,3 x 10 mm	

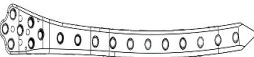
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.40.51.09.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 5 x 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62,3 x 10 mm	
1.67.40.50.07.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 5 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	49,7 x 10 mm	
1.67.40.50.08.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 5 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	55,3 x 10 mm	
1.67.40.50.09.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 5 x 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62,3 x 10 mm	
1.67.40.51.08.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 6 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	49,5 x 10 mm	
1.67.40.51.09.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 6 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	55,15 x 10 mm	
1.67.40.51.10.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 6 x 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62,1 x 10 mm	
1.67.40.50.08.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 6 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	49,5 x 10 mm	
1.67.40.50.09.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 6 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	55,15 x 10 mm	
1.67.40.50.10.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 6 x 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62,1 x 10 mm	
1.67.40.51.09.051	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal ESQUERDA 7 x 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	50,3 x 10 mm	
1.67.40.51.10.057	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 7 x 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	55,9 x 10 mm	
1.67.40.51.11.064	Placa Fixação Rígida para Rádio Distal Direita 7 X 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	64 x 10 mm	

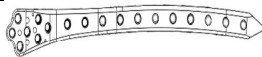
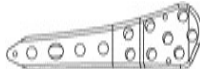
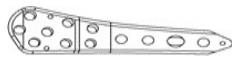
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.40.50.09.051	Placa Fixação Rígida para Rádio Distal Esquerda 7 X 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	50,3 x 10 mm	
1.67.40.50.10.057	Placa Fixação Rígida para Rádio Distal Esquerda 7 X 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	55,9 x 10 mm	
1.67.40.50.11.064	Placa Fixação Rígida para Rádio Distal Esquerda 7 X 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	64 x 10 mm	
1.67.40.71.05.030	Placa "L" Direita para Rádio Proximal Fixação Rígida 2.4/3.2 – 3 X 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31 x 17 mm	
1.67.40.71.06.044	Placa "L" Direita para Rádio Proximal Fixação Rígida 2.4/3.2 – 3 X 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,8 x 17 mm	
1.67.40.71.07.059	Placa "L" Direita para Rádio Proximal Fixação Rígida 2.4/3.2 – 3 X 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	60,6 x 17 mm	
1.67.40.72.05.030	Placa "L" Esquerda P/ Rádio Proximal Fixação Rígida 2.4/3.2 – 3 X 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31 x 17 mm	
1.67.40.72.06.044	Placa "L" Esquerda P/ Rádio Proximal Fixação Rígida 2.4/3.2 – 3 X 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,8 x 17 mm	
1.67.40.72.07.059	Placa "L" Esquerda P/ Rádio Proximal Fixação Rígida 2.4/3.2 – 3 X 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	60,6 x 17 mm	
1.67.40.73.06.030	Placa "T" para Rádio Proximal 4 X 2 Furos Fixação Rígida 2.4/3.2	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	34 x 30 mm	
1.67.40.73.07.044	Placa "T" para Rádio Proximal 4 X 3 Furos Fixação Rígida 2.4/3.2	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	48 x 30 mm	
1.67.40.73.07.059	Placa "T" para Rádio Proximal 4 X 4 Furos Fixação Rígida 2.4/3.2	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62 x 30 mm	
1.67.40.96.06.044	Placa Fixação Rígida para Ulna Distal Direita 4 X 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	44,7 x 15,3	

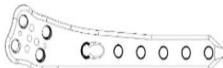
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.40.96.07.054	Placa Fixação Rígida para Ulna Distal Direita 4 X 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44,7 x 15,3	
1.67.40.96.08.076	Placa Fixação Rígida para Ulna Distal Direita 4 X 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44,7 x 15,3	
1.67.40.97.06.044	Placa Fixação Rígida para Ulna Distal Esquerda 4 X 2 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44,7 x 15,3	
1.67.40.97.07.054	Placa Fixação Rígida para Ulna Distal Esquerda 4 X 3 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44,7 x 15,3	
1.67.40.97.08.076	Placa Fixação Rígida para Ulna Distal Esquerda 4 X 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44,7 x 15,3	
Placas de Fêmur Proximal					
Código	Descrição	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	Imagem
1.67.45.30.05.134	Placa Fixação Rígida Para Fêmur Proximal 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	134 x 16 mm	
1.67.45.30.07.192	Placa Fixação Rígida Para Fêmur Proximal 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	192 x 16 mm	
1.67.45.30.09.250	Placa Fixação Rígida Para Fêmur Proximal 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	250 x 16 mm	
1.67.45.30.11.308	Placa Fixação Rígida Para Fêmur Proximal 11 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	308 x 16 mm	
45.5017.001	Placa FR Fêmur Proximal "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	140 x 16 mm	
45.5018.001	Placa FR Fêmur Proximal "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	180 x 16 mm	
45.5019.001	Placa FR Fêmur Proximal "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	220 x 16 mm	

45.5020.001	Placa FR Fêmur Proximal "D" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	260 x 16 mm	
45.5021.001	Placa FR Fêmur Proximal "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	300 x 16 mm	
45.5017.002	Placa FR Fêmur Proximal "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	140 x 16 mm	
45.5018.002	Placa FR Fêmur Proximal "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	180 x 16 mm	
45.5019.002	Placa FR Fêmur Proximal "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	220 x 16 mm	
45.5020.002	Placa FR Fêmur Proximal "E" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	260 x 16 mm	
45.5021.002	Placa FR Fêmur Proximal "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	300 x 16 mm	

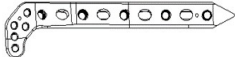
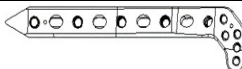
Placas de Fêmur Distal

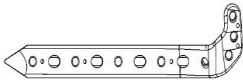
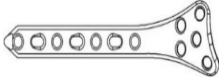
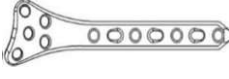
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
45.5001.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	163 x 17 mm	
45.5002.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	201 x 17 mm	
45.5003.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	239 x 17 mm	
45.5004.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	277 x 17 mm	
45.5005.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	314 x 17 mm	
45.5001.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	163 x 17 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
45.5002.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	201 x 17 mm	
45.5003.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	239 x 17 mm	
45.5004.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	277 x 17 mm	
45.5005.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	314 x 17 mm	
1.67.50.24.11.103	Placa Fêmur Distal Lateral "E" 11 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	117 x 16 mm	
1.67.50.24.12.142	Placa Fêmur Distal Lateral "E" 12 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 16 mm	
1.67.50.24.13.171	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Esquerda 13 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	175 x 16 mm	
1.67.50.24.14.200	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Esquerda 14 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	204 x 16 mm	
1.67.50.24.15.229	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Esquerda 15 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	233 x 16 mm	
1.67.50.25.11.103	Placa Fêmur Distal Lateral "D" 11 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	117 x 16 mm	
1.67.50.25.12.142	Placa Fêmur Distal Lateral "D" 12 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 16 mm	
1.67.50.25.13.171	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Direita 13 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	175 x 16 mm	
1.67.50.25.14.200	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Direita 14 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	204 x 16 mm	

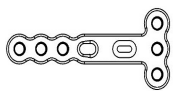
1.67.50.25.15.229	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Direita 15 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	233 x 16 mm	
1.67.50.22.11.171	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial P "E"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	115,7 x 16 mm	
1.67.50.22.12.200	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial M "E"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130,7 x 16 mm	
1.67.50.22.13.229	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial G "E"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	145,7 x 16 mm	
1.67.50.23.11.171	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial P "D"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	115,7 x 16 mm	
1.67.50.23.12.200	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial M "D"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130,7 x 16 mm	
1.67.50.23.13.229	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial G "D"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	145,7 x 16 mm	

Placas de Tíbia Proximal / Osteotomia de Tíbia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.2850.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73 x 15 mm	
35.2851.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131,2 x 15 mm	
35.2852.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	159,9 x 15 mm	
35.2853.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "D" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	189,4 x 15 mm	
35.2854.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	218 x 15 mm	
35.2850.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73 x 15 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.2851.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131,2 x 15 mm	
35.2852.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	159,9 x 15 mm	
35.2853.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "E" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	189,4 x 15 mm	
35.2854.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	218 x 15 mm	
1.67.50.11.08.162	Placa Fixação Rígida Tíbia Proximal Lateral Direita 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	161 x 15 mm	
1.67.50.11.09.191	Placa Fixação Rígida Tíbia Proximal Lateral Direita 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190 x 15 mm	
1.67.50.11.10.220	Placa Fixação Rígida Tíbia Proximal Lateral Direita 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	219 x 15 mm	
1.67.50.10.08.162	Placa Fixação Rígida Tíbia Proximal Lateral Esquerda 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	161 x 15 mm	
1.67.50.10.09.191	Placa Fixação Rígida Tíbia Proximal Lateral Esquerda 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190 x 15 mm	
1.67.50.10.10.220	Placa Fixação Rígida Tíbia Proximal Lateral Esquerda 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	219 x 15 mm	
1.67.50.13.08.131	Placa Fixação Rígida para Tíbia Proximal Epífise Direita 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131 x 16 mm	
1.67.50.13.09.160	Placa Fixação Rígida para Tíbia Proximal Epífise Direita 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160 x 16 mm	
1.67.50.12.08.131	Placa Fixação Rígida p/ Tíbia Proximal Epífise Esquerda 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131 x 16 mm	

1.67.50.12.09.160	Placa Fixação Rígida p/ Tibia Proximal Epífise Esquerda 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160 x 16 mm	
35.3520.001	Placa FR Tibia Proximal Medial "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	81 x 15 mm	
35.3521.001	Placa FR Tibia Proximal Medial "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110 x 15 mm	
35.3522.001	Placa FR Tibia Proximal Medial "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	139 x 15 mm	
35.3536.001	Placa FR Tibia Proximal Medial "D" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	168 x 15 mm	
35.3537.001	Placa FR Tibia Proximal Medial "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	197 x 15 mm	
35.3520.002	Placa FR Tibia Proximal Medial "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	81 x 15 mm	
35.3521.002	Placa FR Tibia Proximal Medial "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110 x 15 mm	
35.3522.002	Placa FR Tibia Proximal Medial "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	139 x 15 mm	
35.3536.002	Placa FR Tibia Proximal Medial "E" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	168 x 15 mm	
35.3537.002	Placa FR Tibia Proximal Medial "E" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	197 x 15 mm	
35.3538.000	Placa FR de Osteotomia para Tibia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	21,5 x 9,5 mm	
35.3539.000	Placa FR de Osteotomia para Tibia M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	25,5 x 9,5 mm	

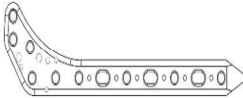
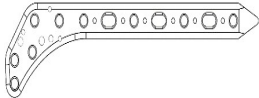
35.3540.001	Placa "T" FR de Osteotomia "D" para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	55,7 x 14 mm	
35.3541.001	Placa "T" FR de Osteotomia "D" para Tíbia M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	63,7 x 14 mm	
35.3542.001	Placa "T" FR de Osteotomia "D" para Tíbia G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73,7 x 14 mm	
35.3540.002	Placa "T" FR de Osteotomia "E" para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	55,7 x 14 mm	
35.3541.002	Placa "T" FR de Osteotomia "E" para Tíbia M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	63,7 x 14 mm	
35.3542.002	Placa "T" FR de Osteotomia "E" para Tíbia G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73,7 x 14 mm	
35.3543.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 5 Furos P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58 x 14 mm	
35.3544.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 5 Furos M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	68 x 14 mm	
35.3545.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 5 Furos G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	77 x 14 mm	
35.3546.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 6 Furos P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	70,1 x 14 mm	
35.3547.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 6 Furos M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	80,1 x 14 mm	
35.3548.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 6 Furos G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90,1 x 14 mm	
35.3549.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 7 Furos P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	82 x 14 mm	

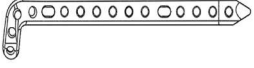
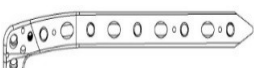
35.3550.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 7 Furos M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	92 x 14 mm	
35.3551.000	Placa "T" FR de Osteotomia para Tíbia 7 Furos G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	102 x 14 mm	
35.3552.000	Placa FR de Osteotomia para Tíbia 4 Furos P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51 x 24,4 mm	
35.3553.000	Placa FR de Osteotomia para Tíbia 4 Furos M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	61 x 24,4 mm	
35.3553.001	Placa FR de Osteotomia "D" para Tíbia 5 Furos P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	46 x 30 mm	
35.3554.001	Placa FR de Osteotomia "D" para Tíbia 5 Furos M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	56 x 30 mm	
35.3553.002	Placa FR de Osteotomia "E" para Tíbia 5 Furos P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	46 x 30 mm	
35.3554.002	Placa FR de Osteotomia "E" para Tíbia 5 Furos M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	56 x 30 mm	
35.3555.001	Placa de Osteotomia Proximal "D" 5 Furos FR para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	96,5 x 15 mm	
35.3556.001	Placa de Osteotomia Proximal "D" 6 Furos FR para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	100 x 15 mm	
35.3555.002	Placa de Osteotomia Proximal "E" 5 Furos FR para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	96,5 x 15 mm	
35.3557.002	Placa de Osteotomia Proximal "E" 6 Furos FR para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	100 x 15 mm	
1.67.50.15.07.140	Placa Fixação Rígida para Tíbia Proximal Medial Direita 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	140 x 15 mm	

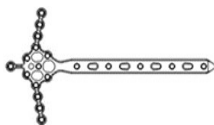
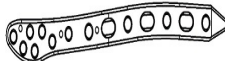
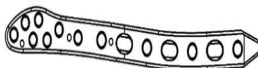
1.67.50.15.08.169	Placa Fixação Rígida para Tíbia Proximal Medial Direita 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	169 x 15 mm	
1.67.50.14.07.140	Placa Fixação Rígida para Tíbia Proximal Medial Esquerda 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	140 x 15 mm	
1.67.50.14.08.169	Placa Fixação Rígida para Tíbia Proximal Medial Esquerda 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	169 x 15 mm	
45.5010.000	Placa FR "T" para Tíbia 5 Furos 69 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	69 x 16 mm	
45.5011.000	Placa FR "T" para Tíbia 5 Furos 86 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	86 x 16 mm	
45.5012.000	Placa FR "T" para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 16 mm	
45.5013.000	Placa FR "T" para Tíbia M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 16 mm	
45.5014.000	Placa FR "T" para Tíbia G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	176 x 16 mm	
45.5034.001	Placa FR "L" D para Tíbia 5 Furos 73 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73 x 16 mm	
45.5035.001	Placa FR "L" D para Tíbia 5 Furos 90 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90 x 16 mm	
45.5031.001	Placa FR "L" Direita para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 16 mm	
45.5032.001	Placa FR "L" Direita para Tíbia M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 16 mm	
45.5033.001	Placa FR "L" Direita para Tíbia G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	176 x 16 mm	
45.5034.002	Placa FR "L" E para Tíbia 5 Furos 73 mm	Promover a correção, restauração, estabilização,	TITÂNIO ASTM F67	73 x 16 mm	

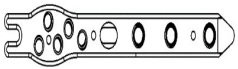
		alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
45.5035.002	Placa FR "L" E para Tíbia 5 Furos 90 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90 x 16 mm	
45.5031.002	Placa FR "L" Esquerda para Tíbia P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 16 mm	
45.5032.002	Placa FR "L" Esquerda para Tíbia M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 16 mm	
45.5033.002	Placa FR "L" Esquerda para Tíbia G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	176 x 16 mm	
45.3304.069	Placa FR "T" para Tíbia 4 Furos 69 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	69 x 16 mm	
45.3304.086	Placa FR "T" para Tíbia 4 Furos 86 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	86 x 16 mm	
1.67.45.33.05.116	Placa Fixação Rígida "T" para Tíbia 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 16 mm	
1.67.45.33.06.146	Placa Fixação Rígida "T" para Tíbia 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 16 mm	
1.67.45.33.07.176	Placa Fixação Rígida "T" para Tíbia 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	176 x 16 mm	
45.3104.073	Placa FR "L" D para Tíbia 4 Furos 73 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73 x 16 mm	
45.3104.090	Placa FR "L" D para Tíbia 4 Furos 90 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90 x 16 mm	
1.67.45.31.05.120	Placa Fixação Rígida "L" Direita para Tíbia 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120 x 16 mm	
1.67.45.31.06.150	Placa Fixação Rígida "L" Direita para Tíbia 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	150 x 16 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.45.31.07.180	Placa Fixação Rígida “L” Direita para Tíbia 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	180 x 16 mm	
45.3204.073	Placa FR “L” E para Tíbia 4 Furos 73 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73 x 16 mm	
45.3204.090	Placa FR “L” E para Tíbia 4 Furos 90 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90 x 16 mm	
1.67.45.32.05.120	Placa Fixação Rígida “L” Esquerda para Tíbia 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120 x 16 mm	
1.67.45.32.06.150	Placa Fixação Rígida “L” Esquerda para Tíbia 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	150 x 16 mm	
1.67.45.32.07.180	Placa Fixação Rígida “L” Esquerda para Tíbia 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	180 x 16 mm	
Placa Tíbia Distal					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	
1.67.40.19.10.124	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Medial Direita 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127 x 13 mm	
1.67.40.19.11.153	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Medial Direita 11 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	156 x 13 mm	
1.67.40.19.12.182	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Medial Direita 12 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	185 x 13 mm	
40.1914.242	Placa para Tíbia Distal Medial “D” 14 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	240 x 13 mm	
40.1916.289	Placa para Tíbia Distal Medial “D” 16 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	287 x 13 mm	
1.67.40.18.10.124	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Medial Esquerda 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127 x 13 mm	

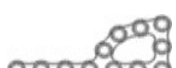
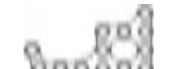
1.67.40.18.11.153	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Medial Esquerda 11 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	156 x 13 mm	
1.67.40.18.12.182	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Medial Esquerda 12 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	185 x 13 mm	
40.1814.242	Placa para Tíbia Distal Medial "E" 14 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	240 x 13 mm	
40.1816.289	Placa para Tíbia Distal Medial "E" 16 Furos FR	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	287 x 13 mm	
1.67.40.17.08.119	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Maléolo Medial Direita 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119 x 13 mm	
1.67.40.17.09.148	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Maléolo Medial Direita 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	148 x 13 mm	
1.67.40.17.10.177	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Maléolo Medial Direita 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	177 x 13 mm	
1.67.40.16.08.119	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Maléolo Medial Esquerda 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119 x 13 mm	
1.67.40.16.09.148	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Maléolo Medial Esquerda 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	148 x 13 mm	
1.67.40.16.10.177	Placa Fixação Rígida P/ Tíbia Distal Maléolo Medial Esquerda 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	177 x 13 mm	
35.2846.001	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "D" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	61,1 x 12 mm	
35.2847.001	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "D" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	101 x 12 mm	
35.2848.001	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "D" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	153 x 12 mm	

35.2849.001	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "D" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	246 x 12 mm	
35.2846.002	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "E" P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	61,1 x 12 mm	
35.2847.002	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "E" M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	101 x 12 mm	
35.2848.002	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "E" G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	153 x 12 mm	
35.2849.002	Placa FR Tíbia Distal Ântero-posterior "E" EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	246 x 12 mm	
1.67.40.21.07.129	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Anterolateral Direita 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	129 x 13 mm	
1.67.40.21.08.158	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Anterolateral Direita 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	158 x 13 mm	
1.67.40.21.09.187	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Anterolateral Direita 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	187 x 13 mm	
35.4004.001	Placa FR Tíbia Antero Lateral "D" XG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	246 x 13 mm	
35.4003.001	Placa FR Tíbia Antero Lateral "D" SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	289 x 13 mm	
1.67.40.20.07.129	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Anterolateral Esquerda 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	129 x 13 mm	
1.67.40.20.08.158	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Anterolateral Esquerda 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	158 x 13 mm	
1.67.40.20.09.187	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal Anterolateral Esquerda 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	187 x 13 mm	
35.4004.002	Placa FR Tíbia Antero Lateral "E" XG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	246 x 13 mm	

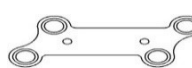
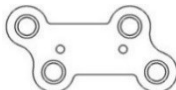
		alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4003.002	Placa FR Tíbia Antero Lateral “E” SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	289 x 13 mm	
1.67.35.29.18.162	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal 18 Furos Sistema 3.5 / 4.0	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	162,15 x 12 mm	
1.67.35.29.19.191	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal 19 Furos Sistema 3.5 / 4.0	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	191,15 x 12 mm	
1.67.35.29.20.220	Placa Fixação Rígida Para Tíbia Distal 20 Furos Sistema 3.5 / 4.0	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	220,15 x 12 mm	
Placas de Fíbula Distal					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
1.67.35.07.09.088	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Direita para Fíbula 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88,4 x 11 mm	
1.67.35.07.10.112	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Direita para Fíbula 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	112,3 x 11 mm	
1.67.35.07.11.136	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Direita para Fíbula 11 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	136,2 x 11 mm	
1.67.35.07.12.160	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Direita para Fíbula 12 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,1 x 11 mm	
1.67.35.07.13.184	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Direita para Fíbula 13 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	184 x 11 mm	
1.67.35.06.09.088	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Esquerda para Fíbula 9 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88,4 x 11 mm	
1.67.35.06.10.112	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Esquerda para Fíbula 10 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	112,3 x 11 mm	
1.67.35.06.11.136	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Esquerda para Fíbula 11 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	136,2 x 11 mm	

1.67.35.06.12.160	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Esquerda para Fíbula 12 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,1 x 11 mm	
1.67.35.06.13.184	Placa Fixação Rígida Maléolo Lateral Esquerda para Fíbula 13 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	184 x 11 mm	
35.0401.000	Placa FR Fíbula Distal P	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	69 x 10 mm	
35.0402.000	Placa FR Fíbula Distal M	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84 x 10 mm	
35.0403.000	Placa FR Fíbula Distal G	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	99 x 10 mm	
35.0404.000	Placa FR Fíbula Distal EG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	114 x 10 mm	
35.0405.000	Placa FR Fíbula Distal SG	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	129 x 10 mm	

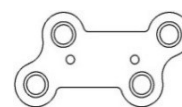
Placas para região dos Pés

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
1.67.32.68.12.061	Placa Para Calcâneo Direita 12 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	61 x 7 mm	
1.67.32.69.12.061	Placa Para Calcâneo Esquerdo 12 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	61 x 7 mm	
1.67.32.68.13.055	Placa Para Calcâneo Direito 13 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31 x 15 mm	
1.67.32.69.13.055	Placa Para Calcâneo Esquerdo 13 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31x 15 mm	
1.67.32.48.04.100	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Direita 1.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 1 x 13,4 mm	
1.67.32.48.04.200	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Direita 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 2 x 13,4 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.32.48.04.300	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Direita 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 3 x 13,4 mm	
1.67.32.48.04.400	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Direita 4.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 4 x 13,4 mm	
1.67.32.48.04.500	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Direita 5.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 5 x 13,4 mm	
1.67.32.48.04.600	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Direita 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 6 x 13,4 mm	
1.67.32.49.04.100	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 1.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 1 x 13,4 mm	
1.67.32.49.04.200	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 2 x 13,4 mm	
1.67.32.49.04.300	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 3 x 13,4 mm	
1.67.32.49.04.400	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 4.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 4 x 13,4 mm	
1.67.32.49.04.500	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 5.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 5 x 13,4 mm	
1.67.32.49.04.600	Placa p/ Osteotomia dos Pés 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,4 x 6 x 13,4 mm	
1.67.32.05.04.202	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Direita 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,2 x 15 x 2 mm	
1.67.32.05.04.204	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Direita 4.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,2 x 15 x 4 mm	
1.67.32.05.04.246	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Direita 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,2 x 15 x 6 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.32.05.04.248	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Direita 8.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,2 x 15 x 8 mm	
1.67.32.06.04.202	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 2.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,2 x 15 x 2 mm	
1.67.32.06.04.204	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 4.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,2 x 15 x 4 mm	
1.67.32.06.04.246	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,2 x 15 x 6 mm	
1.67.32.06.04.248	Placa de Alongamento e Fusão do Retropé 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 8.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,2 x 15 x 8 mm	
1.67.32.88.08.022	Placa Cuboide Direita 8 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	24,2 x 23,6 mm	
1.67.32.89.08.022	Placa Cuboide Esquerda 8 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	24,2 x 23,6 mm	
1.67.32.05.04.012	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Direita 12 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	25,2 x 16,5 mm	
1.67.32.05.04.016	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Direita 16 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	29,2 x 16,5 mm	
1.67.32.05.04.018	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Direita 18 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,2 x 16,5 mm	
1.67.32.05.04.020	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Direita 20 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	33,2 x 16,5 mm	
1.67.32.05.04.030	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Direita 30 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	43,2 x 16,5 mm	
1.67.32.05.06.047	Placa Tarsal 6 Furos Fixação Rígida Direita	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	49,2 x 17 mm	

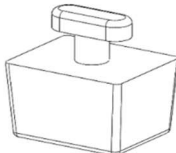
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.32.05.08.061	Placa Tarsal 8 Furos Fixação Rígida Direita	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	63,2 x 17 mm	
1.67.32.05.04.222	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Direita 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	24,2 x 17 mm	
1.67.32.05.06.332	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Direita 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,2 x 17 mm	
1.67.32.05.08.442	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Direita 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	46,2 x 17 mm	
1.67.32.05.14.772	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Direita 14 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,2 x 17 mm	
1.67.32.06.04.012	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 12 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	25,2 x 16,5 mm	
1.67.32.06.04.016	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 16 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	29,2 x 16,5 mm	
1.67.32.06.04.018	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 18 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,2 x 16,5 mm	
1.67.32.06.04.020	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 20 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	33,2 x 16,5 mm	
1.67.32.06.04.030	Placa Tarsal 4 Furos Fixação Rígida Esquerda 30 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	43,2 x 16,5 mm	
1.67.32.06.06.047	Placa Tarsal 6 Furos Fixação Rígida Esquerda	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	49,2 x 17 mm	
1.67.32.06.08.061	Placa Tarsal 8 Furos Fixação Rígida Esquerda	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	63,2 x 17 mm	
1.67.32.06.04.222	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Esquerda 4 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	24,2 x 17 mm	

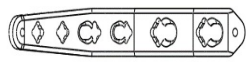


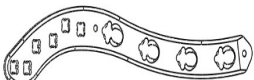
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.32.06.06.332	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Esquerda 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,2 x 17 mm	
1.67.32.06.08.442	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Esquerda 8 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	46,2 x 17 mm	
1.67.32.06.14.772	Placa Reconstrução Tarsal Fixação Rígida Esquerda 14 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,2 x 17 mm	
1.67.32.66.05.032	Placa "L" com Raio p/ Região dos Pés Direita 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	32 x 7 mm	
1.67.32.67.05.032	Placa "L" com Raio p/ Região dos Pés Esquerda 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	32 x 7 mm	
1.67.32.66.05.034	Placa "L" com Raio p/ Região dos Pés Direita Oblíqua 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	34,55 x 7 mm	
1.67.32.67.05.034	Placa "L" com Raio p/ Região dos Pés Esquerda Oblíqua 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	34,55 x 7 mm	
1.67.32.85.05.325	Placa "T" para Metatarso com Raio 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	32,5 x 7,5 mm	
28.4507.003	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 7 F 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,55 x 16 x 3	
28.4507.005	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 7 F 5.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,55 x 16 x 5 mm	
28.4507.006	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 7 F 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,55 x 16 x 6 mm	
28.4507.007	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 7 F 7.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,55 x 16 x 7 mm	
28.4507.008	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 7 F 8.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,55 x 16 x 8 mm	

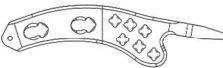
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
28.1207.473	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "D" 7 F 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 3 mm	
28.1207.475	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "D" 7 F 5.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 5 mm	
28.1207.476	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "D" 7 F 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 6 mm	
28.1207.477	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "D" 7 F 7.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 7 mm	
28.1207.478	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "D" 7 F 8.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 8 mm	
28.1107.473	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "E" 7 F 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 3 mm	
28.1107.475	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "E" 7 F 5.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 5 mm	
28.1107.476	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "E" 7 F 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 6 mm	
28.1107.477	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "E" 7 F 7.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 7 mm	
28.1107.478	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 120° "E" 7 F 8.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,5 x 15,9 x 8 mm	
28.1207.513	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "D" 7 F 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 3 mm	
28.1207.515	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "D" 7 F 5.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 5 mm	
28.1207.516	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "D" 7 F 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 6 mm	

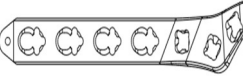
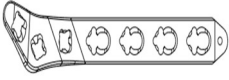
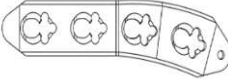
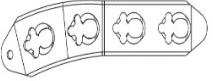
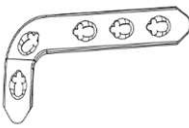
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
28.1207.517	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "D" 7 F 7.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 7 mm	
28.1207.518	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "D" 7 F 8.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 8 mm	
28.1107.513	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "E" 7 F 3.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 3 mm	
28.1107.515	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "E" 7 F 5.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 5 mm	
28.1107.516	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "E" 7 F 6.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 6 mm	
28.1107.517	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "E" 7 F 7.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 7 mm	
28.1107.518	Placa FR Osteotomia 1º Metatarso 140° "E" 7 F 8.0 mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,15 x 13,2 x 8 mm	
1.67.32.96.06.051	Placa Falange e Metatarso Direita 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	50,1 x 20,5 mm	
1.67.32.97.06.051	Placa Falange e Metatarso Esquerda 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	50,1 x 20,5 mm	
1.67.32.96.05.041	Placa Falange Metatarso Direita Menor 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	41 x 20,5 mm	
1.67.32.97.05.041	Placa Falange e Metatarso Esquerda Menor 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	41 x 20,5 mm	
1.67.32.85.05.032	Placa "T" para Metatarso Fixação Rígida 5 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	32 x 13,5 mm	
1.67.32.85.06.040	Placa "T" para Metatarso Fixação Rígida 6 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	40 x 13,5 mm	

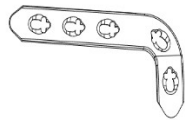
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
1.67.32.85.07.048	Placa "T" para Metatarso Fixação Rígida 7 Furos	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	48 x 13,5 mm	
1.67.32.98.06.045	Placa Metatarso Direita 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,5 x 18,5 mm	
1.67.32.99.06.045	Placa Metatarso Esquerda 5 Furos Fixação Rígida	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45,5 x 18,5 mm	
35.0009.005	Conjunto Calço 9.0 x 5.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	9 x 5 mm	
35.0009.007	Conjunto Calço 9.0 x 7.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	9 x 7 mm	
35.0009.009	Conjunto Calço 9.0 x 9.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	9 x 9 mm	
35.0009.011	Conjunto Calço 9.0 x 11 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	9 x 11 mm	
35.0009.013	Conjunto Calço 9.0 x 13 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	9 x 13 mm	
35.0009.015	Conjunto Calço 9.0 x 15 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	9 x 15 mm	
35.0014.005	Conjunto Calço 14 x 5.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	14 x 5 mm	
35.0014.007	Conjunto Calço 14 x 7.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	14 x 7 mm	
350.014.009	Conjunto Calço 14 x 9.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	14 x 9 mm	
35.0014.011	Conjunto Calço 14 x 11.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	14 x 11 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.0014.013	Conjunto Calço 14 x 13.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	14 x 13 mm	
35.0014.015	Conjunto Calço 14 x 15.0 mm para Placa de Osteotomia	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	14 x 15 mm	
Placas de Clavícula e Escápula FV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.1104.001	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	75 x 10,7 mm	
35.1106.001	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	102 x 10,7 mm	
35.1108.001	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130 x 10,7 mm	
35.1104.002	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	75 x 10,7 mm	
35.1106.002	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	102 x 10,7 mm	
35.1108.002	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130 x 10,7 mm	
35.1132.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	75,3 x 10 mm	
35.1142.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84,1 x 10 mm	
35.1143.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	97,5 x 10 mm	
35.1144.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	117,5 x 10 mm	

35.1162.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	75 x 10 mm	
35.1163.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	92 x 10 mm	
35.1164.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	109 x 10 mm	
35.1165.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	125 x 10 mm	
35.1166.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	141 x 10 mm	
35.1162.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	75 x 10 mm	
35.1163.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	92 x 10 mm	
35.1164.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	109 x 10 mm	
35.1165.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	125 x 10 mm	
35.1166.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	141 x 10 mm	
35.7263.001	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	93 x 10 mm	
35.7264.001	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110 x 10 mm	
35.7265.001	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127 x 10 mm	

35.7263.002	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	93 x 10 mm	
35.7264.002	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110 x 10 mm	
35.7265.002	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127 x 10 mm	
35.2612.001	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 10,7 x 12 mm	
35.2615.001	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 10,7 x 15 mm	
35.2618.001	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 10,7 x 18 mm	
35.2612.002	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 10,7 x 12 mm	
35.2615.002	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 10,7 x 15 mm	
35.2618.002	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 10,7 x 18 mm	
28.1231.001	PLACA CAVIDADE GLENODIAL DA ESCÁPULA DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,1 x 11 mm	
28.1231.002	PLACA CAVIDADE GLENODIAL DA ESCÁPULA ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,1 x 11 mm	
28.1235.001	PLACA ACROMIO DA ESCÁPULA DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	94,6 x 9,5 mm	

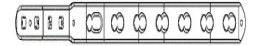
28.1235.002	PLACA ACROMIO DA ESCÁPULA ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	94,6 x 9,5 mm	
35.1241.001	PLACA COLUNA DA ESCÁPULA DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	87,1 x 10 mm	
35.1241.002	PLACA COLUNA DA ESCÁPULA ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	87,1 x 10 mm	
28.5604.001	PLACA ESPINHA DA ESCÁPULA DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	59 x 10 mm	
28.5604.002	PLACA ESPINHA DA ESCÁPULA ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	59 x 10 mm	
35.5568.001	PLACA MARGEM MEDIAL DA ESCÁPULA DIREITA 8 FUROS FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,9 X 10 mm	
35.5568.002	PLACA MARGEM MEDIAL DA ESCÁPULA ESQUERDA 8 FUROS FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,9 X 10 mm	
35.5570.001	PLACA MARGEM MEDIAL DA ESCÁPULA DIREITA 6 FUROS FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95,1 x 10 mm	
35.5570.002	PLACA MARGEM MEDIAL DA ESCÁPULA ESQUERDA 6 FUROS FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95,1 x 10 mm	
35.6105.001	PLACA DA FOSSA INFRAESPINHAL DA ESCÁPULA DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	67,8 x 10 mm	

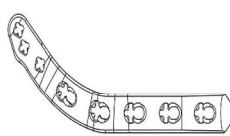
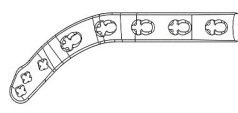
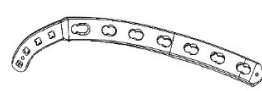
35.6105.002	PLACA DA FOSSA INFRAESPINHAL DA ESCÁPULA ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	67,8 x 10 mm	
-------------	--	--	------------------	--------------	---

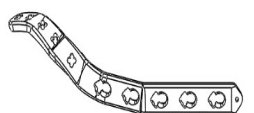
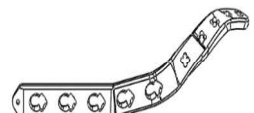
Placas de Úmero Proximal FV

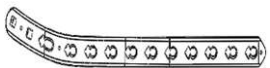
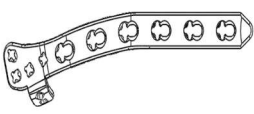
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.2002.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	91 x 14 mm	
35.2004.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	124 x 14 mm	
35.2006.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	157 x 14 mm	
35.2008.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190 x 14 mm	
35.2010.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	223 x 14 mm	
35.2012.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “ESG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	256 x 14 mm	

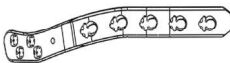
Placas de Úmero Distal FV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.2142.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	109 x 12 mm	
35.2143.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122 x 12 mm	
35.2144.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135 x 12 mm	
35.2145.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	148 x 12 mm	
35.2146.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	161 x 12 mm	

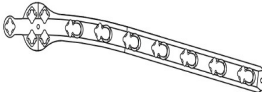
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.2147.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “ESG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	174 x 12 mm	
35.2001.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	91 x 11,5 mm	
35.2002.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	100 x 11,5 mm	
35.2003.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120 x 11,5 mm	
35.2004.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130 x 11,5 mm	
35.2001.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	91 x 11,5 mm	
35.2002.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	100 x 11,5 mm	
35.2003.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120 x 11,5 mm	
35.2004.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130 x 11,5 mm	
35.2243.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	85 x 12,2 mm	
35.2244.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	102 x 12,2 mm	
35.2245.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119 x 12,2 mm	
35.2246.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	136 x 12,2 mm	

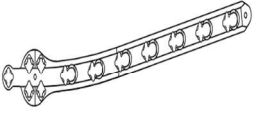
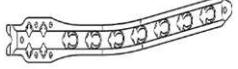
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.2247.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	153 x 12,2 mm	
35.2248.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “ESG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	170 x 12,2 mm	
35.2243.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	85 x 12,2 mm	
35.2244.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	102 x 12,2 mm	
35.2245.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119 x 12,2 mm	
35.2246.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	136 x 12,2 mm	
35.2247.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	153 x 12,2 mm	
35.2248.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “ESG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	170 x 12,2 mm	
35.3001.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110,5 x 11 mm	
35.3002.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,5 x 11 mm	
35.3003.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,5 x 11 mm	
35.3001.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	110,5 x 11 mm	
35.3002.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	135,5 x 11 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.3003.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,5 x 11 mm	
35.2305.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	117 x 14 mm	
35.2307.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	151 x 14 mm	
35.2309.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	185 x 14 mm	
35.2311.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	219 x 14 mm	
35.2305.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	117 x 14 mm	
35.2307.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	151 x 14 mm	
35.2309.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	185 x 14 mm	
35.2311.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	219 x 14 mm	
35.2701.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107 x 11,5 mm	
35.2702.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	123 x 11,5 mm	
35.2703.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	139 x 11,5 mm	
35.2701.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	107 x 11,5 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.2702.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	123 x 11,5 mm	
35.2703.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	139 x 11,5 mm	
35.3101.001	PLACA POSTEROLATERAL DIREITA DO ÚMERO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	106 x 11,5 mm	
35.3102.001	PLACA POSTEROLATERAL DIREITA DO ÚMERO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122 x 11,5 mm	
35.3103.001	PLACA POSTEROLATERAL DIREITA DO ÚMERO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	138 x 11,5 mm	
35.3101.002	PLACA POSTEROLATERAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	106 x 11,5 mm	
35.3102.002	PLACA POSTEROLATERAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122 x 11,5 mm	
35.3103.002	PLACA POSTEROLATERAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	138 x 11,5 mm	

Placas de Olecrano FV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.4101.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	104,2 x 11 mm	
35.4102.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	121 x 11 mm	
35.4103.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	137,7 x 11 mm	
35.4104.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	154,4 x 11 mm	

35.4101.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	104,2 x 11 mm	
35.4102.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	121 x 11 mm	
35.4103.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	137,7 x 11 mm	
35.4104.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	154,4 x 11 mm	
35.4301.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,3 x 10 mm	
35.4302.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127,1 x 10 mm	
35.4303.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144,2 x 10 mm	
35.4304.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160 x 10 mm	
35.4301.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111,3 x 10 mm	
35.4302.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	127,1 x 10 mm	
35.4303.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144,2 x 10 mm	
35.4304.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160 x 10 mm	
28.0401.001	PLACA CORONÓIDE DIREITA FV – 6 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	32,1 x 6 mm	

28.0401.002	PLACA CORONÓIDE ESQUERDA FV - 6 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	32,1 x 6 mm	
28.0501.001	PLACA CORONÓIDE DIREITA FV - 8 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38,6 x 20 mm	
28.0501.002	PLACA CORONÓIDE ESQUERDA FV - 8 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38,6 x 20 mm	
35.5064.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	137 x 12 mm	
35.5065.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	154 x 12 mm	
35.5066.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	171 x 12 mm	
35.5067.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	188 x 12 mm	
35.5068.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	205 x 12 mm	
35.5064.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	137 x 12 mm	
35.5065.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	154 x 12 mm	
35.5066.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	171 x 12 mm	
35.5067.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	188 x 12 mm	

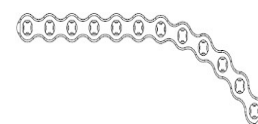
35.5068.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	205 x 12 mm	
35.5064.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	137 x 12 mm	
35.5065.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	154 x 12 mm	
35.5066.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	171 x 12 mm	
35.5067.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	188 x 12 mm	
35.5068.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	205 x 12 mm	
35.5254.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90 x 12 mm	
35.5255.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107 x 12 mm	
35.5256.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	124 x 12 mm	
35.5257.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	141 x 12 mm	
35.5258.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	158 x 12 mm	
35.5254.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90 x 12 mm	
35.5255.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107 x 12 mm	

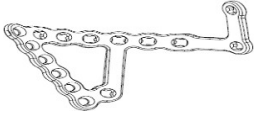
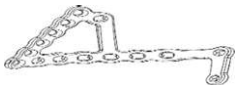
35.5256.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	124 x 12 mm	
35.5257.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	141 x 12 mm	
35.5258.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	158 x 12 mm	
Placa de Pelve FV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.7003.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 03 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38,5 x 11 mm	
35.7004.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 04 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,5 x 11 mm	
35.7005.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 05 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	64,5 x 11 mm	
35.7006.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	77,5 x 11 mm	
35.7007.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 07 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90,5 x 11 mm	
35.7008.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	103,5 x 11 mm	
35.7009.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 09 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116,5 x 11 mm	
35.7010.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	129,5 x 11 mm	
35.7011.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 11 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142,5 x 11 mm	
35.7012.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155,5 x 11 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.7013.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 13 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	168,5 x 11 mm	
35.7014.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	181,5 x 11 mm	
35.7015.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 15 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	194,5 x 11 mm	
35.7016.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	207,5 x 11 mm	
35.7018.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 18 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	233,5 x 11 mm	
35.7020.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 20 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	259,5 x 11 mm	
35.7022.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 22 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	285,5 x 11 mm	
35.7024.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 24 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	311,5 x 11 mm	
35.4206.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	75,6 x 11 mm	
35.4208.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	98,6 x 11 mm	
35.4210.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119,7 x 11 mm	
35.4212.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	138,9 x 11 mm	
35.4214.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155,3 x 11 mm	



		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4216.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	168,55 x 11 mm	
35.4206.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	76,2 x 11 mm	
35.4208.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	100,2 x 11 mm	
35.4210.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,9 x 11 mm	
35.4212.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	143,9 x 11 mm	
35.4214.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	163,35 x 11 mm	
35.4216.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	180,65 x 11 mm	
35.4210.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,9 x 11 mm	
35.4212.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144,5 x 11 mm	
35.4214.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164,4 x 11 mm	
35.4216.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	182,4 x 11 mm	
35.4210.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,9 x 11 mm	
35.4212.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144,5 x 11 mm	

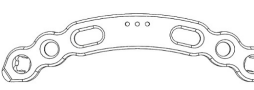
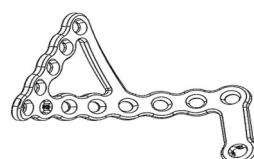
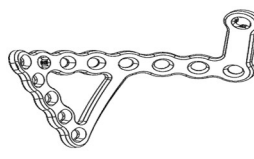


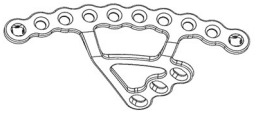
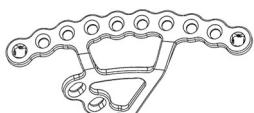
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4214.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164,4 x 11 mm	
35.4216.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	182,4 x 11 mm	
35.4204.005	PLACA SÍNFESE PÚBLICA 04 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	60,7 x 11 mm	
35.4206.005	PLACA SÍNFESE PÚBLICA 06 F FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	76,5 x 11 mm	
35.4205.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	71 x 34,9 mm	
35.4206.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	81 x 34,9 mm	
35.4207.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95 x 34,9 mm	
35.4205.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	71 x 34,9 mm	
35.4206.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	81 x 34,9 mm	
35.4207.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95 x 34,9 mm	
35.7179.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA DIREITA P FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,5 x 52,02 mm	
35.7198.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA DIREITA M FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	98,1 x 57,02 mm	
35.7112.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA DIREITA G FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107,4 x 62,02 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.7179.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA ESQUERDA P FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,5 x 52,02 mm	
35.7198.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA ESQUERDA M FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	98,1 x 57,02 mm	
35.7112.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA ESQUERDA G FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107,4 x 62,02 mm	
35.7105.004	PLACA MOLA "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,8 x 10 mm	
35.7105.005	PLACA MOLA "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,6 x 10 mm	
Placa de Pelve FVP					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.7303.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 03 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38,5 x 11 mm	
35.7304.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 04 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,5 x 11 mm	
35.7305.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 05 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	64,5 x 11 mm	
35.7306.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	77,5 x 11 mm	
35.7307.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 07 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	90,5 x 11 mm	
35.7308.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	103,5 x 11 mm	
35.7309.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 09 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116,5 x 11 mm	

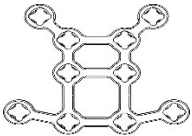
35.7310.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	129,5 x 11 mm	
35.7311.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 11 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142,5 x 11 mm	
35.7312.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155,5 x 11 mm	
35.7313.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 13 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	168,5 x 11 mm	
35.7314.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	181,5 x 11 mm	
35.7315.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 15 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	194,5 x 11 mm	
35.7316.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	207,5 x 11 mm	
35.7318.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 18 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	233,5 x 11 mm	
35.7320.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 20 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	259,5 x 11 mm	
35.7322.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 22 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	285,5 x 11 mm	
35.7324.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 24 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	311,5 x 11 mm	
35.7406.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	75,6 x 11 mm	
35.7408.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	98,6 x 11 mm	

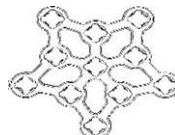
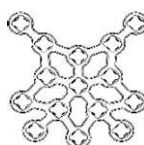
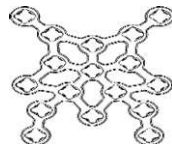
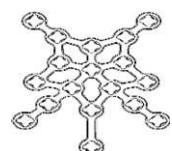
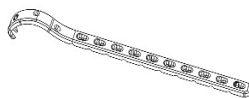
35.7410.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119,7 x 11 mm	
35.7412.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	138,9 x 11 mm	
35.7414.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155,3 x 11 mm	
35.7416.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	168,55 x 11 mm	
35.7506.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	76,2 x 11 mm	
35.7508.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	100,2 x 11 mm	
35.7510.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,9 x 11 mm	
35.7512.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	143,9 x 11 mm	
35.7514.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	163,35 x 11 mm	
35.7516.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	180,65 x 11 mm	
35.7610.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,9 x 11 mm	
35.7612.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144,5 x 11 mm	
35.7614.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164,4 x 11 mm	

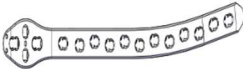
35.7616.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	182,4 x 11 mm	
35.7610.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	122,9 x 11 mm	
35.7612.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144,5 x 11 mm	
35.7614.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164,4 x 11 mm	
35.7616.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	182,4 x 11 mm	
35.7704.003	PLACA SÍNFESE PÚBICA 04 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	60,7 x 11 mm	
35.7706.003	PLACA SÍNFESE PÚBICA 06 F FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	76,5 x 11 mm	
35.7801.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	71 x 34,9 mm	
35.7802.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	81 x 34,9 mm	
35.7803.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95 x 34,9 mm	
35.7801.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	71 x 34,9 mm	
35.7802.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	81 x 34,9 mm	
35.7803.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95 x 34,9 mm	

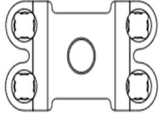
35.7901.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "P" DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,5 x 52,02 mm	
35.7902.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "M" DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	98,1 x 57,02 mm	
35.7903.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "G" DIREITA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107,4 x 62,02 mm	
35.7901.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "P" ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	79,5 x 52,02 mm	
35.7902.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "M" ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	98,1 x 57,02 mm	
35.7903.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "G" ESQUERDA FVP	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107,4 x 62,02 mm	

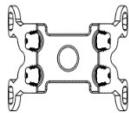
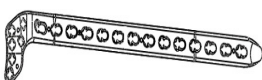
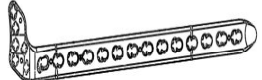
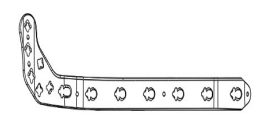
Placas de Patela FV

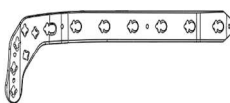
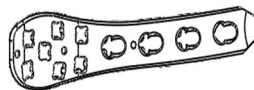
CÓDIGO	ITEM	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
28.3021.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA PEQUENA 6 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	21,2 x 15,4 mm	
28.3022.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA MÉDIA 6 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	23,1 x 16,6 mm	
28.3028.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA GRANDE 6 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	28,8 x 20,1 mm	
28.3101.000	PLACA FV MARGINAL DE PATELA PEQUENA 10 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,8 x 28,1 mm	
28.3102.000	PLACA FV MARGINAL DE PATELA MÉDIA 10 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	30,8 x 28,1 mm	
28.3103.000	PLACA FV MARGINAL DE PATELA GRANDE 10 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35,8 x 28,1 mm	
28.3201.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA PEQUENA 11 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	31,3 x 22,5 mm	

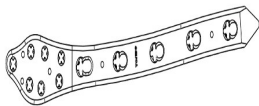
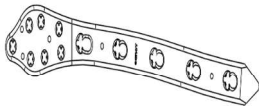
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
28.3202.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA MÉDIA 11 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	33,1 x 23,6 mm	
28.3203.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA GRANDE 11 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38,6 x 27,2 mm	
28.3401.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO PEQUENA 15 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	36,9 x 33,7 mm	
28.3402.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO MÉDIA 15 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	37,5 x 36,4 mm	
28.3403.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO GRANDE 15 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47,2 x 44,1 mm	
28.3501.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO PEQUENA 17 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	43 x 29,2 mm	
28.3502.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO MÉDIA 17 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	47 x 32,1 mm	
28.3503.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO GRANDE 17 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	59,1 x 41,2 mm	
28.3118.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA PEQUENA COM EXTENSÃO 18 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	49,9 x 33,7 mm	
28.3119.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA MÉDIA COM EXTENSÃO 18 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	51,5 x 36,4 mm	
28.3120.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA GRANDE COM EXTENSÃO 18 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	65 x 54 mm	
Placas de Fêmur Proximal Periprotético FV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
45.5020.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160 x 16 mm	

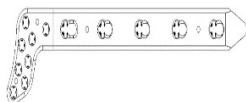
45.5021.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	200 x 16 mm	
45.5022.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	232 x 16 mm	
45.5023.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	288 x 16 mm	
45.5038.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	306 x 16 mm	
45.5024.000	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	151 x 17 mm	
45.5025.000	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	188 x 17 mm	
45.5026.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	223 x 17 mm	
45.5027.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	260 x 17 mm	
45.5029.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	297 x 17 mm	
45.5037.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	334 x 17 mm	
45.5026.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	223 x 17 mm	
45.5027.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	260 x 17 mm	
45.5029.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	297 x 17 mm	

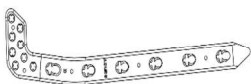
45.5037.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	334 x 17 mm	
Placas de Fêmur Distal e Periprotético FV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
45.5109.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	133 x 16 mm	
45.5111.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	188 x 16 mm	
45.5113.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	243 x 16 mm	
45.5115.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	297 x 16 mm	
45.5117.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	353 x 16 mm	
45.5109.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	133 x 16 mm	
45.5111.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	188 x 16 mm	
45.5113.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	243 x 16 mm	
45.5115.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	297 x 16 mm	
45.5117.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	353 x 16 mm	
35.3004.003	PLACA ABRAÇADEIRA PERIPROTÉTICA 4 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	36,1 x 20 mm	

35.3008.003	PLACA ABRAÇADEIRA PERIPROTÉTICA 8 FUROS	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	41,9 x 30,3 mm	
Placas de Tíbia Proximal / Distal E Osteotomia FV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
35.4601.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	112,4 x 15 mm	
35.4602.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	138,8 x 15 mm	
35.4603.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164,8 x 15 mm	
35.4604.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190,6 x 15 mm	
35.4605.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	216,1 x 15 mm	
35.4601.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	112,4 x 15 mm	
35.4602.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	138,8 x 15 mm	
35.4603.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	164,8 x 15 mm	
35.4604.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190,6 x 15 mm	
35.4605.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	216,1 x 15 mm	
35.4701.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95,9 x 15 mm	
35.4702.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119,9 x 15 mm	

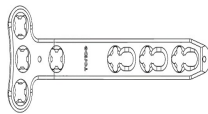
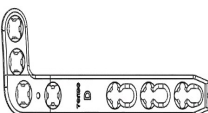
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4703.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	143,9 x 15 mm	
35.4704.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	167,9 x 15 mm	
35.4705.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	191,9 x 15 mm	
35.4701.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	95,9 x 15 mm	
35.4702.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	119,9 x 15 mm	
35.4703.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	143,9 x 15 mm	
35.4704.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	167,9 x 15 mm	
35.4705.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	191,9 x 15 mm	
35.4401.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	97 x 13 mm	
35.4402.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111 x 13 mm	
35.4403.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	126 x 13 mm	
35.4404.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	140 x 13 mm	
35.4405.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155 x 13 mm	

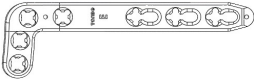
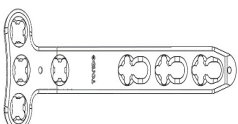
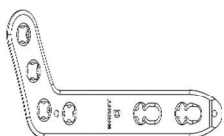
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4401.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	97 x 13 mm	
35.4402.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	111 x 13 mm	
35.4403.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	126 x 13 mm	
35.4404.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	140 x 13 mm	
35.4405.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155 x 13 mm	
35.4510.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120,5 x 13 mm	
35.4511.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	145 x 13 mm	
35.4512.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	170 x 13 mm	
35.4514.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	220 x 13 mm	
35.4516.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	270 x 13 mm	
35.4510.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120,5 x 13 mm	
35.4511.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	145 x 13 mm	
35.4512.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	170 x 13 mm	

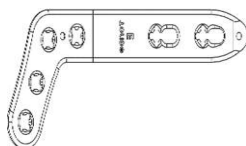
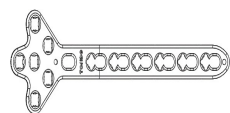
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4514.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	220 x 13 mm	
35.4516.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	270 x 13 mm	
35.1010.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130 x 14 mm	
35.1011.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155 x 14 mm	
35.1012.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	181 x 14 mm	
35.1013.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	208 x 14 mm	
35.1017.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	236 x 14 mm	
35.1010.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	130 x 14 mm	
35.1011.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155 x 14 mm	
35.1012.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	181 x 14 mm	
35.1013.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	208 x 14 mm	
35.1017.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	236 x 14 mm	
35.4801.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	83 x 14 mm	

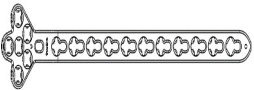
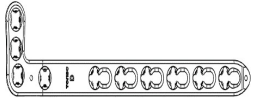
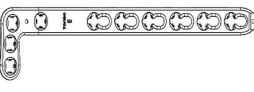
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4802.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107 x 14 mm	
35.4803.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131 x 14 mm	
35.4804.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155 x 14 mm	
35.4805.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	251 x 14 mm	
35.4801.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	83 x 14 mm	
35.4802.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	107 x 14 mm	
35.4803.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	131 x 14 mm	
35.4804.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	155 x 14 mm	
35.4805.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	251 x 14 mm	
35.1309.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV – "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88,4 x 11 mm	
35.1310.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV – "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	112,3 x 11 mm	
35.1311.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV – "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	136,2 x 11 mm	
35.1312.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV – "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,1 x 11 mm	

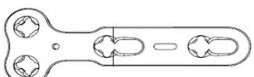
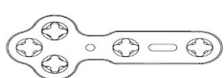
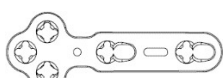
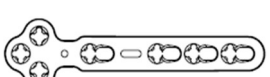
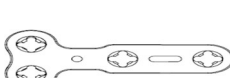
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.1313.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	184 x 11 mm	
35.1309.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88,4 x 11 mm	
35.1310.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	112,3 x 11 mm	
35.1311.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	136,2 x 11 mm	
35.1312.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	160,1 x 11 mm	
35.1313.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – “SG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	184 x 11 mm	
35.4069.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	94,9 x 11 mm	
35.4084.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	118,8 x 11 mm	
35.4099.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142,7 x 11 mm	
35.4114.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	166,6 x 11 mm	
35.4129.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190,5 x 11 mm	
35.4069.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	94,9 x 11 mm	
35.4084.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	118,8 x 11 mm	

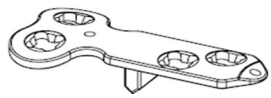
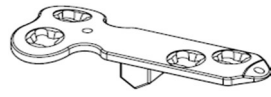
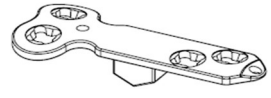
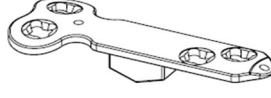
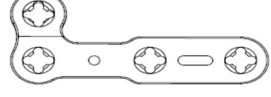
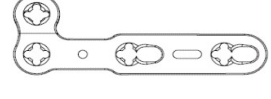
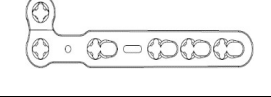
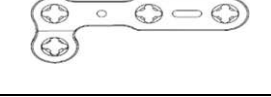
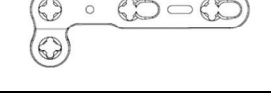
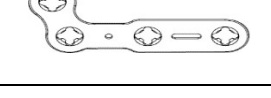
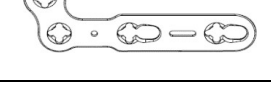
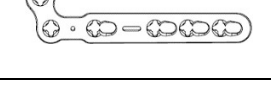
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.4099.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	142,7 x 11 mm	
35.4114.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	166,6 x 11 mm	
35.4129.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	190,5 x 11 mm	
35.5201.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	67 x 12 mm	
35.5202.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84 x 12 mm	
35.5203.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 12 mm	
35.5204.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144 x 12 mm	
35.5205.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	174 x 12 mm	
35.5301.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	67 x 12 mm	
35.5302.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84 x 12 mm	
35.5303.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 12 mm	
35.5304.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144 x 12 mm	
35.5305.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	174 x 12 mm	

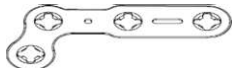
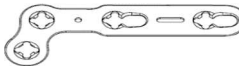
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.5301.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	67 x 12 mm	
35.5302.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	84 x 12 mm	
35.5303.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	116 x 12 mm	
35.5304.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	144 x 12 mm	
35.5305.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	174 x 12 mm	
45.5201.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	69 x 14 mm	
45.5202.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	86 x 14 mm	
45.5203.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	118 x 14 mm	
45.5204.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 14 mm	
45.5205.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	176 x 14 mm	
35.5401.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	71 x 12 mm	
35.5402.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88 x 12 mm	
35.5403.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120 x 12 mm	

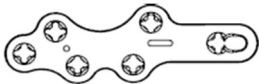
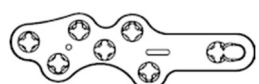
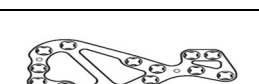
		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
35.5404.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	148 x 12 mm	
35.5405.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	178 x 12 mm	
35.5401.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	71 x 12 mm	
35.5402.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	88 x 12 mm	
35.5403.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	120 x 12 mm	
35.5404.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	148 x 12 mm	
35.5405.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	178 x 12 mm	
35.5601.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	73 x 12 mm	
35.5602.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	86 x 12 mm	
35.5603.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	99 x 12 mm	
35.5604.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	112 x 12 mm	
35.5605.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	125 x 12 mm	
45.5601.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através	TITÂNIO ASTM F67	89,2 x 15 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
45.5602.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	124,4 x 15 mm	
45.5603.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	159,6 x 15 mm	
45.5604.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	194,8 x 15 mm	
45.5605.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	230 x 15 mm	
45.5301.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	69 x 14 mm	
45.5302.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	86 x 14 mm	
45.5303.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	118 x 14 mm	
45.5304.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 14 mm	
45.5305.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	176 x 14 mm	
45.5301.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	69 x 14 mm	
45.5302.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	86 x 14 mm	
45.5303.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	118 x 14 mm	
45.5304.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	146 x 14 mm	

		da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.			
45.5305.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "SG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	176 x 14 mm	
Placas para Região dos Pés FV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
28.4401.003	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO TARSO E METATARSO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	39 x 8,2 mm	
28.4402.003	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO TARSO E METATARSO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	48 x 8,2 mm	
28.4501.003	PLACA DE FUSÃO TARSO METATARSO FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	43,4 x 8 mm	
28.4601.003	PLACA DE FUSÃO TREVO FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38 x 8 mm	
28.4602.003	PLACA DE FUSÃO TREVO FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	45 x 8 mm	
28.4603.003	PLACA DE FUSÃO TREVO FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	64 x 8 mm	
28.4701.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "P"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35 x 8 mm	
28.4702.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "M"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 8 mm	
28.4703.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "G"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	61 x 8 mm	
28.4704.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "EG"	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	91 x 8 mm	
28.4801.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	36 x 8 x 0 mm	

28.4802.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 2MM	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	36 x 8 x 2 mm	
28.4803.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 4MM	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	36 x 8 x 4 mm	
28.4804.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 6MM	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	36 x 8 x 6 mm	
28.4805.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 8MM	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	36 x 8 x 8 mm	
28.4901.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	37 x 8 mm	
28.4902.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 8 mm	
28.4903.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62 x 8 mm	
28.4901.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	37 x 8 mm	
28.4902.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 8 mm	
28.4903.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62 x 8 mm	
28.5001.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA OBLÍQUA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	37 x 8 mm	
28.5002.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA OBLÍQUA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44 x 8 mm	
28.5003.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA OBLÍQUA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62 x 8 mm	

28.5001.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA OBLÍQUA FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	37 x 8 mm	
28.5002.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA OBLÍQUA FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44 x 8 mm	
28.5003.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA OBLÍQUA FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	62 x 8 mm	
28.5101.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 0° FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 15,1 mm x 0°	
28.5102.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 5° FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 15,1 mm x 5°	
28.5103.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 10° FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 15,1 mm x 10°	
28.5101.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 0° FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 15,1 mm x 0°	
28.5102.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 5° FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 15,1 mm x 5°	
28.5103.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 10° FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	42 x 15,1 mm x 10°	
28.5201.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 0° FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	52 x 8,2 mm x 0°	
28.5202.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 5° FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	52 x 8,2 mm x 5°	
28.5203.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 10° FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	52 x 8,2 mm x 10°	
28.5201.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 0° FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	52 x 8,2 mm x 0°	

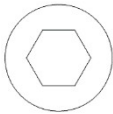
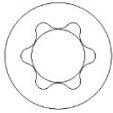
28.5202.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 5° FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	52 x 8,2 mm x 5°	
28.5203.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 10° FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	52 x 8,2 mm x 10°	
28.5301.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 5° FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	57 x 8,2 mm x 5°	
28.5301.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 5° FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	57 x 8,2 mm x 5°	
28.5401.001	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE REVISÃO DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	53 x 8,2 mm	
28.5401.002	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE REVISÃO ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	53 x 8,2 mm	
28.3601.001	PLACA CALCÂNEA DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	57,5 x 16,6 mm	
28.3601.002	PLACA CALCÂNEA ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	57,5 x 16,6 mm	
28.3701.001	PLACA CALCÂNEA DIREITA FV COM SUPORTE	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	57,5 x 16,6 mm	
28.3701.002	PLACA CALCÂNEA ESQUERDA FV COM SUPORTE	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	57,5 x 16,6 mm	
28.3801.001	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL DIREITA FV COM SUPORTE CURTA	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38 x 6 mm	
28.3801.002	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV COM SUPORTE CURTA	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	38 x 6 mm	
28.3901.001	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL DIREITA FV COM SUPORTE LONGA	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 6 mm	

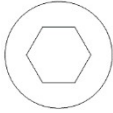
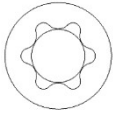
28.3901.002	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV COM SUPORTE LONGA	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	58,9 x 6 mm	
Placas Mediopé FV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES	IMAGEM
28.4001.001	PLACA CUBOIDE DIREITA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	23 x 14,3 mm	
28.4001.002	PLACA CUBOIDE ESQUERDA FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	23 x 14,3 mm	
28.4101.003	PLACA DE FUSÃO FV 27mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	27 x 12,3 mm	
28.4201.003	PLACA DE FUSÃO FV 40mm	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	40 x 7 mm	
28.4301.003	PLACA FUSÃO X FV – “P”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	32 x 22,9 mm	
28.4302.003	PLACA FUSÃO X FV – “M”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	35 x 22,9 mm	
28.4303.003	PLACA FUSÃO X FV – “G”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	40 x 22,9 mm	
28.4304.003	PLACA FUSÃO X FV – “EG”	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	44 x 22,9 mm	
28.4305.003	PLACA NAVICULAR FV	Promover a correção, restauração, estabilização, alinhamento ósseo através da osteossíntese para diversos tipos de fraturas.	TITÂNIO ASTM F67	30 x 12,2 mm	

Tabela 4 - Apresentação dos componentes do Sistema de Fixação Rígida de Placas Especiais para Grandes e Pequenos Fragmentos (Parafusos).

PARAFUSOS FIXAÇÃO RÍGIDA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
1.36.28.03.14.010	Parafuso Ø 2.8 x 10.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.012	Parafuso Ø 2.8 x 12.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.014	Parafuso Ø 2.8 x 14.0 mm Fixação Rígida Estrela	

1.36.28.03.14.016	Parafuso Ø 2.8 x 16.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.018	Parafuso Ø 2.8 x 18.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.020	Parafuso Ø 2.8 x 20.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.022	Parafuso Ø 2.8 x 22.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.024	Parafuso Ø 2.8 x 24.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.026	Parafuso Ø 2.8 x 26.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.028	Parafuso Ø 2.8 x 28.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.030	Parafuso Ø 2.8 x 30.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.032	Parafuso Ø 2.8 x 32.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.034	Parafuso Ø 2.8 x 34.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.036	Parafuso Ø 2.8 x 36.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.038	Parafuso Ø 2.8 x 38.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.040	Parafuso Ø 2.8 x 40.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.045	Parafuso Ø 2.8 x 45.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.14.050	Parafuso Ø 2.8 x 50.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.042	Parafuso Ø 2.8 x 42.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.044	Parafuso Ø 2.8 x 44.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.046	Parafuso Ø 2.8 x 46.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.048	Parafuso Ø 2.8 x 48.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.052	Parafuso Ø 2.8 x 52.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.054	Parafuso Ø 2.8 x 54.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.056	Parafuso Ø 2.8 x 56.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.058	Parafuso Ø 2.8 x 58.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.060	Parafuso Ø 2.8 x 60.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.062	Parafuso Ø 2.8 x 62.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.064	Parafuso Ø 2.8 x 64.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.066	Parafuso Ø 2.8 x 66.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.068	Parafuso Ø 2.8 x 68.0 mm Fixação Rígida Estrela	
28.0314.070	Parafuso Ø 2.8 x 70.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.28.03.15.010	Parafuso Ø 2.8 x 10.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.012	Parafuso Ø 2.8 x 12.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.014	Parafuso Ø 2.8 x 14.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.016	Parafuso Ø 2.8 x 16.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.018	Parafuso Ø 2.8 x 18.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.020	Parafuso Ø 2.8 x 20.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.022	Parafuso Ø 2.8 x 22.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.024	Parafuso Ø 2.8 x 24.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	

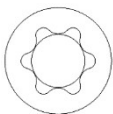
1.36.28.03.15.026	Parafuso Ø 2.8 x 26.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	 
1.36.28.03.15.028	Parafuso Ø 2.8 x 28.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.030	Parafuso Ø 2.8 x 30.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.032	Parafuso Ø 2.8 x 32.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.034	Parafuso Ø 2.8 x 34.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.036	Parafuso Ø 2.8 x 36.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.038	Parafuso Ø 2.8 x 38.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.040	Parafuso Ø 2.8 x 40.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.045	Parafuso Ø 2.8 x 45.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.28.03.15.050	Parafuso Ø 2.8 x 50.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
28.0315.042	Parafuso Ø 2.8 x 42.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.044	Parafuso Ø 2.8 x 44.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.046	Parafuso Ø 2.8 x 46.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.048	Parafuso Ø 2.8 x 48.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.052	Parafuso Ø 2.8 x 52.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.054	Parafuso Ø 2.8 x 54.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.056	Parafuso Ø 2.8 x 56.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.058	Parafuso Ø 2.8 x 58.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.060	Parafuso Ø 2.8 x 60.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.062	Parafuso Ø 2.8 x 62.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.064	Parafuso Ø 2.8 x 64.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.066	Parafuso Ø 2.8 x 66.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.068	Parafuso Ø 2.8 x 68.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
28.0315.070	Parafuso Ø 2.8 x 70.0 mm Fixação Rígida Sextavado	
1.36.32.03.14.010	Parafuso Ø 3.2 x 10.0 mm Fixação Rígida Estrela	 
1.36.32.03.14.012	Parafuso Ø 3.2 x 12.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.014	Parafuso Ø 3.2 x 14.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.016	Parafuso Ø 3.2 x 16.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.018	Parafuso Ø 3.2 x 18.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.020	Parafuso Ø 3.2 x 20.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.022	Parafuso Ø 3.2 x 22.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.024	Parafuso Ø 3.2 x 24.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.026	Parafuso Ø 3.2 x 26.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.028	Parafuso Ø 3.2 x 28.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.030	Parafuso Ø 3.2 x 30.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.032	Parafuso Ø 3.2 x 32.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.034	Parafuso Ø 3.2 x 34.0 mm Fixação Rígida Estrela	

1.36.32.03.14.036	Parafuso Ø 3.2 x 36.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.038	Parafuso Ø 3.2 x 38.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.040	Parafuso Ø 3.2 x 40.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.045	Parafuso Ø 3.2 x 45.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.14.050	Parafuso Ø 3.2 x 50.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.32.03.15.010	Parafuso Ø 3.2 x 10.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	 
1.36.32.03.15.012	Parafuso Ø 3.2 x 12.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.014	Parafuso Ø 3.2 x 14.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.016	Parafuso Ø 3.2 x 16.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.018	Parafuso Ø 3.2 x 18.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.020	Parafuso Ø 3.2 x 20.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.022	Parafuso Ø 3.2 x 22.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.024	Parafuso Ø 3.2 x 24.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.026	Parafuso Ø 3.2 x 26.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.028	Parafuso Ø 3.2 x 28.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.030	Parafuso Ø 3.2 x 30.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.032	Parafuso Ø 3.2 x 32.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.034	Parafuso Ø 3.2 x 34.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.036	Parafuso Ø 3.2 x 36.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.038	Parafuso Ø 3.2 x 38.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.040	Parafuso Ø 3.2 x 40.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.045	Parafuso Ø 3.2 x 45.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.32.03.15.050	Parafuso Ø 3.2 x 50.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.14.010	Parafuso Ø 3.5 x 10.0 mm Fixação Rígida Estrela	 
1.36.35.03.14.012	Parafuso Ø 3.5 x 12.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.014	Parafuso Ø 3.5 x 14.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.016	Parafuso Ø 3.5 x 16.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.018	Parafuso Ø 3.5 x 18.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.020	Parafuso Ø 3.5 x 20.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.022	Parafuso Ø 3.5 x 22.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.024	Parafuso Ø 3.5 x 24.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.026	Parafuso Ø 3.5 x 26.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.028	Parafuso Ø 3.5 x 28.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.030	Parafuso Ø 3.5 x 30.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.032	Parafuso Ø 3.5 x 32.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.034	Parafuso Ø 3.5 x 34.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.036	Parafuso Ø 3.5 x 36.0 mm Fixação Rígida Estrela	

1.36.35.03.14.038	Parafuso Ø 3.5 x 38.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.040	Parafuso Ø 3.5 x 40.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.042	Parafuso Ø 3.5 x 42.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.044	Parafuso Ø 3.5 x 44.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.046	Parafuso Ø 3.5 x 46.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.048	Parafuso Ø 3.5 x 48.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.050	Parafuso Ø 3.5 x 50.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.052	Parafuso Ø 3.5 x 52.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.054	Parafuso Ø 3.5 x 54.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.056	Parafuso Ø 3.5 x 56.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.058	Parafuso Ø 3.5 x 58.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.35.03.14.060	Parafuso Ø 3.5 x 60.0 mm Fixação Rígida Estrela	
35.0314.062	Parafuso Ø 3.5 x 62 mm FR Estrela	
35.0314.064	Parafuso Ø 3.5 x 64 mm FR Estrela	
35.0314.066	Parafuso Ø 3.5 x 66 mm FR Estrela	
35.0314.068	Parafuso Ø 3.5 x 68 mm FR Estrela	
35.0314.070	Parafuso Ø 3.5 x 70 mm FR Estrela	
35.0314.075	Parafuso Ø 3.5 x 75 mm FR Estrela	
35.0314.080	Parafuso Ø 3.5 x 80 mm FR Estrela	
35.0314.085	Parafuso Ø 3.5 x 85 mm FR Estrela	
35.0314.090	Parafuso Ø 3.5 x 90 mm FR Estrela	
35.0314.095	Parafuso Ø 3.5 x 95 mm FR Estrela	
1.36.35.03.15.010	Parafuso Ø 3.5 x 10.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.012	Parafuso Ø 3.5 x 12.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.014	Parafuso Ø 3.5 x 14.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.016	Parafuso Ø 3.5 x 16.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.018	Parafuso Ø 3.5 x 18.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.020	Parafuso Ø 3.5 x 20.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.022	Parafuso Ø 3.5 x 22.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.024	Parafuso Ø 3.5 x 24.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.026	Parafuso Ø 3.5 x 26.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.028	Parafuso Ø 3.5 x 28.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.030	Parafuso Ø 3.5 x 30.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.032	Parafuso Ø 3.5 x 32.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.034	Parafuso Ø 3.5 x 34.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.036	Parafuso Ø 3.5 x 36.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.038	Parafuso Ø 3.5 x 38.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	

1.36.35.03.15.040	Parafuso Ø 3.5 x 40.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.042	Parafuso Ø 3.5 x 42.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.044	Parafuso Ø 3.5 x 44.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.046	Parafuso Ø 3.5 x 46.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.048	Parafuso Ø 3.5 x 48.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.050	Parafuso Ø 3.5 x 50.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.052	Parafuso Ø 3.5 x 52.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.054	Parafuso Ø 3.5 x 54.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.056	Parafuso Ø 3.5 x 56.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.058	Parafuso Ø 3.5 x 58.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.35.03.15.060	Parafuso Ø 3.5 x 60.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
35.0315.062	Parafuso Ø 3.5 x 62 mm FR com Sextavado	
35.0315.064	Parafuso Ø 3.5 x 64 mm FR com Sextavado	
35.0315.066	Parafuso Ø 3.5 x 66 mm FR com Sextavado	
35.0315.068	Parafuso Ø 3.5 x 68 mm FR com Sextavado	
35.0315.070	Parafuso Ø 3.5 x 70 mm FR com Sextavado	
35.0315.075	Parafuso Ø 3.5 x 75 mm FR com Sextavado	
35.0315.080	Parafuso Ø 3.5 x 80 mm FR com Sextavado	
35.0315.085	Parafuso Ø 3.5 x 85 mm FR com Sextavado	
35.0315.090	Parafuso Ø 3.5 x 90 mm FR com Sextavado	
35.0315.095	Parafuso Ø 3.5 x 95 mm FR com Sextavado	
1.36.40.03.14.010	Parafuso Ø 4.0 x 10.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.012	Parafuso Ø 4.0 x 12.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.014	Parafuso Ø 4.0 x 14.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.016	Parafuso Ø 4.0 x 16.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.018	Parafuso Ø 4.0 x 18.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.020	Parafuso Ø 4.0 x 20.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.022	Parafuso Ø 4.0 x 22.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.024	Parafuso Ø 4.0 x 24.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.026	Parafuso Ø 4.0 x 26.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.028	Parafuso Ø 4.0 x 28.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.030	Parafuso Ø 4.0 x 30.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.032	Parafuso Ø 4.0 x 32.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.034	Parafuso Ø 4.0 x 34.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.036	Parafuso Ø 4.0 x 36.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.038	Parafuso Ø 4.0 x 38.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.040	Parafuso Ø 4.0 x 40.0 mm Fixação Rígida Estrela	

1.36.40.03.14.042	Parafuso Ø 4.0 x 42.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.044	Parafuso Ø 4.0 x 44.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.046	Parafuso Ø 4.0 x 46.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.048	Parafuso Ø 4.0 x 48.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.050	Parafuso Ø 4.0 x 50.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.052	Parafuso Ø 4.0 x 52.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.054	Parafuso Ø 4.0 x 54.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.056	Parafuso Ø 4.0 x 56.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.058	Parafuso Ø 4.0 x 58.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.40.03.14.060	Parafuso Ø 4.0 x 60.0 mm Fixação Rígida Estrela	
40.0314.062	Parafuso Ø 4.0 x 62 mm FR Estrela	
40.0314.064	Parafuso Ø 4.0 x 64 mm FR Estrela	
40.0314.066	Parafuso Ø 4.0 x 66 mm FR Estrela	
40.0314.068	Parafuso Ø 4.0 x 68 mm FR Estrela	
40.0314.070	Parafuso Ø 4.0 x 70 mm FR Estrela	
40.0314.075	Parafuso Ø 4.0 x 75 mm FR Estrela	
40.0314.080	Parafuso Ø 4.0 x 80 mm FR Estrela	
40.0314.085	Parafuso Ø 4.0 x 85 mm FR Estrela	
40.0314.090	Parafuso Ø 4.0 x 90 mm FR Estrela	
40.0314.095	Parafuso Ø 4.0 x 95 mm FR Estrela	
1.36.40.03.15.010	Parafuso Ø 4.0 x 10.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.012	Parafuso Ø 4.0 x 12.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.014	Parafuso Ø 4.0 x 14.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.016	Parafuso Ø 4.0 x 16.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.018	Parafuso Ø 4.0 x 18.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.020	Parafuso Ø 4.0 x 20.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.022	Parafuso Ø 4.0 x 22.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.024	Parafuso Ø 4.0 x 24.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.026	Parafuso Ø 4.0 x 26.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.028	Parafuso Ø 4.0 x 28.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.030	Parafuso Ø 4.0 x 30.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.032	Parafuso Ø 4.0 x 32.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.034	Parafuso Ø 4.0 x 34.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.036	Parafuso Ø 4.0 x 36.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.038	Parafuso Ø 4.0 x 38.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.040	Parafuso Ø 4.0 x 40.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.042	Parafuso Ø 4.0 x 42.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	

1.36.40.03.15.044	Parafuso Ø 4.0 x 44.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.046	Parafuso Ø 4.0 x 46.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.048	Parafuso Ø 4.0 x 48.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.050	Parafuso Ø 4.0 x 50.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.052	Parafuso Ø 4.0 x 52.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.054	Parafuso Ø 4.0 x 54.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.056	Parafuso Ø 4.0 x 56.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.058	Parafuso Ø 4.0 x 58.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.40.03.15.060	Parafuso Ø 4.0 x 60.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
40.0315.062	Parafuso Ø 4.0 x 62 mm FR com Sextavado	
40.0315.064	Parafuso Ø 4.0 x 64 mm FR com Sextavado	
40.0315.066	Parafuso Ø 4.0 x 66 mm FR com Sextavado	
40.0315.068	Parafuso Ø 4.0 x 68 mm FR com Sextavado	
40.0315.070	Parafuso Ø 4.0 x 70 mm FR com Sextavado	
40.0315.075	Parafuso Ø 4.0 x 75 mm FR com Sextavado	
40.0315.080	Parafuso Ø 4.0 x 80 mm FR com Sextavado	
40.0315.085	Parafuso Ø 4.0 x 85 mm FR com Sextavado	
40.0315.090	Parafuso Ø 4.0 x 90 mm FR com Sextavado	
40.0315.095	Parafuso Ø 4.0 x 95 mm FR com Sextavado	
1.36.45.03.14.012	Parafuso Ø 4.5 x 12.0 mm Fixação Rígida Estrela	 
1.36.45.03.14.014	Parafuso Ø 4.5 x 14.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.016	Parafuso Ø 4.5 x 16.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.018	Parafuso Ø 4.5 x 18.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.020	Parafuso Ø 4.5 x 20.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.022	Parafuso Ø 4.5 x 22.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.024	Parafuso Ø 4.5 x 24.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.026	Parafuso Ø 4.5 x 26.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.028	Parafuso Ø 4.5 x 28.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.030	Parafuso Ø 4.5 x 30.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.032	Parafuso Ø 4.5 x 32.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.034	Parafuso Ø 4.5 x 34.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.036	Parafuso Ø 4.5 x 36.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.038	Parafuso Ø 4.5 x 38.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.040	Parafuso Ø 4.5 x 40.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.042	Parafuso Ø 4.5 x 42.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.044	Parafuso Ø 4.5 x 44.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.046	Parafuso Ø 4.5 x 46.0 mm Fixação Rígida Estrela	

1.36.45.03.14.048	Parafuso Ø 4.5 x 48.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.050	Parafuso Ø 4.5 x 50.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.052	Parafuso Ø 4.5 x 52.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.054	Parafuso Ø 4.5 x 54.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.056	Parafuso Ø 4.5 x 56.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.058	Parafuso Ø 4.5 x 58.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.060	Parafuso Ø 4.5 x 60.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.062	Parafuso Ø 4.5 x 62.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.064	Parafuso Ø 4.5 x 64.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.066	Parafuso Ø 4.5 x 66.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.068	Parafuso Ø 4.5 x 68.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.45.03.14.070	Parafuso Ø 4.5 x 70.0 mm Fixação Rígida Estrela	
45.0314.072	Parafuso Ø 4.5 x 72 mm FR Estrela	
45.0314.074	Parafuso Ø 4.5 x 74 mm FR Estrela	
45.0314.076	Parafuso Ø 4.5 x 76 mm FR Estrela	
45.0314.078	Parafuso Ø 4.5 x 78 mm FR Estrela	
45.0314.080	Parafuso Ø 4.5 x 80 mm FR Estrela	
45.0314.082	Parafuso Ø 4.5 x 82 mm FR Estrela	
45.0314.084	Parafuso Ø 4.5 x 84 mm FR Estrela	
45.0314.086	Parafuso Ø 4.5 x 86 mm FR Estrela	
45.0314.088	Parafuso Ø 4.5 x 88 mm FR Estrela	
45.0314.090	Parafuso Ø 4.5 x 90 mm FR Estrela	
1.36.45.03.15.012	Parafuso Ø 4.0 x 12.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.014	Parafuso Ø 4.0 x 14.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.016	Parafuso Ø 4.0 x 16.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.018	Parafuso Ø 4.0 x 18.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.020	Parafuso Ø 4.0 x 20.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.022	Parafuso Ø 4.0 x 22.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.024	Parafuso Ø 4.0 x 24.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.026	Parafuso Ø 4.0 x 26.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.028	Parafuso Ø 4.0 x 28.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.030	Parafuso Ø 4.0 x 30.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.032	Parafuso Ø 4.0 x 32.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.034	Parafuso Ø 4.0 x 34.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.036	Parafuso Ø 4.0 x 36.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.038	Parafuso Ø 4.0 x 38.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.040	Parafuso Ø 4.0 x 40.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	

1.36.45.03.15.042	Parafuso Ø 4.0 x 42.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.044	Parafuso Ø 4.0 x 44.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.046	Parafuso Ø 4.0 x 46.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.048	Parafuso Ø 4.0 x 48.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.050	Parafuso Ø 4.0 x 50.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.052	Parafuso Ø 4.0 x 52.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.054	Parafuso Ø 4.0 x 54.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.056	Parafuso Ø 4.0 x 56.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.058	Parafuso Ø 4.0 x 58.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.060	Parafuso Ø 4.0 x 60.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.062	Parafuso Ø 4.0 x 62.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.064	Parafuso Ø 4.0 x 64.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.066	Parafuso Ø 4.0 x 66.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.068	Parafuso Ø 4.0 x 68.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.45.03.15.070	Parafuso Ø 4.0 x 70.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
45.0315.012	Parafuso Ø 4.5 x 12.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.014	Parafuso Ø 4.5 x 14.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.016	Parafuso Ø 4.5 x 16.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.018	Parafuso Ø 4.5 x 18.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.020	Parafuso Ø 4.5 x 20.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.022	Parafuso Ø 4.5 x 22.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.024	Parafuso Ø 4.5 x 24.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.026	Parafuso Ø 4.5 x 26.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.028	Parafuso Ø 4.5 x 28.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.030	Parafuso Ø 4.5 x 30.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.032	Parafuso Ø 4.5 x 32.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.034	Parafuso Ø 4.5 x 34.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.036	Parafuso Ø 4.5 x 36.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.038	Parafuso Ø 4.5 x 38.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.040	Parafuso Ø 4.5 x 40.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.042	Parafuso Ø 4.5 x 42.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.044	Parafuso Ø 4.5 x 44.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.046	Parafuso Ø 4.5 x 46.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.048	Parafuso Ø 4.5 x 48.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.050	Parafuso Ø 4.5 x 50.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.052	Parafuso Ø 4.5 x 52.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.054	Parafuso Ø 4.5 x 54.0 mm FR com Sextavado	

45.0315.056	Parafuso Ø 4.5 x 56.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.058	Parafuso Ø 4.5 x 58.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.060	Parafuso Ø 4.5 x 60.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.062	Parafuso Ø 4.5 x 62.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.064	Parafuso Ø 4.5 x 64.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.066	Parafuso Ø 4.5 x 66.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.068	Parafuso Ø 4.5 x 68.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.070	Parafuso Ø 4.5 x 70.0 mm FR com Sextavado	
45.0315.072	Parafuso Ø 4.5 x 72 mm FR com Sextavado	
45.0315.074	Parafuso Ø 4.5 x 74 mm FR com Sextavado	
45.0315.076	Parafuso Ø 4.5 x 76 mm FR com Sextavado	
45.0315.078	Parafuso Ø 4.5 x 78 mm FR com Sextavado	
45.0315.080	Parafuso Ø 4.5 x 80 mm FR com Sextavado	
45.0315.082	Parafuso Ø 4.5 x 82 mm FR com Sextavado	
45.0315.084	Parafuso Ø 4.5 x 84 mm FR com Sextavado	
45.0315.086	Parafuso Ø 4.5 x 86 mm FR com Sextavado	
45.0315.088	Parafuso Ø 4.5 x 88 mm FR com Sextavado	
45.0315.090	Parafuso Ø 4.5 x 90 mm FR com Sextavado	
1.36.50.03.14.012	Parafuso Ø 5.0 x 12.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.014	Parafuso Ø 5.0 x 14.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.016	Parafuso Ø 5.0 x 16.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.018	Parafuso Ø 5.0 x 18.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.020	Parafuso Ø 5.0 x 20.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.022	Parafuso Ø 5.0 x 22.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.024	Parafuso Ø 5.0 x 24.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.026	Parafuso Ø 5.0 x 26.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.028	Parafuso Ø 5.0 x 28.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.030	Parafuso Ø 5.0 x 30.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.032	Parafuso Ø 5.0 x 32.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.034	Parafuso Ø 5.0 x 34.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.036	Parafuso Ø 5.0 x 36.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.038	Parafuso Ø 5.0 x 38.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.040	Parafuso Ø 5.0 x 40.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.042	Parafuso Ø 5.0 x 42.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.044	Parafuso Ø 5.0 x 44.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.046	Parafuso Ø 5.0 x 46.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.048	Parafuso Ø 5.0 x 48.0 mm Fixação Rígida Estrela	

1.36.50.03.14.050	Parafuso Ø 5.0 x 50.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.052	Parafuso Ø 5.0 x 52.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.054	Parafuso Ø 5.0 x 54.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.056	Parafuso Ø 5.0 x 56.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.058	Parafuso Ø 5.0 x 58.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.060	Parafuso Ø 5.0 x 60.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.062	Parafuso Ø 5.0 x 62.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.064	Parafuso Ø 5.0 x 64.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.066	Parafuso Ø 5.0 x 66.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.068	Parafuso Ø 5.0 x 68.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.070	Parafuso Ø 5.0 x 70.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.075	Parafuso Ø 5.0 x 75.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.080	Parafuso Ø 5.0 x 80.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.085	Parafuso Ø 5.0 x 85.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.090	Parafuso Ø 5.0 x 90.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.095	Parafuso Ø 5.0 x 95.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.100	Parafuso Ø 5.0 x 100.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.105	Parafuso Ø 5.0 x 105.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.14.110	Parafuso Ø 5.0 x 110.0 mm Fixação Rígida Estrela	
1.36.50.03.15.012	Parafuso Ø 5.0 x 12.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.014	Parafuso Ø 5.0 x 14.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.016	Parafuso Ø 5.0 x 16.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.018	Parafuso Ø 5.0 x 18.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.020	Parafuso Ø 5.0 x 20.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.022	Parafuso Ø 5.0 x 22.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.024	Parafuso Ø 5.0 x 24.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.026	Parafuso Ø 5.0 x 26.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.028	Parafuso Ø 5.0 x 28.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.030	Parafuso Ø 5.0 x 30.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.032	Parafuso Ø 5.0 x 32.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.034	Parafuso Ø 5.0 x 34.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.036	Parafuso Ø 5.0 x 36.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.038	Parafuso Ø 5.0 x 38.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.040	Parafuso Ø 5.0 x 40.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.042	Parafuso Ø 5.0 x 42.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.044	Parafuso Ø 5.0 x 44.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.046	Parafuso Ø 5.0 x 46.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	

1.36.50.03.15.048	Parafuso Ø 5.0 x 48.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.050	Parafuso Ø 5.0 x 50.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.052	Parafuso Ø 5.0 x 52.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.054	Parafuso Ø 5.0 x 54.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.056	Parafuso Ø 5.0 x 56.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.058	Parafuso Ø 5.0 x 58.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.060	Parafuso Ø 5.0 x 60.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.062	Parafuso Ø 5.0 x 62.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.064	Parafuso Ø 5.0 x 64.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.066	Parafuso Ø 5.0 x 66.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.068	Parafuso Ø 5.0 x 68.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.070	Parafuso Ø 5.0 x 70.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.075	Parafuso Ø 5.0 x 75.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.080	Parafuso Ø 5.0 x 80.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.085	Parafuso Ø 5.0 x 85.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.090	Parafuso Ø 5.0 x 90.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.095	Parafuso Ø 5.0 x 95.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.100	Parafuso Ø 5.0 x 100.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.105	Parafuso Ø 5.0 x 105.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
1.36.50.03.15.110	Parafuso Ø 5.0 x 110.0 mm Fixação Rígida com Sextavado	
Parafusos FV (Fix Vari) Ø 2,8 mm		
Código	Descrição	IMAGEM
28.0317.010	Parafuso Ø2,8 x 10mm Sextavado FV	
28.0317.012	Parafuso Ø2,8 x 12mm Sextavado FV	
28.0317.014	Parafuso Ø2,8 x 14mm Sextavado FV	
28.0317.016	Parafuso Ø2,8 x 16mm Sextavado FV	
28.0317.018	Parafuso Ø2,8 x 18mm Sextavado FV	
28.0317.020	Parafuso Ø2,8 x 20mm Sextavado FV	
28.0317.022	Parafuso Ø2,8 x 22mm Sextavado FV	
28.0317.024	Parafuso Ø2,8 x 24mm Sextavado FV	
28.0317.026	Parafuso Ø2,8 x 26mm Sextavado FV	
28.0317.028	Parafuso Ø2,8 x 28mm Sextavado FV	
28.0317.030	Parafuso Ø2,8 x 30mm Sextavado FV	
28.0317.032	Parafuso Ø2,8 x 32mm Sextavado FV	
28.0317.034	Parafuso Ø2,8 x 34mm Sextavado FV	
28.0317.036	Parafuso Ø2,8 x 36mm Sextavado FV	
28.0317.038	Parafuso Ø2,8 x 38mm Sextavado FV	

28.0317.040	Parafuso Ø2,8 x 40mm Sextavado FV	
28.0317.042	Parafuso Ø2,8 x 42mm Sextavado FV	
28.0317.044	Parafuso Ø2,8 x 44mm Sextavado FV	
28.0317.046	Parafuso Ø2,8 x 46mm Sextavado FV	
28.0317.048	Parafuso Ø2,8 x 48mm Sextavado FV	
28.0317.050	Parafuso Ø2,8 x 50mm Sextavado FV	
28.0317.052	Parafuso Ø2,8 x 52mm Sextavado FV	
28.0317.054	Parafuso Ø2,8 x 54mm Sextavado FV	
28.0317.056	Parafuso Ø2,8 x 56mm Sextavado FV	
28.0317.058	Parafuso Ø2,8 x 58mm Sextavado FV	
28.0317.060	Parafuso Ø2,8 x 60mm Sextavado FV	
28.0317.062	Parafuso Ø2,8 x 62mm Sextavado FV	
28.0317.064	Parafuso Ø2,8 x 64mm Sextavado FV	
28.0317.066	Parafuso Ø2,8 x 66mm Sextavado FV	
28.0317.068	Parafuso Ø2,8 x 68mm Sextavado FV	
28.0317.070	Parafuso Ø2,8 x 70mm Sextavado FV	
28.0316.010	PARAFUSO Ø2,8 x 10mm Estrela FV	
28.0316.012	PARAFUSO Ø2,8 x 12mm Estrela FV	
28.0316.014	PARAFUSO Ø2,8 x 14mm Estrela FV	
28.0316.016	PARAFUSO Ø2,8 x 16mm Estrela FV	
28.0316.018	PARAFUSO Ø2,8 x 18mm Estrela FV	
28.0316.020	PARAFUSO Ø2,8 x 20mm Estrela FV	
28.0316.022	PARAFUSO Ø2,8 x 22mm Estrela FV	
28.0316.024	PARAFUSO Ø2,8 x 24mm Estrela FV	
28.0316.026	PARAFUSO Ø2,8 x 26mm Estrela FV	
28.0316.028	PARAFUSO Ø2,8 x 28mm Estrela FV	
28.0316.030	PARAFUSO Ø2,8 x 30mm Estrela FV	
28.0316.032	PARAFUSO Ø2,8 x 32mm Estrela FV	
28.0316.034	PARAFUSO Ø2,8 x 34mm Estrela FV	
28.0316.036	PARAFUSO Ø2,8 x 36mm Estrela FV	
28.0316.038	PARAFUSO Ø2,8 x 38mm Estrela FV	
28.0316.040	PARAFUSO Ø2,8 x 40mm Estrela FV	
28.0316.042	PARAFUSO Ø2,8 x 42mm Estrela FV	
28.0316.044	PARAFUSO Ø2,8 x 44mm Estrela FV	
28.0316.046	PARAFUSO Ø2,8 x 46mm Estrela FV	
28.0316.048	PARAFUSO Ø2,8 x 48mm Estrela FV	
28.0316.050	PARAFUSO Ø2,8 x 50mm Estrela FV	

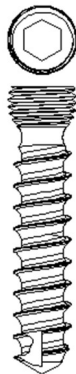
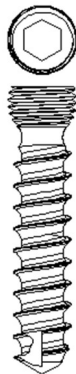
28.0316.052	PARAFUSO Ø2,8 x 52mm Estrela FV	
28.0316.054	PARAFUSO Ø2,8 x 54mm Estrela FV	
28.0316.056	PARAFUSO Ø2,8 x 56mm Estrela FV	
28.0316.058	PARAFUSO Ø2,8 x 58mm Estrela FV	
28.0316.060	PARAFUSO Ø2,8 x 60mm Estrela FV	
28.0316.062	PARAFUSO Ø2,8 x 62mm Estrela FV	
28.0316.064	PARAFUSO Ø2,8 x 64mm Estrela FV	
28.0316.066	PARAFUSO Ø2,8 x 66mm Estrela FV	
28.0316.068	PARAFUSO Ø2,8 x 68mm Estrela FV	
28.0316.070	PARAFUSO Ø2,8 x 70mm Estrela FV	
Parafusos FV (Fix Vari) Ø 3,5 mm		
Código	Descrição	IMAGEM
35.0317.010	Parafuso Ø3,5 x 10mm Sextavado FV	
35.0317.012	Parafuso Ø3,5 x 12mm Sextavado FV	
35.0317.014	Parafuso Ø3,5 x 14mm Sextavado FV	
35.0317.016	Parafuso Ø3,5 x 16mm Sextavado FV	
35.0317.018	Parafuso Ø3,5 x 18mm Sextavado FV	
35.0317.020	Parafuso Ø3,5 x 20mm Sextavado FV	
35.0317.022	Parafuso Ø3,5 x 22mm Sextavado FV	
35.0317.024	Parafuso Ø3,5 x 24mm Sextavado FV	
35.0317.026	Parafuso Ø3,5 x 26mm Sextavado FV	
35.0317.028	Parafuso Ø3,5 x 28mm Sextavado FV	
35.0317.030	Parafuso Ø3,5 x 30mm Sextavado FV	
35.0317.032	Parafuso Ø3,5 x 32mm Sextavado FV	
35.0317.034	Parafuso Ø3,5 x 34mm Sextavado FV	
35.0317.036	Parafuso Ø3,5 x 36mm Sextavado FV	
35.0317.038	Parafuso Ø3,5 x 38mm Sextavado FV	
35.0317.040	Parafuso Ø3,5 x 40mm Sextavado FV	
35.0317.042	Parafuso Ø3,5 x 42mm Sextavado FV	
35.0317.044	Parafuso Ø3,5 x 44mm Sextavado FV	
35.0317.046	Parafuso Ø3,5 x 46mm Sextavado FV	
35.0317.048	Parafuso Ø3,5 x 48mm Sextavado FV	
35.0317.050	Parafuso Ø3,5 x 50mm Sextavado FV	
35.0317.052	Parafuso Ø3,5 x 52mm Sextavado FV	
35.0317.054	Parafuso Ø3,5 x 54mm Sextavado FV	
35.0317.056	Parafuso Ø3,5 x 56mm Sextavado FV	
35.0317.058	Parafuso Ø3,5 x 58mm Sextavado FV	

35.0317.060	Parafuso Ø3,5 x 60mm Sextavado FV	
35.0317.062	Parafuso Ø3,5 x 62mm Sextavado FV	
35.0317.064	Parafuso Ø3,5 x 64mm Sextavado FV	
35.0317.066	Parafuso Ø3,5 x 66mm Sextavado FV	
35.0317.068	Parafuso Ø3,5 x 68mm Sextavado FV	
35.0317.070	Parafuso Ø3,5 x 70mm Sextavado FV	
35.0317.075	Parafuso Ø3,5 x 75mm Sextavado FV	
35.0317.080	Parafuso Ø3,5 x 80mm Sextavado FV	
35.0317.085	Parafuso Ø3,5 x 85mm Sextavado FV	
35.0317.090	Parafuso Ø3,5 x 90mm Sextavado FV	
35.0317.095	Parafuso Ø3,5 x 95mm Sextavado FV	
35.0317.100	Parafuso Ø3,5 x 100mm Sextavado FV	
35.0317.105	Parafuso Ø3,5 x 105mm Sextavado FV	
35.0317.110	Parafuso Ø3,5 x 110mm Sextavado FV	
35.0317.115	Parafuso Ø3,5 x 115mm Sextavado FV	
35.0317.120	Parafuso Ø3,5 x 120mm Sextavado FV	
35.0317.125	Parafuso Ø3,5 x 125mm Sextavado FV	
35.0317.130	Parafuso Ø3,5 x 130mm Sextavado FV	
35.0317.135	Parafuso Ø3,5 x 135mm Sextavado FV	
35.0317.140	Parafuso Ø3,5 x 140mm Sextavado FV	
35.0317.145	Parafuso Ø3,5 x 145mm Sextavado FV	
35.0317.150	Parafuso Ø3,5 x 150mm Sextavado FV	
35.0317.155	Parafuso Ø3,5 x 155mm Sextavado FV	
35.0317.160	Parafuso Ø3,5 x 160mm Sextavado FV	
35.0316.010	PARAFUSO Ø3,5 x 10mm Estrela FV	
35.0316.012	PARAFUSO Ø3,5 x 12mm Estrela FV	
35.0316.014	PARAFUSO Ø3,5 x 14mm Estrela FV	
35.0316.016	PARAFUSO Ø3,5 x 16mm Estrela FV	
35.0316.018	PARAFUSO Ø3,5 x 18mm Estrela FV	
35.0316.020	PARAFUSO Ø3,5 x 20mm Estrela FV	
35.0316.022	PARAFUSO Ø3,5 x 22mm Estrela FV	
35.0316.024	PARAFUSO Ø3,5 x 24mm Estrela FV	
35.0316.026	PARAFUSO Ø3,5 x 26mm Estrela FV	
35.0316.028	PARAFUSO Ø3,5 x 28mm Estrela FV	
35.0316.030	PARAFUSO Ø3,5 x 30mm Estrela FV	
35.0316.032	PARAFUSO Ø3,5 x 32mm Estrela FV	
35.0316.034	PARAFUSO Ø3,5 x 34mm Estrela FV	

35.0316.036	PARAFUSO Ø3,5 x 36mm Estrela FV
35.0316.038	PARAFUSO Ø3,5 x 38mm Estrela FV
35.0316.040	PARAFUSO Ø3,5 x 40mm Estrela FV
35.0316.042	PARAFUSO Ø3,5 x 42mm Estrela FV
35.0316.044	PARAFUSO Ø3,5 x 44mm Estrela FV
35.0316.046	PARAFUSO Ø3,5 x 46mm Estrela FV
35.0316.048	PARAFUSO Ø3,5 x 48mm Estrela FV
35.0316.050	PARAFUSO Ø3,5 x 50mm Estrela FV
35.0316.052	PARAFUSO Ø3,5 x 52mm Estrela FV
35.0316.054	PARAFUSO Ø3,5 x 54mm Estrela FV
35.0316.056	PARAFUSO Ø3,5 x 56mm Estrela FV
35.0316.058	PARAFUSO Ø3,5 x 58mm Estrela FV
35.0316.060	PARAFUSO Ø3,5 x 60mm Estrela FV
35.0316.062	PARAFUSO Ø3,5 x 62mm Estrela FV
35.0316.064	PARAFUSO Ø3,5 x 64mm Estrela FV
35.0316.066	PARAFUSO Ø3,5 x 66mm Estrela FV
35.0316.068	PARAFUSO Ø3,5 x 68mm Estrela FV
35.0316.070	PARAFUSO Ø3,5 x 70mm Estrela FV
35.0316.075	PARAFUSO Ø3,5 x 75mm Estrela FV
35.0316.080	PARAFUSO Ø3,5 x 80mm Estrela FV
35.0316.085	PARAFUSO Ø3,5 x 85mm Estrela FV
35.0316.090	PARAFUSO Ø3,5 x 90mm Estrela FV
35.0316.095	PARAFUSO Ø3,5 x 95mm Estrela FV
35.0316.100	PARAFUSO Ø3,5 x 100mm Estrela FV
35.0316.105	PARAFUSO Ø3,5 x 105mm Estrela FV
35.0316.110	PARAFUSO Ø3,5 x 110mm Estrela FV
35.0316.115	PARAFUSO Ø3,5 x 115mm Estrela FV
35.0316.120	PARAFUSO Ø3,5 x 120mm Estrela FV
35.0316.125	PARAFUSO Ø3,5 x 125mm Estrela FV
35.0316.130	PARAFUSO Ø3,5 x 130mm Estrela FV
35.0316.135	PARAFUSO Ø3,5 x 135mm Estrela FV
35.0316.140	PARAFUSO Ø3,5 x 140mm Estrela FV
35.0316.145	PARAFUSO Ø3,5 x 145mm Estrela FV
35.0316.150	PARAFUSO Ø3,5 x 150mm Estrela FV
35.0316.155	PARAFUSO Ø3,5 x 155mm Estrela FV
35.0316.160	PARAFUSO Ø3,5 x 160mm Estrela FV
Parafusos FV (Fix Vari) Ø 4,0 mm	

Código	Descrição	IMAGEM
40.0317.010	Parafuso Ø4,0 x 10mm Sextavado FV	
40.0317.012	Parafuso Ø4,0 x 12mm Sextavado FV	
40.0317.014	Parafuso Ø4,0 x 14mm Sextavado FV	
40.0317.016	Parafuso Ø4,0 x 16mm Sextavado FV	
40.0317.018	Parafuso Ø4,0 x 18mm Sextavado FV	
40.0317.020	Parafuso Ø4,0 x 20mm Sextavado FV	
40.0317.022	Parafuso Ø4,0 x 22mm Sextavado FV	
40.0317.024	Parafuso Ø4,0 x 24mm Sextavado FV	
40.0317.026	Parafuso Ø4,0 x 26mm Sextavado FV	
40.0317.028	Parafuso Ø4,0 x 28mm Sextavado FV	
40.0317.030	Parafuso Ø4,0 x 30mm Sextavado FV	
40.0317.032	Parafuso Ø4,0 x 32mm Sextavado FV	
40.0317.034	Parafuso Ø4,0 x 34mm Sextavado FV	
40.0317.036	Parafuso Ø4,0 x 36mm Sextavado FV	
40.0317.038	Parafuso Ø4,0 x 38mm Sextavado FV	
40.0317.040	Parafuso Ø4,0 x 40mm Sextavado FV	
40.0317.042	Parafuso Ø4,0 x 42mm Sextavado FV	
40.0317.044	Parafuso Ø4,0 x 44mm Sextavado FV	
40.0317.046	Parafuso Ø4,0 x 46mm Sextavado FV	
40.0317.048	Parafuso Ø4,0 x 48mm Sextavado FV	
40.0317.050	Parafuso Ø4,0 x 50mm Sextavado FV	
40.0317.052	Parafuso Ø4,0 x 52mm Sextavado FV	
40.0317.054	Parafuso Ø4,0 x 54mm Sextavado FV	
40.0317.056	Parafuso Ø4,0 x 56mm Sextavado FV	
40.0317.058	Parafuso Ø4,0 x 58mm Sextavado FV	
40.0317.060	Parafuso Ø4,0 x 60mm Sextavado FV	
40.0317.062	Parafuso Ø4,0 x 62mm Sextavado FV	
40.0317.064	Parafuso Ø4,0 x 64mm Sextavado FV	
40.0317.066	Parafuso Ø4,0 x 66mm Sextavado FV	
40.0317.068	Parafuso Ø4,0 x 68mm Sextavado FV	
40.0317.070	Parafuso Ø4,0 x 70mm Sextavado FV	
40.0317.075	Parafuso Ø4,0 x 75mm Sextavado FV	
40.0317.080	Parafuso Ø4,0 x 80mm Sextavado FV	
40.0317.085	Parafuso Ø4,0 x 85mm Sextavado FV	
40.0317.090	Parafuso Ø4,0 x 90mm Sextavado FV	
40.0317.095	Parafuso Ø4,0 x 95mm Sextavado FV	

40.0317.100	Parafuso Ø4,0 x 100mm Sextavado FV	
40.0317.105	Parafuso Ø4,0 x 105mm Sextavado FV	
40.0317.110	Parafuso Ø4,0 x 110mm Sextavado FV	
40.0317.115	Parafuso Ø4,0 x 115mm Sextavado FV	
40.0317.120	Parafuso Ø4,0 x 120mm Sextavado FV	
40.0317.125	Parafuso Ø4,0 x 125mm Sextavado FV	
40.0317.130	Parafuso Ø4,0 x 130mm Sextavado FV	
40.0317.135	Parafuso Ø4,0 x 135mm Sextavado FV	
40.0317.140	Parafuso Ø4,0 x 140mm Sextavado FV	
40.0317.145	Parafuso Ø4,0 x 145mm Sextavado FV	
40.0317.150	Parafuso Ø4,0 x 150mm Sextavado FV	
40.0317.155	Parafuso Ø4,0 x 155mm Sextavado FV	
40.0317.160	Parafuso Ø4,0 x 160mm Sextavado FV	
40.0316.010	Parafuso Ø4,0 X 10mm Estrela FV	
40.0316.012	Parafuso Ø4,0 X 12MM Estrela FV	
40.0316.014	Parafuso Ø4,0 X 14MM Estrela FV	
40.0316.016	Parafuso Ø4,0 X 16MM Estrela FV	
40.0316.018	Parafuso Ø4,0 X 18MM Estrela FV	
40.0316.020	Parafuso Ø4,0 X 20MM Estrela FV	
40.0316.022	Parafuso Ø4,0 X 22MM Estrela FV	
40.0316.024	Parafuso Ø4,0 X 24MM Estrela FV	
40.0316.026	Parafuso Ø4,0 X 26MM Estrela FV	
40.0316.028	Parafuso Ø4,0 X 28MM Estrela FV	
40.0316.030	Parafuso Ø4,0 X 30MM Estrela FV	
40.0316.032	Parafuso Ø4,0 X 32MM Estrela FV	
40.0316.034	Parafuso Ø4,0 X 34MM Estrela FV	
40.0316.036	Parafuso Ø4,0 X 36MM Estrela FV	
40.0316.038	Parafuso Ø4,0 X 38MM Estrela FV	
40.0316.040	Parafuso Ø4,0 X 40MM Estrela FV	
40.0316.042	PARAFUSO Ø4,0 x 42mm Estrela FV	
40.0316.044	PARAFUSO Ø4,0 x 44mm Estrela FV	
40.0316.046	PARAFUSO Ø4,0 x 46mm Estrela FV	
40.0316.048	PARAFUSO Ø4,0 x 48mm Estrela FV	
40.0316.050	PARAFUSO Ø4,0 x 50mm Estrela FV	
40.0316.052	PARAFUSO Ø4,0 x 52mm Estrela FV	
40.0316.054	PARAFUSO Ø4,0 x 54mm Estrela FV	
40.0316.056	PARAFUSO Ø4,0 x 56mm Estrela FV	

40.0316.058	PARAFUSO Ø4,0 x 58mm Estrela FV	
40.0316.060	PARAFUSO Ø4,0 x 60mm Estrela FV	
40.0316.062	PARAFUSO Ø4,0 x 62mm Estrela FV	
40.0316.064	PARAFUSO Ø4,0 x 64mm Estrela FV	
40.0316.066	PARAFUSO Ø4,0 x 66mm Estrela FV	
40.0316.068	PARAFUSO Ø4,0 x 68mm Estrela FV	
40.0316.070	PARAFUSO Ø4,0 x 70mm Estrela FV	
40.0316.075	PARAFUSO Ø4,0 x 75mm Estrela FV	
40.0316.080	PARAFUSO Ø4,0 x 80mm Estrela FV	
40.0316.085	PARAFUSO Ø4,0 x 85mm Estrela FV	
40.0316.090	PARAFUSO Ø4,0 x 90mm Estrela FV	
40.0316.095	PARAFUSO Ø4,0 x 95mm Estrela FV	
40.0316.100	PARAFUSO Ø4,0 x 100mm Estrela FV	
40.0316.105	PARAFUSO Ø4,0 x 105mm Estrela FV	
40.0316.110	PARAFUSO Ø4,0 x 110mm Estrela FV	
40.0316.115	PARAFUSO Ø4,0 x 115mm Estrela FV	
40.0316.120	PARAFUSO Ø4,0 x 120mm Estrela FV	
40.0316.125	PARAFUSO Ø4,0 x 125mm Estrela FV	
40.0316.130	PARAFUSO Ø4,0 x 130mm Estrela FV	
40.0316.135	PARAFUSO Ø4,0 x 135mm Estrela FV	
40.0316.140	PARAFUSO Ø4,0 x 140mm Estrela FV	
40.0316.145	PARAFUSO Ø4,0 x 145mm Estrela FV	
40.0316.150	PARAFUSO Ø4,0 x 150mm Estrela FV	
40.0316.155	PARAFUSO Ø4,0 x 155mm Estrela FV	
40.0316.160	PARAFUSO Ø4,0 x 160mm Estrela FV	
Parafusos FV (Fix Vari) Ø 4,5 mm		
Codigo	Descrição	IMAGEM
45.0317.012	PARAFUSO Ø4,5 X 12MM Sextavado FV	
45.0317.014	PARAFUSO Ø4,5 X 14MM Sextavado FV	
45.0317.016	PARAFUSO Ø4,5 X 16MM Sextavado FV	
45.0317.018	PARAFUSO Ø4,5 X 18MM Sextavado FV	
45.0317.020	PARAFUSO Ø4,5 X 20MM Sextavado FV	
45.0317.022	PARAFUSO Ø4,5 X 22MM Sextavado FV	
45.0317.024	PARAFUSO Ø4,5 X 24MM Sextavado FV	
45.0317.026	PARAFUSO Ø4,5 X 26MM Sextavado FV	
45.0317.028	PARAFUSO Ø4,5 X 28MM Sextavado FV	
45.0317.030	PARAFUSO Ø4,5 X 30MM Sextavado FV	

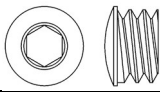
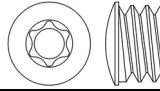
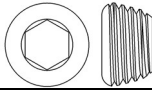
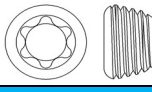
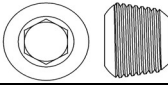
45.0317.045	PARAFUSO Ø4,5 X 45MM Sextavado FV
45.0317.034	PARAFUSO Ø4,5 X 34MM Sextavado FV
45.0317.036	PARAFUSO Ø4,5 X 36MM Sextavado FV
45.0317.038	PARAFUSO Ø4,5 X 38MM Sextavado FV
45.0317.040	PARAFUSO Ø4,5 X 40MM Sextavado FV
45.0317.042	PARAFUSO Ø4,5 X 42MM Sextavado FV
45.0317.044	PARAFUSO Ø4,5 X 44MM Sextavado FV
45.0317.046	PARAFUSO Ø4,5 X 46MM Sextavado FV
45.0317.048	PARAFUSO Ø4,5 X 48MM Sextavado FV
45.0317.050	PARAFUSO Ø4,5 X 50MM Sextavado FV
45.0317.052	PARAFUSO Ø4,5 X 52MM Sextavado FV
45.0317.054	PARAFUSO Ø4,5 X 54MM Sextavado FV
45.0317.056	PARAFUSO Ø4,5 X 56MM Sextavado FV
45.0317.058	PARAFUSO Ø4,5 X 58MM Sextavado FV
45.0317.060	PARAFUSO Ø4,5 X 60MM Sextavado FV
45.0317.062	PARAFUSO Ø4,5 X 62MM Sextavado FV
45.0317.064	PARAFUSO Ø4,5 X 64MM Sextavado FV
45.0317.066	PARAFUSO Ø4,5 X 66MM Sextavado FV
45.0317.068	PARAFUSO Ø4,5 X 68MM Sextavado FV
45.0317.070	PARAFUSO Ø4,5 X 70MM Sextavado FV
45.0317.075	PARAFUSO Ø4,5 X 75MM Sextavado FV
45.0317.080	PARAFUSO Ø4,5 X 80MM Sextavado FV
45.0317.085	PARAFUSO Ø4,5 X 85MM Sextavado FV
45.0317.090	PARAFUSO Ø4,5 X 90MM Sextavado FV
45.0317.095	PARAFUSO Ø4,5 X 95MM Sextavado FV
45.0317.100	PARAFUSO Ø4,5 X 100MM Sextavado FV
45.0317.105	PARAFUSO Ø4,5 X 105MM Sextavado FV
45.0317.110	PARAFUSO Ø4,5 X 110MM Sextavado FV
45.0317.115	PARAFUSO Ø4,5 X 115MM Sextavado FV
45.0317.120	PARAFUSO Ø4,5 X 120MM Sextavado FV
45.0317.125	PARAFUSO Ø4,5 X 125MM Sextavado FV
45.0317.130	PARAFUSO Ø4,5 X 130MM Sextavado FV
45.0317.135	PARAFUSO Ø4,5 X 135MM Sextavado FV
45.0317.140	PARAFUSO Ø4,5 X 140MM Sextavado FV
45.0317.145	PARAFUSO Ø4,5 X 145MM Sextavado FV
45.0317.150	PARAFUSO Ø4,5 X 150MM Sextavado FV
45.0317.155	PARAFUSO Ø4,5 X 155MM Sextavado FV

45.0317.160	PARAFUSO Ø4,5 X 160MM Sextavado FV	
45.0317.165	PARAFUSO Ø4,5 X 165MM Sextavado FV	
45.0317.170	PARAFUSO Ø4,5 X 170MM Sextavado FV	
45.0317.175	PARAFUSO Ø4,5 X 175MM Sextavado FV	
45.0317.180	PARAFUSO Ø4,5 X 180MM Sextavado FV	
45.0316.012	PARAFUSO Ø4,5 X 12MM Estrela FV	
45.0316.014	PARAFUSO Ø4,5 X 14MM Estrela FV	
45.0316.016	PARAFUSO Ø4,5 X 16MM Estrela FV	
45.0316.018	PARAFUSO Ø4,5 X 18MM Estrela FV	
45.0316.020	PARAFUSO Ø4,5 X 20MM Estrela FV	
45.0316.022	PARAFUSO Ø4,5 X 22MM Estrela FV	
45.0316.024	PARAFUSO Ø4,5 X 24MM Estrela FV	
45.0316.026	PARAFUSO Ø4,5 X 26MM Estrela FV	
45.0316.028	PARAFUSO Ø4,5 X 28MM Estrela FV	
45.0316.030	PARAFUSO Ø4,5 X 30MM Estrela FV	
45.0316.032	PARAFUSO Ø4,5 X 32MM Estrela FV	
45.0316.034	PARAFUSO Ø4,5 X 34MM Estrela FV	
45.0316.036	PARAFUSO Ø4,5 X 36MM Estrela FV	
45.0316.038	PARAFUSO Ø4,5 X 38MM Estrela FV	
45.0316.040	PARAFUSO Ø4,5 X 40MM Estrela FV	
45.0316.042	PARAFUSO Ø4,5 X 42MM Estrela FV	
45.0316.044	PARAFUSO Ø4,5 X 44MM Estrela FV	
45.0316.046	PARAFUSO Ø4,5 X 46MM Estrela FV	
45.0316.048	PARAFUSO Ø4,5 X 48MM Estrela FV	
45.0316.050	PARAFUSO Ø4,5 X 50MM Estrela FV	
45.0316.052	PARAFUSO Ø4,5 X 52MM Estrela FV	
45.0316.054	PARAFUSO Ø4,5 X 54MM Estrela FV	
45.0316.056	PARAFUSO Ø4,5 X 56MM Estrela FV	
45.0316.058	PARAFUSO Ø4,5 X 58MM Estrela FV	
45.0316.060	PARAFUSO Ø4,5 X 60MM Estrela FV	
45.0316.062	PARAFUSO Ø4,5 X 62MM Estrela FV	
45.0316.064	PARAFUSO Ø4,5 X 64MM Estrela FV	
45.0316.066	PARAFUSO Ø4,5 X 66MM Estrela FV	
45.0316.068	PARAFUSO Ø4,5 X 68MM Estrela FV	
45.0316.070	PARAFUSO Ø4,5 X 70MM Estrela FV	
45.0316.075	PARAFUSO Ø4,5 X 75MM Estrela FV	
45.0316.080	PARAFUSO Ø4,5 X 80MM Estrela FV	

45.0316.085	PARAFUSO Ø4,5 X 85MM Estrela FV	
45.0316.090	PARAFUSO Ø4,5 X 90MM Estrela FV	
45.0316.095	PARAFUSO Ø4,5 X 95MM Estrela FV	
45.0316.100	PARAFUSO Ø4,5 X 100MM Estrela FV	
45.0316.105	PARAFUSO Ø4,5 X 105MM Estrela FV	
45.0316.110	PARAFUSO Ø4,5 X 110MM Estrela FV	
45.0316.115	PARAFUSO Ø4,5 X 115MM Estrela FV	
45.0316.120	PARAFUSO Ø4,5 X 120MM Estrela FV	
45.0316.125	PARAFUSO Ø4,5 X 125MM Estrela FV	
45.0316.130	PARAFUSO Ø4,5 X 130MM Estrela FV	
45.0316.135	PARAFUSO Ø4,5 X 135MM Estrela FV	
45.0316.140	PARAFUSO Ø4,5 X 140MM Estrela FV	
45.0316.145	PARAFUSO Ø4,5 X 145MM Estrela FV	
45.0316.150	PARAFUSO Ø4,5 X 150MM Estrela FV	
45.0316.155	PARAFUSO Ø4,5 X 155MM Estrela FV	
45.0316.160	PARAFUSO Ø4,5 X 160MM Estrela FV	
45.0316.165	PARAFUSO Ø4,5 X 165MM Estrela FV	
45.0316.170	PARAFUSO Ø4,5 X 170MM Estrela FV	
45.0316.175	PARAFUSO Ø4,5 X 175MM Estrela FV	
45.0316.180	PARAFUSO Ø4,5 X 180MM Estrela FV	
Parafusos FV (Fix Vari) Ø 5,0 mm		
Codigo	Descrição	IMAGEM
50.0317.012	PARAFUSO Ø5,0 X 12MM Sextavado FV	
50.0317.014	PARAFUSO Ø5,0 X 14MM Sextavado FV	
50.0317.016	PARAFUSO Ø5,0 X 16MM Sextavado FV	
50.0317.018	PARAFUSO Ø5,0 X 18MM Sextavado FV	
50.0317.020	PARAFUSO Ø5,0 X 20MM Sextavado FV	
50.0317.022	PARAFUSO Ø5,0 X 22MM Sextavado FV	
50.0317.024	PARAFUSO Ø5,0 X 24MM Sextavado FV	
50.0317.026	PARAFUSO Ø5,0 X 26MM Sextavado FV	
50.0317.028	PARAFUSO Ø5,0 X 28MM Sextavado FV	
50.0317.030	PARAFUSO Ø5,0 X 30MM Sextavado FV	
50.0317.032	PARAFUSO Ø5,0 X 32MM Sextavado FV	
50.0317.034	PARAFUSO Ø5,0 X 34MM Sextavado FV	
50.0317.036	PARAFUSO Ø5,0 X 36MM Sextavado FV	
50.0317.038	PARAFUSO Ø5,0 X 38MM Sextavado FV	
50.0317.040	PARAFUSO Ø5,0 X 40MM Sextavado FV	

50.0317.042	PARAFUSO Ø5,0 X 42MM Sextavado FV	
50.0317.044	PARAFUSO Ø5,0 X 44MM Sextavado FV	
50.0317.046	PARAFUSO Ø5,0 X 46MM Sextavado FV	
50.0317.048	PARAFUSO Ø5,0 X 48MM Sextavado FV	
50.0317.050	PARAFUSO Ø5,0 X 50MM Sextavado FV	
50.0317.052	PARAFUSO Ø5,0 X 52MM Sextavado FV	
50.0317.054	PARAFUSO Ø5,0 X 54MM Sextavado FV	
50.0317.056	PARAFUSO Ø5,0 X 56MM Sextavado FV	
50.0317.058	PARAFUSO Ø5,0 X 58MM Sextavado FV	
50.0317.060	PARAFUSO Ø5,0 X 60MM Sextavado FV	
50.0317.062	PARAFUSO Ø5,0 X 62MM Sextavado FV	
50.0317.064	PARAFUSO Ø5,0 X 64MM Sextavado FV	
50.0317.066	PARAFUSO Ø5,0 X 66MM Sextavado FV	
50.0317.068	PARAFUSO Ø5,0 X 68MM Sextavado FV	
50.0317.070	PARAFUSO Ø5,0 X 70MM Sextavado FV	
50.0317.075	PARAFUSO Ø5,0 X 75MM Sextavado FV	
50.0317.080	PARAFUSO Ø5,0 X 80MM Sextavado FV	
50.0317.085	PARAFUSO Ø5,0 X 85MM Sextavado FV	
50.0317.090	PARAFUSO Ø5,0 X 90MM Sextavado FV	
50.0317.095	PARAFUSO Ø5,0 X 95MM Sextavado FV	
50.0317.100	PARAFUSO Ø5,0 X 100MM Sextavado FV	
50.0317.105	PARAFUSO Ø5,0 X 105MM Sextavado FV	
50.0317.110	PARAFUSO Ø5,0 X 110MM Sextavado FV	
50.0317.115	PARAFUSO Ø5,0 X 115MM Sextavado FV	
50.0317.120	PARAFUSO Ø5,0 X 120MM Sextavado FV	
50.0317.125	PARAFUSO Ø5,0 X 125MM Sextavado FV	
50.0317.130	PARAFUSO Ø5,0 X 130MM Sextavado FV	
50.0317.135	PARAFUSO Ø5,0 X 135MM Sextavado FV	
50.0317.140	PARAFUSO Ø5,0 X 140MM Sextavado FV	
50.0317.145	PARAFUSO Ø5,0 X 145MM Sextavado FV	
50.0317.150	PARAFUSO Ø5,0 X 150MM Sextavado FV	
50.0317.155	PARAFUSO Ø5,0 X 155MM Sextavado FV	
50.0317.160	PARAFUSO Ø5,0 X 160MM Sextavado FV	
50.0317.165	PARAFUSO Ø5,0 X 165MM Sextavado FV	
50.0317.170	PARAFUSO Ø5,0 X 170MM Sextavado FV	
50.0317.175	PARAFUSO Ø5,0 X 175MM Sextavado FV	
50.0317.180	PARAFUSO Ø5,0 X 180MM Sextavado FV	

50.0316.012	PARAFUSO Ø5,0 X 12MM Estrela FV	
50.0316.014	PARAFUSO Ø5,0 X 14MM Estrela FV	
50.0316.016	PARAFUSO Ø5,0 X 16MM Estrela FV	
50.0316.018	PARAFUSO Ø5,0 X 18MM Estrela FV	
50.0316.020	PARAFUSO Ø5,0 X 20MM Estrela FV	
50.0316.022	PARAFUSO Ø5,0 X 22MM Estrela FV	
50.0316.024	PARAFUSO Ø5,0 X 24MM Estrela FV	
50.0316.026	PARAFUSO Ø5,0 X 26MM Estrela FV	
50.0316.028	PARAFUSO Ø5,0 X 28MM Estrela FV	
50.0316.030	PARAFUSO Ø5,0 X 30MM Estrela FV	
50.0316.032	PARAFUSO Ø5,0 X 32MM Estrela FV	
50.0316.034	PARAFUSO Ø5,0 X 34MM Estrela FV	
50.0316.036	PARAFUSO Ø5,0 X 36MM Estrela FV	
50.0316.038	PARAFUSO Ø5,0 X 38MM Estrela FV	
50.0316.040	PARAFUSO Ø5,0 X 40MM Estrela FV	
50.0316.042	PARAFUSO Ø5,0 X 42MM Estrela FV	
50.0316.044	PARAFUSO Ø5,0 X 44MM Estrela FV	
50.0316.046	PARAFUSO Ø5,0 X 46MM Estrela FV	
50.0316.048	PARAFUSO Ø5,0 X 48MM Estrela FV	
50.0316.050	PARAFUSO Ø5,0 X 50MM Estrela FV	
50.0316.052	PARAFUSO Ø5,0 X 52MM Estrela FV	
50.0316.054	PARAFUSO Ø5,0 X 54MM Estrela FV	
50.0316.056	PARAFUSO Ø5,0 X 56MM Estrela FV	
50.0316.058	PARAFUSO Ø5,0 X 58MM Estrela FV	
50.0316.060	PARAFUSO Ø5,0 X 60MM Estrela FV	
50.0316.062	PARAFUSO Ø5,0 X 62MM Estrela FV	
50.0316.064	PARAFUSO Ø5,0 X 64MM Estrela FV	
50.0316.066	PARAFUSO Ø5,0 X 66MM Estrela FV	
50.0316.068	PARAFUSO Ø5,0 X 68MM Estrela FV	
50.0316.070	PARAFUSO Ø5,0 X 70MM Estrela FV	
50.0316.075	PARAFUSO Ø5,0 X 75MM Estrela FV	
50.0316.080	PARAFUSO Ø5,0 X 80MM Estrela FV	
50.0316.085	PARAFUSO Ø5,0 X 85MM Estrela FV	
50.0316.090	PARAFUSO Ø5,0 X 90MM Estrela FV	
50.0316.095	PARAFUSO Ø5,0 X 95MM Estrela FV	
50.0316.100	PARAFUSO Ø5,0 X 100MM Estrela FV	
50.0316.105	PARAFUSO Ø5,0 X 105MM Estrela FV	

50.0316.110	PARAFUSO Ø5,0 X 110MM Estrela FV	
50.0316.115	PARAFUSO Ø5,0 X 115MM Estrela FV	
50.0316.120	PARAFUSO Ø5,0 X 120MM Estrela FV	
50.0316.125	PARAFUSO Ø5,0 X 125MM Estrela FV	
50.0316.130	PARAFUSO Ø5,0 X 130MM Estrela FV	
50.0316.135	PARAFUSO Ø5,0 X 135MM Estrela FV	
50.0316.140	PARAFUSO Ø5,0 X 140MM Estrela FV	
50.0316.145	PARAFUSO Ø5,0 X 145MM Estrela FV	
50.0316.150	PARAFUSO Ø5,0 X 150MM Estrela FV	
50.0316.155	PARAFUSO Ø5,0 X 155MM Estrela FV	
50.0316.160	PARAFUSO Ø5,0 X 160MM Estrela FV	
50.0316.165	PARAFUSO Ø5,0 X 165MM Estrela FV	
50.0316.170	PARAFUSO Ø5,0 X 170MM Estrela FV	
50.0316.175	PARAFUSO Ø5,0 X 175MM Estrela FV	
50.0316.180	PARAFUSO Ø5,0 X 180MM Estrela FV	
45.3000.004	PARAFUSO CONECTOR PERIPROTÉTICA DE FIO	
45.3100.004	PARAFUSO CONECTOR DA ABRAÇADEIRA	
Bloqueador diâmetro 2,8 mm		
Código	Descrição	Imagem
28.0320.005	BLOQUEADOR 2.8 SEXTAVADO	
28.0321.005	BLOQUEADOR 2.8 ESTRELA	
Bloqueador diâmetro 3,5 mm		
Código	Descrição	Imagem
35.0320.005	BLOQUEADOR 3.5 / 4.0 SEXTAVADO	
35.0321.005	BLOQUEADOR 3.5 / 4.0 ESTRELA	
Bloqueador diâmetro 4,5 mm		
Código	Descrição	Imagem
45.0320.005	BLOQUEADOR 4.5 / 5.0 SEXTAVADO	

45.0321.005	BLOQUEADOR 4.5 / 5.0 ESTRELA	 
Bloqueador FV diâmetro 2,8 mm		
Código	Descrição	Imagem
28.0318.005	BLOQUEADOR 2.8 Sextavado FV	 
28.0319.005	BLOQUEADOR 2.8 Estrela FV	 
Bloqueador FV diâmetro 3,5 mm		
Código	Descrição	Imagem
35.0318.005	BLOQUEADOR 3.5 / 4.0 Sextavado FV	 
35.0319.005	BLOQUEADOR 3.5 / 4.0 Estrela FV	 
Bloqueador FV diâmetro 4,5 mm		
Código	Descrição	Imagem
45.0318.005	BLOQUEADOR 4.5 / 5.0 Sextavado FV	 
45.0319.005	BLOQUEADOR 4.5 / 5.0 Estrela FV	 

1.6. Acessórios

O SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS é caracterizado como sistema aberto de parafusos e placas e possui acessórios.

1.6.1. Calço para Osteotomia Valgizante da Tíbia

O SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS possui um conjunto de acessórios, o qual consiste em um calço que contém uma trava mecânica fabricado a partir de uma chapa de Titânio conforme norma ASTM F67.

Em cirurgias de Osteotomia valgizante da Tíbia para a correção da deformidade em varo do joelho, pode-se utilizar calços de medidas variadas nas placas para osteotomia de tíbia, contidas na Tabela 3,

cabe ao cirurgião responsável se necessário fazer uso do conjunto placa com calço (Figura 3) para correção da deformidade em varo do joelho.

O calço para osteotomia, é oferecido em diversas na dimensões e caberá ao cirurgião responsável escolher aquele que melhor se aplica para o ato a ser realizado.

MONTAGEM DE UMA PLACA COM UM CONJUNTO CALÇO

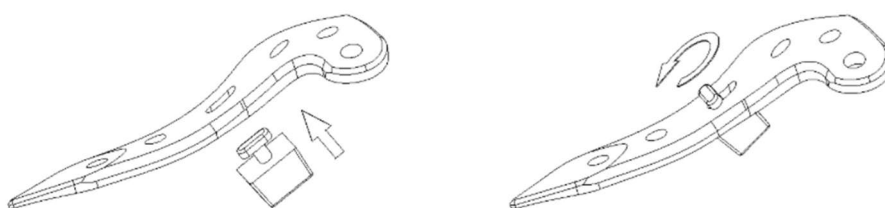


Figura 3 - Montagem de uma placa de osteotomia de tíbia com um conjunto calço

1.6.2. Bloqueador

O SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS possui um conjunto de acessórios, no qual consiste em um parafuso bloqueador (Figura 4) que será inserido no orifício das placas, cujo a finalidade consiste em evitar a deformação dos furos da placa que necessitar de pequenos ajustes manuais, os parafusos são fabricados em titânio ASTM F136, sendo oferecidos em dois modelos, com ângulo variável e somente com fixação rígida, com diversos diâmetros, este componente é fabricado em material biocompatível ficando a critério do cirurgião a sua utilização podendo ou não optar por sua permanência no paciente. Os modelos comerciais são referenciados na tabela 4, e a sua compatibilidade dimensional esta descrito na tabela 7.



Figura 4 – Imagem ilustrativa do parafuso bloqueador.

1.6.3 Parafuso Conector Da Abraçadeira

O SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS possui um conjunto de acessórios, no qual consiste em um parafuso conector da abraçadeira (Figura 5), cuja a finalidade é promover a fixação da placa abraçadeira na placa periprotética, os componentes

são fabricados em material biocompatível (titânio ASTM F136), ficando a critério do cirurgião a sua utilização podendo ou não optar por sua permanência no paciente. Os modelos comerciais são referenciados na tabela 4, e a sua compatibilidade dimensional esta descrito na tabela 7.



Figura 5 – Imagem ilustrativa do Parafuso Conector Da Abraçadeira

1.6.4. Parafuso Conector Periprotetica De Fio

O SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS possui um conjunto de acessórios, no qual consiste em um parafuso conector da abraçadeira periprotética de fio (Figura 6), onde o cabo (Não objeto deste registro) é bloqueado nas placas após a cerclagem, os parafusos atuam como trava do cabo, sendo utilizado para crimpagem e manutenção da tensão aplicada, os componentes são fabricados em material biocompatível (titânio ASTM F136), ficando a critério do cirurgião a sua utilização podendo ou não optar por sua permanência no paciente. Os modelos comerciais são referenciados na tabela 4, e a sua compatibilidade dimensional esta descrito na tabela 7.



Figura 6 – Imagem ilustrativa Parafuso Conector Periprotetica De Fio

1.7. Componentes ancilares

O "SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS" (Registro ANVISA 80084420019) é o dispositivo médico principal, projetado para fixação óssea em diversas aplicações ortopédicas, os "PARAFUSOS CORTICAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS" pertencente ao Registro ANVISA 80084420014, os PARAFUSOS DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS pertencente ao registro 80084420021, e os PARAFUSOS CANULADOS pertencente ao registro 80084420013 são componentes ancilares do registro

80084420019, que, embora possuam um registro próprio, atuam de forma complementar ao SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS. As informações dos modelos comerciais anclares que são contemplados neste registro encontra-se na tabela 5, tabela 6, e tabela 7.

Tabela 5 – Componentes anclares pertencente ao registro 80084420014.

Registro 80084420014	
Descrição	Comprimentos
Parafuso Cortical Ø 2.8 Sextavado	6 – 30mm
Parafuso Cortical Ø 2.8 Estrela	6 – 30mm
Parafuso Cortical Ø 3.5 Sextavado	10 – 95mm
Parafuso Cortical Ø 3.5 Estrela	10 – 60mm
Parafuso Cortical Ø 4.0 Sextavado	10 – 95mm
Parafuso Cortical Ø 4.0 Estrela	10 – 60mm
Parafuso Cortical Ø 4.5 Sextavado	14 – 70mm
Parafuso Cortical Ø 4.5 Estrela	14 – 70mm

Tabela 6 – Componentes anclares pertencente ao registro 80084420021

Registro 80084420021	
Descrição do Parafuso	Comprimentos
Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela	8 – 40mm
Parafuso Ø 2.7 Fixação Rígida Estrela	8 – 40mm

Tabela 7 – Componentes anclares pertencente ao registro 80084420013

Registro 80084420021	
Descrição do Parafuso	Comprimentos
Parafuso Canulado de Bloqueio Ø 6,5	40 – 120mm

1.8. Compatibilidade Dimensional

As placas do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS são compatíveis com seus respectivos parafusos, conforme demonstrado na tabela 8.

Tabela 8 - Compatibilidade de uso dos componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS.

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.35.08.08.068	Placa DCP Congruente “D” da Clavícula 6 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 /4,0
1.67.35.09.08.068	Placa DCP Congruente “E” da Clavícula 6 Furos		
1.67.35.08.08.079	Placa DCP Congruente Direita da Clavícula 8 Furos		
1.67.35.09.08.079	Placa DCP Congruente Esquerda da Clavícula 8 Furos		
1.67.35.08.10.096	Placa DCP Congruente Direita da Clavícula 10 Furos		
1.67.35.09.10.096	Placa DCP Congruente Esquerda da Clavícula 10 Furos		
1.67.35.08.12.115	Placa DCP Congruente Direita da Clavícula 12 Furos		
1.67.35.09.12.115	Placa DCP Congruente Esquerda da Clavícula 12 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.0302.005	Placa FR Clavícula Lateral Anterior P		
35.0402.006	Placa FR Clavícula Lateral Anterior M		
35.0403.007	Placa FR Clavícula Lateral Anterior G		
35.0404.008	Placa FR Clavícula Lateral Anterior EG		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
1.67.35.78.07.110	Placa Grande Direita Clavícula		
1.67.35.79.07.110	Placa Grande Esquerda Clavícula		
1.67.35.78.07.136	Placa Extra Grande Direita Clavícula		
1.67.35.79.07.136	Placa Extra Grande Esquerda Clavícula		
1.67.35.78.05.080	Placa Média Direita Clavícula		
1.67.35.79.05.080	Placa Média Esquerda Clavícula		
1.67.35.78.04.055	Placa Pequena Direita Clavícula		
1.67.35.79.04.055	Placa Pequena Esquerda Clavícula		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.0012.001	Placa Gancho FR Clavícula “D” 12 mm		
35.0015.001	Placa Gancho FR Clavícula “D” 15 mm		
35.0018.001	Placa Gancho FR Clavícula “D” 18 mm		
35.0012.002	Placa Gancho FR Clavícula “E” 12 mm		
35.0015.002	Placa Gancho FR Clavícula “E” 15 mm		
35.0018.002	Placa Gancho FR Clavícula “E” 18 mm		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

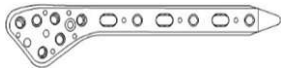
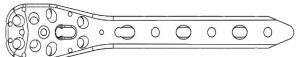
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.35.04.08.050	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 7 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 /4,0
1.67.35.04.08.079	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 8 Furos		
1.67.35.04.09.107	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 9 Furos		
1.67.35.04.10.136	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 10 Furos		
1.67.35.04.11.164	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Esquerdo 11 Furos		
1.67.35.05.08.050	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 7 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 /4,0
1.67.35.05.08.079	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 8 Furos		
1.67.35.05.09.107	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 9 Furos		
1.67.35.05.10.136	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 10 Furos		
1.67.35.05.11.164	Placa Fixação Rígida Úmero Proximal Direito 11 Furos		
35.3511.000	Placa FR Úmero Proximal P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 /4,0
35.3512.000	Placa FR Úmero Proximal M		
35.3513.000	Placa FR Úmero Proximal G		
35.3514.000	Placa FR Úmero Proximal EG		
35.3515.000	Placa FR Úmero Proximal SG		
35.3501.001	Placa FR Úmero Proximal "D" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 /4,0
35.3502.001	Placa FR Úmero Proximal "D" M		
35.3503.001	Placa FR Úmero Proximal "D" G		
35.3504.001	Placa FR Úmero Proximal "D" EG		
35.3505.001	Placa FR Úmero Proximal "D" SG		
35.3501.002	Placa FR Úmero Proximal "E" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 /4,0
35.3502.002	Placa FR Úmero Proximal "E" M		
35.3503.002	Placa FR Úmero Proximal "E" G		
35.3504.002	Placa FR Úmero Proximal "E" EG		
35.3505.002	Placa FR Úmero Proximal "E" SG		
35.2501.000	Placa FR Úmero Medial "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado
35.2502.000	Placa FR Úmero Medial "M"		
35.2503.000	Placa FR Úmero Medial "G"		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
35.2504.000	Placa FR Úmero Medial “SG”		Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.0128.001	Placa FR Úmero Posteromedial “D” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.0228.001	Placa FR Úmero Posteromedial “D” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.0328.001	Placa FR Úmero Posteromedial “D” G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.0428.001	Placa FR Úmero Posteromedial “D” SG		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.0128.002	Placa FR Úmero Posteromedial “E” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.0228.002	Placa FR Úmero Posteromedial “E” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.0328.002	Placa FR Úmero Posteromedial “E” G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.0428.002	Placa FR Úmero Posteromedial “E” SG		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.0528.001	Placa FR Úmero Lateral “D” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.0628.001	Placa FR Úmero Lateral “D” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.0728.001	Placa FR Úmero Lateral “D” G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.0828.001	Placa FR Úmero Lateral “D” SG		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.0528.002	Placa FR Úmero Lateral “E” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.0628.002	Placa FR Úmero Lateral “E” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.0728.002	Placa FR Úmero Lateral “E” G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.0828.002	Placa FR Úmero Lateral “E” SG		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.0928.001	Placa FR Úmero Posterolateral “D” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.1028.001	Placa FR Úmero Posterolateral “D” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.1128.001	Placa FR Úmero Posterolateral “D” G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.1228.001	Placa FR Úmero Posterolateral “D” SG		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0 / 2,8
35.0928.002	Placa FR Úmero Posterolateral “E” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.1028.002	Placa FR Úmero Posterolateral “E” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.1128.002	Placa FR Úmero Posterolateral “E” G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.1228.002	Placa FR Úmero Posterolateral “E” SG		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.3513.001	Placa FR Úmero Distal Posterolateral “D” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.3514.001	Placa FR Úmero Distal Posterolateral “D” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.3535.001	Placa FR Úmero Distal Posterolateral “D” G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

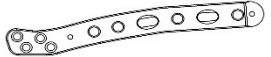
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
35.3513.002	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "E" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.3514.002	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "E" M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela
35.3535.002	Placa FR Úmero Distal Posterolateral "E" G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
1.67.35.03.04.044	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.35.03.06.084	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 3 Furos		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado
1.67.35.03.08.134	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 5 Furos		Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado
1.67.35.03.11.184	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Direita 3 x 7 Furos		Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.35.02.04.044	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.35.02.06.084	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 3 Furos		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado
1.67.35.02.08.134	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 5 Furos		Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado
1.67.35.02.11.184	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Lateral Esquerda 3 x 7 Furos		Bloqueador Ø 3,5 /4,0
35.2836.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" com Suporte P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2837.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" com Suporte M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.2838.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" com Suporte G		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2836.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" com Suporte P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2837.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" com Suporte M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.2838.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "E" com Suporte G		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2839.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2840.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado
35.2841.001	Placa FR Epicôndilo Posterolateral "D" G		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

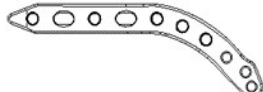
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
35.2839.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral “E” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2840.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral “E” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2841.002	Placa FR Epicôndilo Posterolateral “E” G		
35.2844.001	Placa FR Epicôndilo Anteromedial “D” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2845.001	Placa FR Epicôndilo Anteromedial “D” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2873.001	Placa FR Epicôndilo Anteromedial “D” G		
35.2844.002	Placa FR Epicôndilo Anteromedial “E” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2845.002	Placa FR Epicôndilo Anteromedial “E” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2873.002	Placa FR Epicôndilo Anteromedial “E” G		
1.67.35.01.04.075	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 2 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
1.67.35.01.05.081	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 2 Furos		
1.67.35.01.06.107	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 3 Furos		
1.67.35.01.07.132	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 4 Furos		
1.67.35.01.08.158	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 5 Furos		
1.67.35.01.09.184	Placa Fixação Rígida Epicôndilo Medial 3 x 6 Furos		
35.2842.001	Placa FR Epicôndilo Posteromedial “D” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2843.001	Placa FR Epicôndilo Posteromedial “D” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2872.001	Placa FR Epicôndilo Posteromedial “D” G		
35.2842.002	Placa FR Epicôndilo Posteromedial “E” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2843.002	Placa FR Epicôndilo Posteromedial “E” M		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2872.002	Placa FR Epicôndilo Posteromedial “E” G		
1.67.27.58.10.078	Placa p/ Olecrano Esquerda 10 Furos Espessura 2.0 mm		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.27.58.11.108	Placa p/ Olecrano Esquerda 11 Furos Espessura 2.0 mm		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.27.58.12.138	Placa p/ Olecrano Esquerda 12 Furos Espessura 2.0 mm		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
1.67.27.61.10.078	Placa p/ Olecrano Esquerda 10 Furos Espessura 3.0 mm		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.27.61.11.108	Placa p/ Olecrano Esquerda 11 Furos Espessura 3.0 mm		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
1.67.27.61.12.138	Placa p/ Olecrano Esquerda 12 Furos Espessura 3.0 mm		
1.67.27.59.10.078	Placa p/ Olecrano Direita 10 Furos Espessura 2.0 mm		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.27.59.11.108	Placa p/ Olecrano Direita 11 Furos Espessura 2.0 mm		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 /4,0
1.67.27.59.12.138	Placa p/ Olecrano Direita 12 Furos Espessura 2.0 mm		
1.67.27.62.10.078	Placa p/ Olecrano Direita 10 Furos Espessura 3.0 mm		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.27.62.11.108	Placa p/ Olecrano Direita 11 Furos Espessura 3.0 mm		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
1.67.27.62.12.138	Placa p/ Olecrano Direita 12 Furos Espessura 3.0 mm		
35.2862.000	Placa FR Olecrano com Gancho P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2828.001	Placa FR Olecrano “D” com Gancho M		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2827.001	Placa FR Olecrano “D” com Gancho G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2829.001	Placa FR Olecrano “D” com Gancho EG		
35.2828.002	Placa FR Olecrano “E” com Gancho M		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.2827.002	Placa FR Olecrano “E” com Gancho G		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5 / 4,0
35.2829.002	Placa FR Olecrano “E” com Gancho EG		
1.67.32.34.06.120	Placa 6 Furos Fixação Rígida para Artrodese de Punho		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
1.67.32.34.07.144	Placa 7 Furos Fixação Rígida para Artrodese de Punho		Registro Ancilar:80084420021: Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 3,5

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.40.73.06.030	PLACA "T" PARA RÁDIO PROXIMAL 4 X 2 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.73.07.044	PLACA "T" PARA RÁDIO PROXIMAL 4 X 3 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.73.07.059	PLACA "T" PARA RÁDIO PROXIMAL 4 X 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2		
1.67.40.71.05.030	PLACA "L" DIREITA PARA RÁDIO PROXIMAL FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2 – 3 X 2 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.71.06.044	PLACA "L" DIREITA PARA RÁDIO PROXIMAL FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2 – 3 X 3 FUROS		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.71.07.059	PLACA "L" DIREITA PARA RÁDIO PROXIMAL FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2 – 3 X 4 FUROS		
1.67.40.72.05.030	PLACA "L" ESQUERDA P/ RÁDIO PROXIMAL FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2 – 3 X 2 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.72.06.044	PLACA "L" ESQUERDA P/ RÁDIO PROXIMAL FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2 – 3 X 3 FUROS		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.72.07.059	PLACA "L" ESQUERDA P/ RÁDIO PROXIMAL FIXAÇÃO RÍGIDA 2.4/3.2 – 3 X 4 FUROS		
1.67.40.96.08.076	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA ULNA DISTAL DIREITA 4 X 4 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.96.07.054	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA ULNA DISTAL DIREITA 4 X 3 FUROS		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.96.06.044	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA ULNA DISTAL DIREITA 4 X 2 FUROS		
1.67.40.97.08.076	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA ULNA DISTAL ESQUERDA 4 X 4 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.97.07.054	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA ULNA DISTAL ESQUERDA 4 X 3 FUROS		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.97.06.044	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA ULNA DISTAL ESQUERDA 4 X 2 FUROS		
1.67.40.51.07.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 5 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.51.08.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 5 x 3 Furos		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2.4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.51.09.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 5 x 4 Furos		
1.67.40.50.07.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 5 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

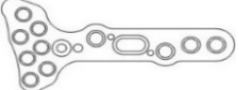
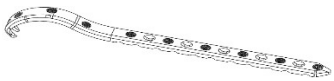
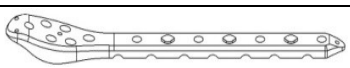
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.40.50.08.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 5 x 3 Furos		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2,4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.50.09.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 5 x 4 Furos		
1.67.40.51.08.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 6 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.51.09.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 6 x 3 Furos		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2,4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.51.10.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 6 x 4 Furos		
1.67.40.50.08.050	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 6 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.50.09.055	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 6 x 3 Furos		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2,4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.50.10.062	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Esquerda 6 x 4 Furos		
1.67.40.51.09.051	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal DIREITA 7 x 2 Furos		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.51.10.057	Placa Fixação Rígida Para Rádio Distal Direita 7 x 3 Furos		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2,4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.51.11.064	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA RÁDIO DISTAL DIREITA 7 X 4 FUROS		
1.67.40.50.09.051	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA RÁDIO DISTAL ESQUERDA 7 X 2 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8
1.67.40.50.10.057	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA RÁDIO DISTAL ESQUERDA 7 X 3 FUROS		Registro Ancilar:80084420021:Parafuso Ø 2,4 Fixação Rígida Estrela / Parafuso Ø 2,7 Fixação Rígida Estrela. Bloqueador Ø 2,4 / 2,7 / 2,8
1.67.40.50.11.064	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA RÁDIO DISTAL ESQUERDA 7 X 4 FUROS		
1.67.45.30.05.134	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA FÊMUR PROXIMAL 5 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
1.67.45.30.07.192	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA FÊMUR PROXIMAL 7 FUROS		Parafuso Ø 4,5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4,5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
1.67.45.30.09.250	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA FÊMUR PROXIMAL 9 FUROS		
1.67.45.30.11.308	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA FÊMUR PROXIMAL 11 FUROS		
45.5017.001	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "D" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

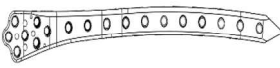
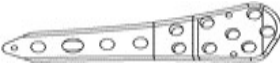
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
45.5018.001	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "D" M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
45.5019.001	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "D" G		
45.5020.001	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "D" EG		
455.021.001	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "D" SG		
45.5017.002	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "E" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5018.002	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "E" M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
45.5019.002	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "E" G		
45.5020.002	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "E" EG		
45.5021.002	PLACA FR FÊMUR PROXIMAL "E" SG		
45.5001.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5002.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
45.5003.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" G		
45.5004.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" EG		
45.5005.001	Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" SG		
45.5001.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5002.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
45.5003.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" G		
45.5004.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" EG		
45.5005.002	Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" SG		
1.67.50.24.11.103	Placa Fêmur Distal Lateral "E" 11 Furos FR		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
1.67.50.24.12.142	Placa Fêmur Distal Lateral "E" 12 Furos FR		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
1.67.50.24.13.171	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Esquerda 13 Furos		
1.67.50.24.14.200	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Esquerda 14 Furos		
1.67.50.24.15.229	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Esquerda 15 Furos		
1.67.50.25.11.103	Placa Fêmur Distal Lateral "D" 11 Furos FR		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
1.67.50.25.12.142	Placa Fêmur Distal Lateral "D" 12 Furos FR		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
1.67.50.25.13.171	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Direita 13 Furos		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

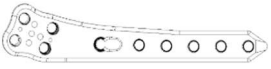
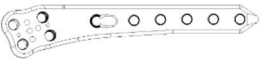
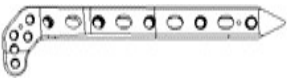
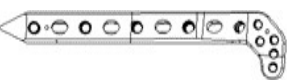
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.50.25.14.200	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Direita 14 Furos		
1.67.50.25.15.229	Placa Fixação Rígida Fêmur Distal Lateral Direita 15 Furos		
1.67.50.22.11.171	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial P “E”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
1.67.50.22.12.200	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial M “E”		
1.67.50.22.13.229	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial G “E”		
1.67.50.23.11.171	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial P “D”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
1.67.50.23.12.200	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial M “D”		
1.67.50.23.13.229	Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial G “D”		
35.2850.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “D” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
35.2851.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “D” M		
35.2852.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “D” G		
35.2853.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “D” EG		
35.2854.001	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “D” SG		
35.2850.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “E” P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
35.2851.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “E” M		
35.2852.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “E” G		
35.2853.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “E” EG		
35.2854.002	Placa FR Tíbia Proximal Lateral “E” SG		
1.67.50.11.08.162	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA TÍBIA PROXIMAL LATERAL DIREITA 8 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.50.11.09.191	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA TÍBIA PROXIMAL LATERAL DIREITA 9 FUROS		
1.67.50.11.10.220	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA TÍBIA PROXIMAL LATERAL DIREITA 10 FUROS		
1.67.50.10.08.162	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA TÍBIA PROXIMAL LATERAL ESQUERDA 8 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.50.10.09.191	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA TÍBIA PROXIMAL LATERAL ESQUERDA 9 FUROS		
1.67.50.10.10.220	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA TÍBIA PROXIMAL LATERAL ESQUERDA 10 FUROS		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

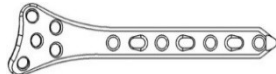
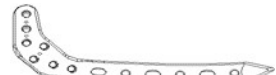
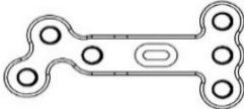
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.50.13.08.131	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA PROXIMAL EPÍFISE DIREITA 8 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.50.13.09.160	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA PROXIMAL EPÍFISE DIREITA 9 FUROS		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.50.12.08.131	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA PROXIMAL EPÍFISE ESQUERDA 8 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
1.67.50.12.09.160	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA PROXIMAL EPÍFISE ESQUERDA 9 FUROS		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
35.3520.001	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "D" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.3521.001	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "D" M		
35.3522.001	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "D" G		
35.3536.001	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "D" EG		
35.3537.001	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "D" SG		
35.3520.002	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "E" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0
35.3521.002	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "E" M		
35.3522.002	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "E" G		
35.3536.002	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "E" EG		
35.3537.002	PLACA FR TÍBIA PROXIMAL MEDIAL "E" SG		
35.3538.000	PLACA FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA P		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
35.3539.000	PLACA FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA M		
35.3540.001	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA "D" PARA TÍBIA P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
35.3541.001	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA "D" PARA TÍBIA M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3542.001	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA "D" PARA TÍBIA G		
35.3540.002	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA "E" PARA TÍBIA P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

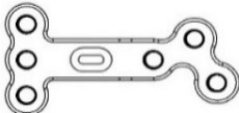
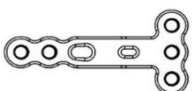
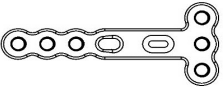
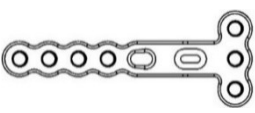
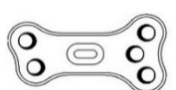
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
35.3541.002	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA "E" PARA TÍBIA M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3542.002	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA "E" PARA TÍBIA G		
35.3543.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 5 FUROS P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
35.3544.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 5 FUROS M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3545.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 5 FUROS G		
35.3546.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 6 FUROS P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
35.3547.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 6 FUROS M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3548.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 6 FUROS G		
35.3549.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 7 FUROS P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
35.3550.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 7 FUROS M		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3551.000	PLACA "T" FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 7 FUROS G		
35.3552.000	PLACA FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 4 FUROS P		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3553.000	PLACA FR DE OSTEOTOMIA PARA TÍBIA 4 FUROS M		
35.3553.001	PLACA FR DE OSTEOTOMIA "D" PARA TÍBIA 5 FUROS P		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3554.001	PLACA FR DE OSTEOTOMIA "D" PARA TÍBIA 5 FUROS M		
35.3553.002	PLACA FR DE OSTEOTOMIA "E" PARA TÍBIA 5 FUROS P		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Conjunto Calço Bloqueador Ø 4,5
35.3554.002	PLACA FR DE OSTEOTOMIA "E" PARA TÍBIA 5 FUROS M		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

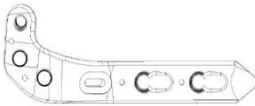
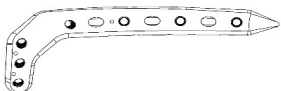
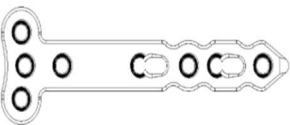
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
35.3555.001	PLACA DE OSTEOTOMIA PROXIMAL "D" 5 FUROS FR PARA TÍBIA P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
35.3556.001	PLACA DE OSTEOTOMIA PROXIMAL "D" 6 FUROS FR PARA TÍBIA P		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
35.3555.002	PLACA DE OSTEOTOMIA PROXIMAL "E" 5 FUROS FR PARA TÍBIA P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
35.3557.002	PLACA DE OSTEOTOMIA PROXIMAL "E" 6 FUROS FR PARA TÍBIA P		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
1.67.50.15.07.140	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA PROXIMAL MEDIAL DIREITA 7 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
1.67.50.15.08.169	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA PROXIMAL MEDIAL DIREITA 8 FUROS		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.50.14.07.140	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA PROXIMAL MEDIAL ESQUERDA 7 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
1.67.50.14.08.169	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA PROXIMAL MEDIAL ESQUERDA 8 FUROS		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
45.5010.000	PLACA FR "T" PARA TÍBIA 5 FUROS 69 MM		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
45.5011.000	PLACA FR "T" PARA TÍBIA 5 FUROS 86 MM		
45.5012.000	PLACA FR "T" PARA TÍBIA P		
45.5013.000	PLACA FR "T" PARA TÍBIA M		
45.5014.000	PLACA FR "T" PARA TÍBIA G		
45.5034.001	PLACA FR "L" D PARA TÍBIA 5 FUROS 73 MM		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
45.5035.001	PLACA FR "L" D PARA TÍBIA 5 FUROS 90 MM		
45.5031.001	PLACA FR "L" DIREITA PARA TÍBIA P		
45.5032.001	PLACA FR "L" DIREITA PARA TÍBIA M		
45.5033.001	PLACA FR "L" DIREITA PARA TÍBIA G		
45.5034.002	PLACA FR "L" E PARA TÍBIA 5 FUROS 73 MM		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
45.5035.002	PLACA FR "L" E PARA TÍBIA 5 FUROS 90 MM		Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 4,5
45.5031.002	PLACA FR "L" ESQUERDA PARA TÍBIA P		
45.5032.002	PLACA FR "L" ESQUERDA PARA TÍBIA M		
45.5033.002	PLACA FR "L" ESQUERDA PARA TÍBIA G		
45.3304.069	PLACA FR "T" PARA TÍBIA 4 FUROS 69 MM		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
45.3304.086	PLACA FR "T" PARA TÍBIA 4 FUROS 86 MM		
1.67.45.33.05.116	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "T" PARA TÍBIA 5 FUROS		
1.67.45.33.06.146	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "T" PARA TÍBIA 6 FUROS		
1.67.45.33.07.176	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "T" PARA TÍBIA 7 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
45.3104.073	PLACA FR "L" D PARA TÍBIA 4 FUROS 73 MM		
45.3104.090	PLACA FR "L" D PARA TÍBIA 4 FUROS 90 MM		
1.67.45.31.05.120	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "L" DIREITA PARA TÍBIA 5 FUROS		
1.67.45.31.06.150	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "L" DIREITA PARA TÍBIA 6 FUROS		
1.67.45.31.07.180	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "L" DIREITA PARA TÍBIA 7 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
45.3204.073	PLACA FR "L" E PARA TÍBIA 4 FUROS 73 MM		
45.3204.090	PLACA FR "L" E PARA TÍBIA 4 FUROS 90 MM		
1.67.45.32.05.120	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "L" ESQUERDA PARA TÍBIA 5 FUROS		
1.67.45.32.06.150	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "L" ESQUERDA PARA TÍBIA 6 FUROS		
1.67.45.32.07.180	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA "L" ESQUERDA PARA TÍBIA 7 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.40.19.10.124	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MEDIAL DIREITA 10 FUROS		
1.67.40.19.11.153	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MEDIAL DIREITA 11 FUROS		
1.67.40.19.12.182	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MEDIAL DIREITA 12 FUROS		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

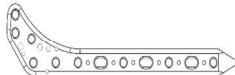
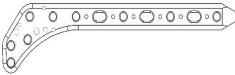
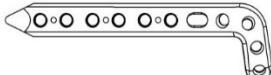
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
40.1914.242	PLACA PARA TÍBIA DISTAL MEDIAL "D" 14 FUROS FR		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
40.1916.289	PLACA PARA TÍBIA DISTAL MEDIAL "D" 16 FUROS FR		
1.67.40.18.10.124	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MEDIAL ESQUERDA 10 FUROS		
1.67.40.18.11.153	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MEDIAL ESQUERDA 11 FUROS		
1.67.40.18.12.182	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MEDIAL ESQUERDA 12 FUROS		
40.1814.242	PLACA PARA TÍBIA DISTAL MEDIAL "E" 14 FUROS FR		
40.1816.289	PLACA PARA TÍBIA DISTAL MEDIAL "E" 16 FUROS FR		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.40.17.08.119	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL MALÉOLO MEDIAL DIREITA 8 FUROS		
1.67.40.17.09.148	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL MALÉOLO MEDIAL DIREITA 9 FUROS		
1.67.40.17.10.177	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL MALÉOLO MEDIAL DIREITA 10 FUROS		
1.67.40.16.08.119	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA 8 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.40.16.09.148	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA 9 FUROS		
1.67.40.16.10.177	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA P/ TÍBIA DISTAL MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA 10 FUROS		
35.2846.001	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "D" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
35.2847.001	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "D" M		
35.2848.001	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "D" G		
35.2849.001	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "D" EG		
35.2846.002	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "E" P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
35.2847.002	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "E" M		
35.2848.002	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "E" G		
35.2849.002	PLACA FR TÍBIA DISTAL ÂNTERO-POSTERIOR "E" EG		
1.67.40.21.07.129	PLACA PARA TÍBIA RÍGIDA DISTAL		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 /4,0

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

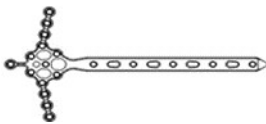
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
	ANTEROLATERAL DIREITA 7 FUROS		Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.40.21.08.158	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL ANTEROLATERAL DIREITA 8 FUROS		
1.67.40.21.09.187	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL ANTEROLATERAL DIREITA 9 FUROS		
35.4004.001	PLACA FR TÍBIA ANTERO LATERAL "D" XG		
35.4003.001	PLACA FR TÍBIA ANTERO LATERAL "D" SG		
1.67.40.20.07.129	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL ANTEROLATERAL ESQUERDA 7 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.40.20.08.158	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL ANTEROLATERAL ESQUERDA 8 FUROS		
1.67.40.20.09.187	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL ANTEROLATERAL ESQUERDA 9 FUROS		
35.4004.002	PLACA FR TÍBIA ANTERO LATERAL "E" XG		
35.4003.002	PLACA FR TÍBIA ANTERO LATERAL "E" SG		
1.67.35.29.18.162	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL 18 FUROS SISTEMA 3.5 / 4.0		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 4.0 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 3,5 / 4,0
1.67.35.29.19.191	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL 19 FUROS SISTEMA 3.5 / 4.0		
1.67.35.29.20.220	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA PARA TÍBIA DISTAL 20 FUROS SISTEMA 3.5 / 4.0		
1.67.35.07.09.088	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL DIREITA PARA FÍBULA 9 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5
1.67.35.07.10.112	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL DIREITA PARA FÍBULA 10 FUROS		
1.67.35.07.11.136	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL DIREITA PARA FÍBULA 11 FUROS		
1.67.35.07.12.160	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL DIREITA PARA FÍBULA 12 FUROS		
1.67.35.07.13.184	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL DIREITA PARA FÍBULA 13 FUROS		
1.67.35.06.09.088	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL ESQUERDA PARA FÍBULA 9 FUROS		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5
1.67.35.06.10.112	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL ESQUERDA PARA FÍBULA 10 FUROS		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

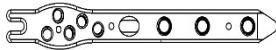
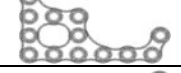
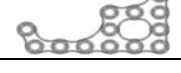
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.35.06.11.136	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL ESQUERDA PARA FÍBULA 11 FUROS		
1.67.35.06.12.160	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL ESQUERDA PARA FÍBULA 12 FUROS		
1.67.35.06.13.184	PLACA FIXAÇÃO RÍGIDA MALÉOLO LATERAL ESQUERDA PARA FÍBULA 13 FUROS		
35.0401.000	PLACA FR FÍBULA DISTAL P		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 3.5 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8 / 3,5
35.0402.000	PLACA FR FÍBULA DISTAL M		
35.0403.000	PLACA FR FÍBULA DISTAL G		
35.0404.000	PLACA FR FÍBULA DISTAL EG		
35.0405.000	PLACA FR FÍBULA DISTAL SG		
1.67.32.68.12.061	PLACA PARA CALCÂNEO DIREITA 12 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.69.12.061	PLACA PARA CALCÂNEO ESQUERDO 12 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.68.13.055	PLACA PARA CALCÂNEO DIREITO 13 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.69.13.055	PLACA PARA CALCÂNEO ESQUERDO 13 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.48.04.100	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 1.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.48.04.200	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 2.0 MM		
1.67.32.48.04.300	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 3.0 MM		
1.67.32.48.04.400	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 4.0 MM		
1.67.32.48.04.500	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 5.0 MM		
1.67.32.48.04.600	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 6.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.49.04.100	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 1.0 MM		
1.67.32.49.04.200	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 2.0 MM		
1.67.32.49.04.300	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 3.0 MM		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

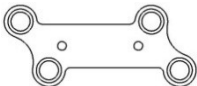
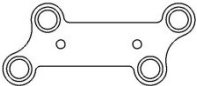
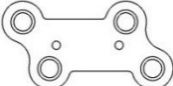
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.32.49.04.400	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 4.0 MM		
1.67.32.49.04.500	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 5.0 MM		
1.67.32.49.04.600	PLACA P/ OSTEOTOMIA DOS PÉS 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 6.0 MM		
1.67.32.05.04.202	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 2.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.05.04.204	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 4.0 MM		
1.67.32.05.04.246	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 6.0 MM		
1.67.32.05.04.248	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 8.0 MM		
1.67.32.06.04.202	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 2.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.06.04.204	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 4.0 MM		
1.67.32.06.04.246	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 6.0 MM		
1.67.32.06.04.248	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO DO RETROPÉ 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 8.0 MM		
1.67.32.88.08.022	PLACA CUBOIDE DIREITA 8 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.89.08.022	PLACA CUBOIDE ESQUERDA 8 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.05.04.012	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 12 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.05.04.016	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 16 MM		
1.67.32.05.04.018	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 18 MM		
1.67.32.05.04.020	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 20 MM		

TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

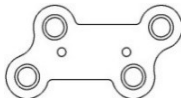
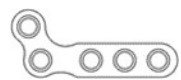
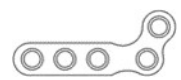
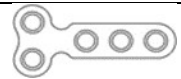
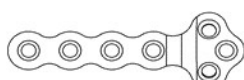
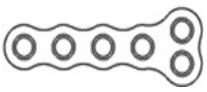
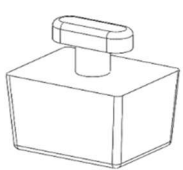
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.32.05.04.030	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA DIREITA 30 MM		
1.67.32.06.04.012	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 12 MM		
1.67.32.06.04.016	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 16 MM		
1.67.32.06.04.018	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 18 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.06.04.020	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 20 MM		
1.67.32.06.04.030	PLACA TARSAL 4 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA ESQUERDA 30 MM		
1.67.32.66.05.032	PLACA "L" COM RAIO P/ REGIÃO DOS PÉS DIREITA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.67.05.032	PLACA "L" COM RAIO P/ REGIÃO DOS PÉS ESQUERDA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.66.05.034	PLACA "L" COM RAIO P/ REGIÃO DOS PÉS DIREITA OBLÍQUA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.67.05.034	PLACA "L" COM RAIO P/ REGIÃO DOS PÉS ESQUERDA OBLÍQUA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.85.05.325	PLACA "T" PARA METATARSO COM RAIO 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
28.4507.003	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 7 F 3.0 MM		
28.4507.005	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 7 F 5.0 MM		
28.4507.006	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 7 F 6.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
28.4507.007	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 7 F 7.0 MM		
28.4507.008	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 7 F 8.0 MM		
28.1207.473	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "D" 7 F 3.0 MM		
28.1207.475	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "D" 7 F 5.0 MM		
28.1207.476	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "D" 7 F 6.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
28.1207.477	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "D" 7 F 7.0 MM		

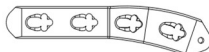
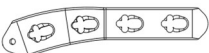
TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

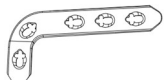
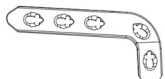
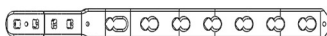
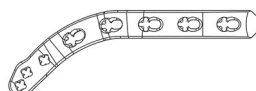
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
28.1207.478	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "D" 7 F 8.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
28.1107.473	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "E" 7 F 3.0 MM		
28.1107.475	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "E" 7 F 5.0 MM		
28.1107.476	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "E" 7 F 6.0 MM		
28.1107.477	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "E" 7 F 7.0 MM		
28.1107.478	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 120° "D" 7 F 8.0 MM		
28.1207.513	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "D" 7 F 3.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
28.1207.515	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "D" 7 F 5.0 MM		
28.1207.516	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "D" 7 F 6.0 MM		
28.1207.517	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "D" 7 F 7.0 MM		
28.1207.518	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "D" 7 F 8.0 MM		
28.1107.513	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "E" 7 F 3.0 MM		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
28.1107.515	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "E" 7 F 5.0 MM		
28.1107.516	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "E" 7 F 6.0 MM		
28.1107.517	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "E" 7 F 7.0 MM		
28.1107.518	PLACA FR OSTEOTOMIA 1º METATARSO 140° "E" 7 F 8.0 MM		
1.67.32.96.06.051	PLACA FALANGE DIREITA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.97.06.051	PLACA FALANGE ESQUERDA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.96.05.041	PLACA FALANGE DIREITA MENOR 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8

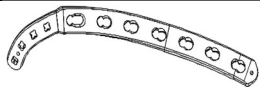
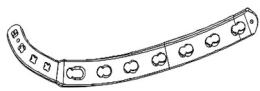
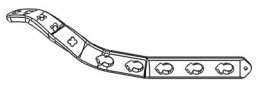
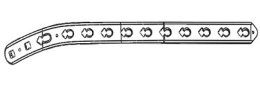
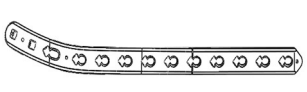
TABELA DE COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

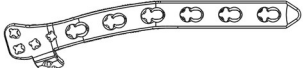
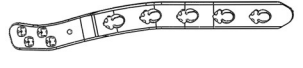
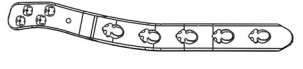
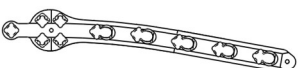
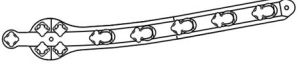
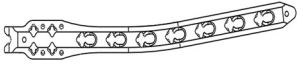
Código das placas	Descrição	Imagem	Parafusos Compatíveis
1.67.32.97.05.041	PLACA FALANGE E METATARSO ESQUERDA MENOR 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.85.05.032	PLACA "T" PARA METATARSO FIXAÇÃO RÍGIDA 5 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.85.06.040	PLACA "T" PARA METATARSO FIXAÇÃO RÍGIDA 6 FUROS		
1.67.32.85.07.048	PLACA "T" PARA METATARSO FIXAÇÃO RÍGIDA 7 FUROS		
1.67.32.98.06.045	PLACA METATARSO DIREITA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
1.67.32.99.06.045	PLACA METATARSO ESQUERDA 5 FUROS FIXAÇÃO RÍGIDA		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Estrela Parafuso Ø 2.8 Fixação Rígida Sextavado Bloqueador Ø 2,8
35.0009.005	CONJUNTO CALÇO 9.0 X 5.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		Compatível com placas de osteotomia de tíbia
35.0009.007	CONJUNTO CALÇO 9.0 X 7.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0009.009	CONJUNTO CALÇO 9.0 X 9.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0009.011	CONJUNTO CALÇO 9.0 X 11 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0009.013	CONJUNTO CALÇO 9.0 X 13 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0009.015	CONJUNTO CALÇO 9.0 X 15 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0014.005	CONJUNTO CALÇO 14 X 5.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0014.007	CONJUNTO CALÇO 14 X 7.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0014.009	CONJUNTO CALÇO 14 X 9.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0014.011	CONJUNTO CALÇO 14 X 11.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0014.013	CONJUNTO CALÇO 14 X 13.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.0014.015	CONJUNTO CALÇO 14 X 15.0 MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA		
35.1104.001	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA FV – "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.1106.001	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA FV – "M"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela

35.1108.001	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “G”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.1104.002	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.1106.002	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “M”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela
35.1108.002	PLACA DE TERÇO MÉDIO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “G”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.1132.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.1142.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela
35.1143.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “G”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.1144.000	PLACA LATERAL ANTERIOR DA CLAVÍCULA FV – “EG”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.1162.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.1163.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela
35.1164.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “G”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.1165.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “EG”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.1166.001	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “SG”		
35.1162.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.1163.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela
35.1164.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “G”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.1165.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “EG”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.1166.002	PLACA DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “SG”		
35.7263.001	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.7264.001	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.7265.001	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA DIREITA FV – “G”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.7263.002	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.7264.002	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.7265.002	PLACA MEDIO DISTAL DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV – “G”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2612.001	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.2615.001	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA DIREITA FV - "M"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.2618.001	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA DIREITA FV - "G"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2612.002	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.2615.002	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV - "M"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.2618.002	PLACA GANCHO DA CLAVÍCULA ESQUERDA FV - "G"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela

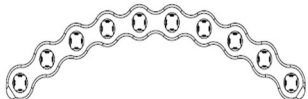
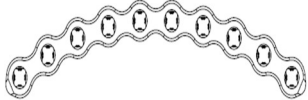
			Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
28.1231.001	PLACA CFVIDADE GLENODIAL DA ESCÁPULA DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.1231.002	PLACA CFVIDADE GLENODIAL DA ESCÁPULA ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.1235.001	PLACA ACROMIO DA ESCÁPULA DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.1235.002	PLACA ACROMIO DA ESCÁPULA ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
35.1241.001	PLACA COLUNA DA ESCÁPULA DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.1241.002	PLACA COLUNA DA ESCÁPULA ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
28.5604.001	PLACA ESPINHA DA ESCÁPULA DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.5604.002	PLACA ESPINHA DA ESCÁPULA ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2,8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
35.5568.001	PLACA MARGEM LATERAL DA ESCÁPULA DIREITA 8 FUROS FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5568.002	PLACA MARGEM LATERAL DA ESCÁPULA ESQUERDA 8 FUROS FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3,5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador AV 3,5

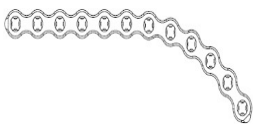
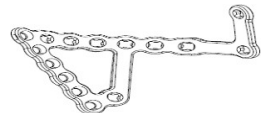
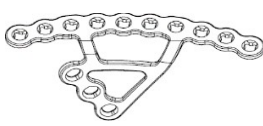
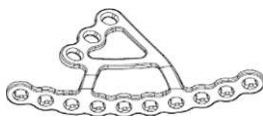
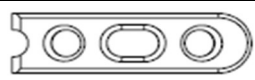
35.5570.001	PLACA MARGEM LATERAL DA ESCÁPULA DIREITA 6 FUROS FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5570.002	PLACA MARGEM LATERAL DA ESCÁPULA ESQUERDA 6 FUROS FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.6105.001	PLACA DA FOSSA INFRAESPINHAL DA ESCÁPULA DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.6105.002	PLACA DA FOSSA INFRAESPINHAL DA ESCÁPULA ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.2002.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
35.2004.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “M”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela
35.2006.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “G”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado
35.2008.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “EG”		Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela
35.2010.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “SG”		Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado
35.2012.000	PLACA PROXIMAL DO ÚMERO FV – “ESG”		Bloqueador 3,5 AV
35.2142.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.2143.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela
35.2144.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “G”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.2145.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “EG”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela
35.2146.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV - “SG”		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado
35.2147.000	PLACA MEDIAL DISTAL DO ÚMERO FV – “ESG”		Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2001.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.2002.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "M"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela
35.2003.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "G"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.2004.001	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "EG"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2001.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.2002.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "M"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela
35.2003.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "G"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado
35.2004.002	PLACA POSTEROMEDIAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "EG"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2243.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5

35.2244.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2245.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “G”		
35.2246.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “EG”		
35.2247.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “SG”		
35.2248.001	PLACA LATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “ESG”		
35.2243.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2244.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “M”		
35.2245.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “G”		
35.2246.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “EG”		
35.2247.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “SG”		
35.2248.002	PLACA LATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV- “ESG”		
35.3001.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.3002.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "M"		
35.3003.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - "G"		
35.3001.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.3002.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "M"		
35.3003.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV - "G"		
35.2305.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV - 'P'		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.2307.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “M”		
35.2309.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “G”		
35.2311.001	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO FV – “EG”		
35.2305.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.2307.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “M”		
35.2309.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “G”		
35.2311.002	PLACA EXTRA-ARTICULAR POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO FV – “EG”		
35.2701.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5

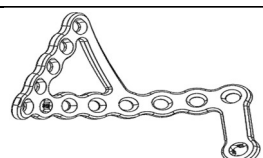
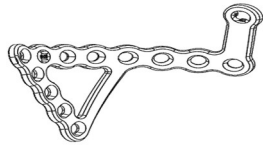
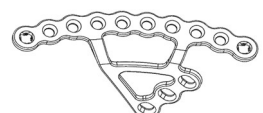
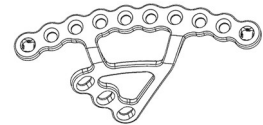
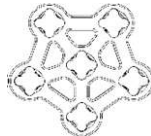
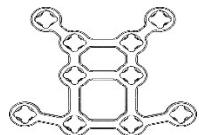
35.2702.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "M"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2703.001	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL DIREITA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "G"		
35.2701.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.2702.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "M"		
35.2703.002	PLACA POSTEROLATERAL DISTAL ESQUERDA DO ÚMERO COM SUPORTE FV - "G"		
35.3101.001	PLACA POSTEROLATERAL DIREITA DO UMERO FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.3102.001	PLACA POSTEROLATERAL DIREITA DO UMERO FV - "M"		
35.3103.001	PLACA POSTEROLATERAL DIREITA DO UMERO FV - "G"		
35.3101.002	PLACA POSTEROLATERAL ESQUERDA DO UMERO FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.3102.002	PLACA POSTEROLATERAL ESQUERDA DO UMERO FV - "M"		
35.3103.002	PLACA POSTEROLATERAL ESQUERDA DO UMERO FV - "G"		
35.4101.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.4102.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "M"		
35.4103.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "G"		
35.4104.001	PLACA OLÉCRANO DIREITA FV – "EG"		
35.4101.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.4102.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – "M"		
35.4103.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – "G"		
35.4104.002	PLACA OLÉCRANO ESQUERDA FV – "EG"		
35.4301.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.4302.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – "M"		
35.4303.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – "G"		
35.4304.001	PLACA GANCHO OLÉCRANO DIREITA FV – "EG"		
35.4301.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.4302.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – "M"		
35.4303.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – "G"		
35.4304.002	PLACA GANCHO OLÉCRANO ESQUERDA FV – "EG"		

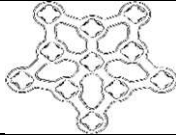
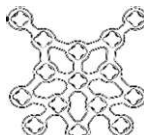
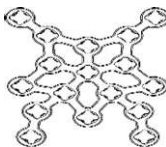
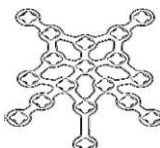
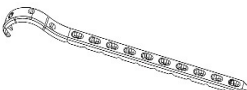
28.0401.001	PLACA CORONÓIDE DIREITA FV – 6 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.0401.002	PLACA CORONÓIDE ESQUERDA FV – 6 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.0501.001	PLACA CORONÓIDE DIREITA FV - 8 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.0501.002	PLACA CORONÓIDE ESQUERDA FV - 8 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
35.5064.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.5065.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.5066.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “G”		
35.5067.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “EG”		
35.5068.000	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO RETA FV – “SG”		
35.5064.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.5065.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.5066.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “G”		
35.5067.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “EG”		
35.5068.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO DIREITA FV – “SG”		
35.5064.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.5065.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.5066.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “G”		
35.5067.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “EG”		
35.5068.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO ESQUERDA FV – “SG”		
35.5254.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.5255.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.5256.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “G”		
35.5257.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “EG”		
35.5258.001	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA DIREITA FV – “SG”		
35.5254.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.5255.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.5256.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “G”		

35.5257.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “EG”		
35.5258.002	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO CURTA ESQUERDA FV – “SG”		
35.7003.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 03 F FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7004.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 04 F FV		
35.7005.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 05 F FV		
35.7006.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FV		
35.7007.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 07 F FV		
35.7008.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FV		
35.7009.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 09 F FV		
35.7010.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FV		
35.7011.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 11 F FV		
35.7012.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FV		
35.7013.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 13 F FV		
35.7014.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FV		
35.7015.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 15 F FV		
35.7016.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FV		
35.7018.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 18 F FV		
35.7020.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 20 F FV		
35.7022.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 22 F FV		
35.7024.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 24 F FV		
35.4206.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4208.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FV		
35.4210.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FV		
35.4212.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FV		
35.4214.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FV		
35.4216.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FV		
35.4206.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4208.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FV		
35.4210.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FV		
35.4212.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FV		
35.4214.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FV		
35.4216.004	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FV		

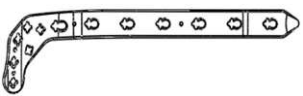
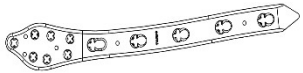
35.4210.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4212.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F DIREITA FV		
35.4214.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F DIREITA FV		
35.4216.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F DIREITA FV		
35.4210.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4212.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F ESQUERDA FV		
35.4214.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F ESQUERDA FV		
35.4216.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F ESQUERDA FV		
35.4204.005	PLACA SÍNFESE PÚBLICA 04 F FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4206.005	PLACA SÍNFESE PÚBLICA 06 F FV		
35.4205.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4206.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" DIREITA FV		
35.4207.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" DIREITA FV		
35.4205.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4206.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" ESQUERDA FV		
35.4207.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" ESQUERDA FV		
35.7179.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA DIREITA P FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7198.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA DIREITA M FV		
35.7112.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA DIREITA G FV		
35.7179.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA ESQUERDA P FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7198.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA ESQUERDA M FV		
35.7112.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA ESQUERDA G FV		
35.7105.004	PLACA MOLA "M"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 AV
35.7105.005	PLACA MOLA "G"		
35.7303.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 03 F FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7304.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 04 F FVP		
35.7305.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 05 F FVP		
35.7306.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FVP		
35.7307.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 07 F FVP		
35.7308.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FVP		

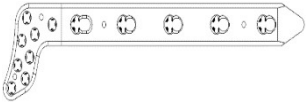
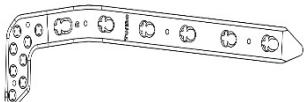
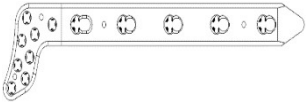
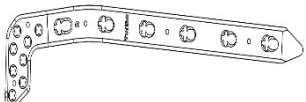
35.7309.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 09 F FVP		
35.7310.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FVP		
35.7311.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 11 F FVP		
35.7312.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FVP		
35.7313.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 13 F FVP		
35.7314.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FVP		
35.7315.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 15 F FVP		
35.7316.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FVP		
35.7318.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 18 F FVP		
35.7320.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 20 F FVP		
35.7322.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 22 F FVP		
35.7324.000	PLACA RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 24 F FVP		
35.7406.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7408.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FVP		
35.7410.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FVP		
35.7412.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FVP		
35.7414.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FVP		
35.7416.003	PLACA CURVA R88 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7506.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 06 F FVP		
35.7508.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 08 F FVP		
35.7510.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F FVP		
35.7512.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F FVP		
35.7514.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F FVP		
35.7516.003	PLACA CURVA R108 RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F FVP		
35.7610.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F DIREITA FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5

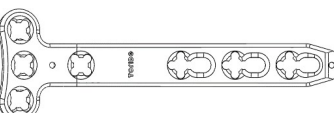
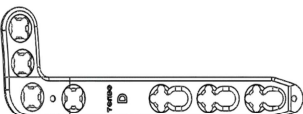
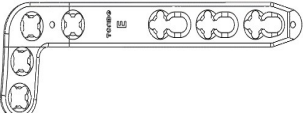
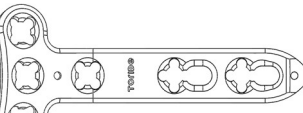
35.7612.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F DIREITA FVP		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7614.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F DIREITA FVP		
35.7616.001	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F DIREITA FVP		
35.7610.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 10 F ESQUERDA FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7612.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 12 F ESQUERDA FVP		
35.7614.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 14 F ESQUERDA FVP		
35.7616.002	PLACA CURVA J RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 16 F ESQUERDA FVP		
35.7704.003	PLACA SÍNSEFE PÚBLICA 04 F FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7706.003	PLACA SÍNSEFE PÚBLICA 06 F FVP		
35.7801.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" DIREITA FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7802.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" DIREITA FVP		
35.7803.001	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" DIREITA FVP		
35.7801.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "P" ESQUERDA FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7802.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "M" ESQUERDA FVP		
35.7803.002	PLACA QUADRILATERAL INFRAPECTÍNEA "G" ESQUERDA FVP		
35.7901.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "P" DIREITA FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7902.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "M" DIREITA FVP		
35.7903.001	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "G" DIREITA FVP		
35.7901.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "P" ESQUERDA FVP		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.7902.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "M" ESQUERDA FVP		
35.7903.002	PLACA QUADRILATERAL SUPRAPECTÍNEA "G" ESQUERDA FVP		
28.3021.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA PEQUENA 6 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3022.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA MÉDIA 6 FUROS		
28.3028.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA GRANDE 6 FUROS		
28.3101.000	PLACA FV MARGINAL DE PATELA PEQUENA 10 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3102.000	PLACA FV MARGINAL DE PATELA MÉDIA 10 FUROS		
28.3103.000	PLACA FV MARGINAL DE PATELA GRANDE 10 FUROS		
28.3201.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA PEQUENA 11 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado.

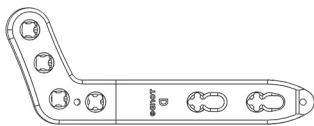
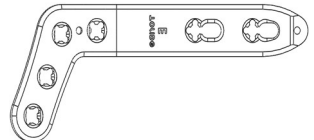
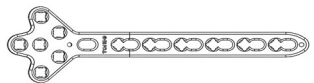
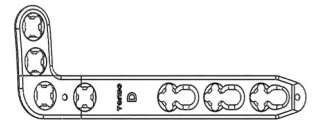
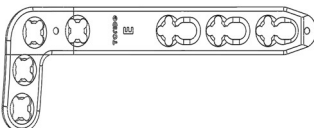
28.3202.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA MÉDIA 11 FUROS		Bloqueador 2,8 AV
28.3203.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA GRANDE 11 FUROS		
28.3401.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO PEQUENA 15 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3402.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO MÉDIA 15 FUROS		
28.3403.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO GRANDE 15 FUROS		
28.3501.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO PEQUENA 17 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3502.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO MÉDIA 17 FUROS		
28.3503.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA COM EXTENSÃO GRANDE 17 FUROS		
28.3118.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA PEQUENA COM EXTENSÃO 18 FUROS		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3119.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA MÉDIA COM EXTENSÃO 18 FUROS		
28.3120.000	PLACA FV ANTERIOR DE PATELA GRANDE COM EXTENSÃO 18 FUROS		
45.5020.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5021.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “M”		Registro Ancilar:800844200013: Parafuso de Bloqueio Canulado Ø 6.5
45.5022.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “G”		Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV
45.5023.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “EG”		Parafuso Conector Periprotetica de Fio Placa Abraçadeira Periprotética 8 Furos Placa Abraçadeira Periprotética 4 Furos
45.5038.000	PLACA 'GANCHO' PERIPROTÉTICA PROXIMAL DE FÊMUR FV – “SG”		
45.5024.000	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5025.000	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR FV – “M”		Registro Ancilar:800844200013: Parafuso de Bloqueio Canulado Ø 6.5 Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV Parafuso Conector Periprotetica de Fio Placa Abraçadeira Periprotética 8 Furos Placa Abraçadeira Periprotética 4 Furos
45.5026.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5027.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “M”		Registro Ancilar:800844200013: Parafuso de Bloqueio Canulado Ø 6.5
45.5029.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “G”		Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado

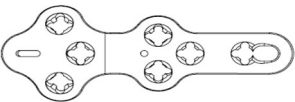
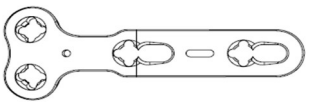
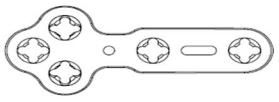
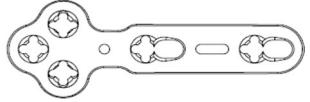
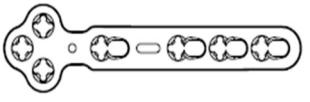
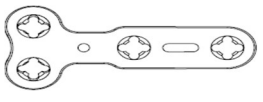
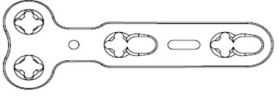
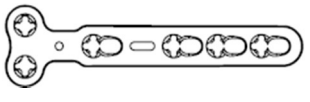
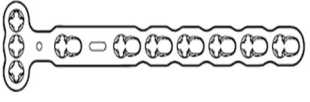
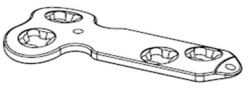
45.5037.001	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR DIREITA FV – “EG”		Bloqueador 4,5 AV Parafuso Conector Periprotetica de Fio Placa Abraçadeira Periprotética 8 Furos Placa Abraçadeira Periprotética 4 Furos
45.5026.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5027.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “M”		Registro Ancilar:800844200013: Parafuso de Bloqueio Canulado Ø 6.5
45.5029.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “G”		Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV Parafuso Conector Periprotetica de Fio Placa Abraçadeira Periprotética 8 Furos Placa Abraçadeira Periprotética 4 Furos
45.5037.002	PLACA PROXIMAL PERIPROTÉTICA DE FÊMUR ESQUERDA FV – “EG”		
45.5109.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5111.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “M”		
45.5113.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “G”		Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV Parafuso Conector Periprotetica de Fio Placa Abraçadeira Periprotética 8 Furos Placa Abraçadeira Periprotética 4 Furos
45.5115.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “EG”		
45.5117.001	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR DIREITA FV – “SG”		
45.5109.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5
45.5111.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “M”		
45.5113.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “G”		Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV Parafuso Conector Periprotetica de Fio Placa Abraçadeira Periprotética 8 Furos Placa Abraçadeira Periprotética 4 Furos
45.5115.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “EG”		
45.5117.002	PLACA DISTAL LATERAL DE FÊMUR ESQUERDA FV – “SG”		
35.3004.003	PLACA ABRAÇADEIRA PERIPROTÉTICA 4 FUROS		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV Parafuso Conector da Abraçadeira
35.3008.003	PLACA ABRAÇADEIRA PERIPROTÉTICA 8 FUROS		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV Parafuso Conector da Abraçadeira
35.4601.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
35.4602.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "M"		
35.4603.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "G"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 / 4,0 AV
35.4604.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "EG"		
35.4605.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL DIREITA FV - "SG"		
35.4601.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
35.4602.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "M"		
35.4603.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "G"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 / 4,0 AV
35.4604.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "EG"		
35.4605.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA LATERAL ESQUERDA FV - "SG"		

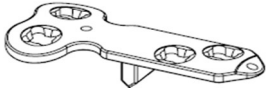
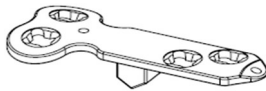
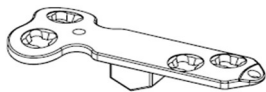
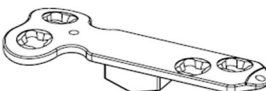
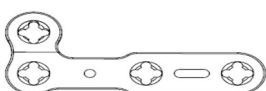
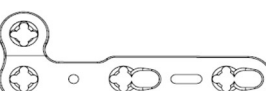
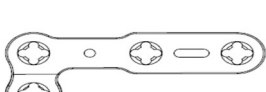
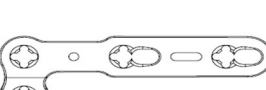
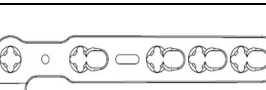
35.4701.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4702.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "M"		
35.4703.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "G"		
35.4704.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "EG"		
35.4705.001	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL DIREITA FV - "SG"		
35.4701.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4702.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "M"		
35.4703.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "G"		
35.4704.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "EG"		
35.4705.002	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA MEDIAL ESQUERDA FV - "SG"		
35.4401.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4402.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "M"		
35.4403.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "G"		
35.4404.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "EG"		
35.4405.001	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA DIREITA FV - "SG"		
35.4401.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4402.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "M"		
35.4403.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "G"		
35.4404.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "EG"		
35.4405.002	PLACA DISTAL MEDIAL DE TÍBIA ESQUERDA FV - "SG"		
35.4510.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4511.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "M"		
35.4512.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "G"		
35.4514.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "EG"		
35.4516.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL DIREITA FV - "SG"		
35.4510.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4511.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "M"		
35.4512.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "G"		
35.4514.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "EG"		
35.4516.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA MALÉOLO MEDIAL ESQUERDA FV - "SG"		
35.1010.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
35.1011.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "M"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado

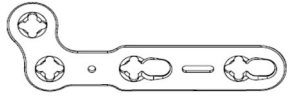
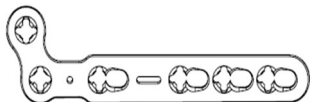
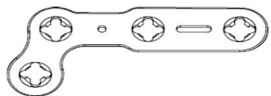
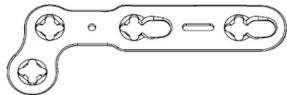
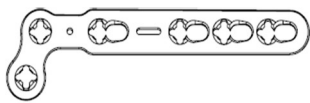
35.1012.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "G"		Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.1013.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "EG"		
35.1017.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA FV - "SG"		
35.1010.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
35.1011.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "M"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.1012.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "G"		
35.1013.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "EG"		
35.1017.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV - "SG"		
35.4801.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
35.4802.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "M"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4803.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "G"		
35.4804.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "EG"		
35.4805.001	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM DIREITA FV - "SG"		
35.4801.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0
35.4802.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "M"		Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.4803.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "G"		
35.4804.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "EG"		
35.4805.002	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL 3,5 MM ESQUERDA FV - "SG"		
35.1309.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5
35.1310.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "M"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.1311.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "G"		
35.1312.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "EG"		
35.1313.001	PLACA FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "SG"		
35.1309.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5

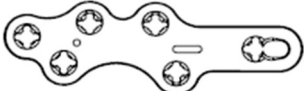
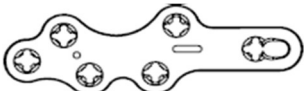
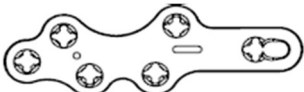
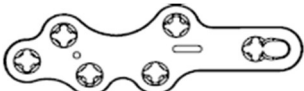
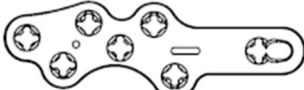
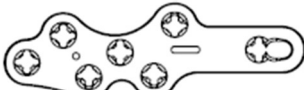
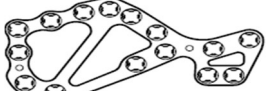
35.1310.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – "M"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.1311.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – "G"		
35.1312.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – "EG"		
35.1313.002	PLACA FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV – "SG"		
35.4069.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.4084.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "M"		
35.4099.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "G"		
35.4114.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "EG"		
35.4129.001	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL DIREITA FV - "SG"		
35.4069.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 / 3,5 AV
35.4084.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "M"		
35.4099.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "G"		
35.4114.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "EG"		
35.4129.002	PLACA GANCHO FÍBULA DISTAL ESQUERDA FV - "SG"		
35.5201.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5202.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "M"		
35.5203.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "G"		
35.5204.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "EG"		
35.5205.000	PLACA T PEQUENOS FRAGMENTOS FV "SG"		
35.5301.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5302.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "M"		
35.5303.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "G"		
35.5304.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "EG"		
35.5305.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS DIREITA FV "SG"		
35.5301.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5302.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "M"		
35.5303.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "G"		
35.5304.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "EG"		
35.5305.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS ESQUERDA FV "SG"		
45.5201.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV
45.5202.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "M"		
45.5203.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "G"		
45.5204.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "EG"		

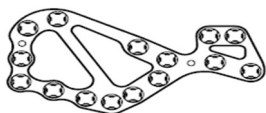
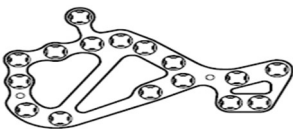
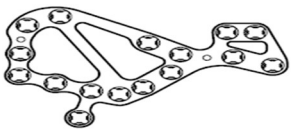
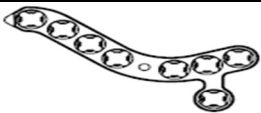
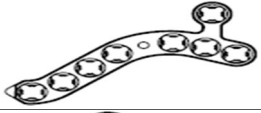
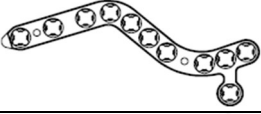
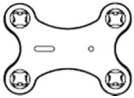
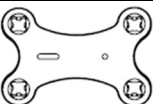
45.5205.000	PLACA T GRANDES FRAGMENTOS FV "SG"		
35.5401.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5402.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "M"		
35.5403.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "G"		
35.5404.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "EG"		
35.5405.001	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA DIREITA FV "SG"		
35.5401.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5402.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "M"		
35.5403.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "G"		
35.5404.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "EG"		
35.5405.002	PLACA L PEQUENOS FRAGMENTOS OBLÍQUA ESQUERDA FV "SG"		
35.5601.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 3,5 / 4,0 Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 3.5 Ângulo Variável Sextavado Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.0 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 3,5 AV
35.5602.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "M"		
35.5603.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "G"		
35.5604.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "EG"		
35.5605.000	PLACA TREVO PEQUENOS FRAGMENTOS FV - "SG"		
45.5601.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV
45.5602.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "M"		
45.5603.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "G"		
45.5604.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "EG"		
45.5605.000	PLACA TREVO GRANDES FRAGMENTOS FV - "SG"		
45.5301.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV
45.5302.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "M"		
45.5303.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "G"		
45.5304.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "EG"		
45.5305.001	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS DIREITA FV "SG"		
45.5301.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 4,5 Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 4.5 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 4,5 AV
45.5302.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "M"		
45.5303.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "G"		
45.5304.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "EG"		
45.5305.002	PLACA L GRANDES FRAGMENTOS ESQUERDA FV "SG"		

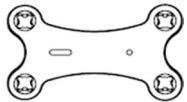
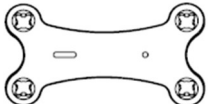
28.4401.003	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO TARSO E METATARSO FV - "P"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4402.003	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO TARSO E METATARSO FV - "M"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4501.003	PLACA DE FUSÃO TARSO METATARSO FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4601.003	PLACA DE FUSÃO TREVO FV - "P"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4602.003	PLACA DE FUSÃO TREVO FV - "M"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4603.003	PLACA DE FUSÃO TREVO FV - "G"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado Bloqueador 2,8 AV
28.4701.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "P"		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4702.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "M"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4703.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "G"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4704.003	PLACA DE FUSÃO T FV - "EG"		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4801.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8

28.4802.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 2MM		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4803.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 4MM		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4804.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 6MM		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4805.003	PLACA DE ALONGAMENTO E FUSÃO FV 8MM		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4901.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA FV – “P”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4902.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8
28.4903.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA FV – “G”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4901.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA FV – “P”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4902.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4903.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA FV – “G”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5001.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA OBLÍQUA FV – “P”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV

28.5002.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA OBLÍQUA FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5003.001	PLACA DE FUSÃO L DIREITA OBLÍQUA FV – “G”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5001.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA OBLÍQUA FV – “P”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5002.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA OBLÍQUA FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5003.002	PLACA DE FUSÃO L ESQUERDA OBLÍQUA FV – “G”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5101.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 0° FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5102.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 5° FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5103.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 10° FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5101.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 0° FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5102.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 5° FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5103.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 10° FV – “P”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV

28.5201.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 0° FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5202.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 5° FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5203.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 10° FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5201.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 0° FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5202.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 5° FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5203.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 10° FV – “M”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5301.001	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE DIREITA 5° FV – “G”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5301.002	PLACA FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE ESQUERDA 5° FV – “G”		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5401.001	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE REVISÃO DIREITA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.5401.002	PLACA DE FUSÃO PRIMEIRO METATARSO E FALANGE REVISÃO ESQUERDA FV		Registro Ancilar:80084420014: Parafuso cortical Ø 2,8 Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3601.001	PLACA CALCÂNEA DIREITA FV		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV

28.3601.002	PLACA CALCÂNEA ESQUERDA FV		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3701.001	PLACA CALCÂNEA DIREITA FV COM SUPORTE		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3701.002	PLACA CALCÂNEA ESQUERDA FV COM SUPORTE		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3801.001	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL DIREITA FV COM SUPORTE CURTA		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3801.002	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV COM SUPORTE CURTA		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3901.001	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL DIREITA FV COM SUPORTE LONGA		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.3901.002	PLACA CALCÂNEA ANTEROLATERAL ESQUERDA FV COM SUPORTE LONGA		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4001.001	PLACA CUBOIDE DIREITA FV		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4001.002	PLACA CUBOIDE ESQUERDA FV		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4101.003	PLACA DE FUSÃO FV 27mm		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4201.003	PLACA DE FUSÃO FV 40mm		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4301.003	PLACA FUSÃO X FV – “P”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4302.003	PLACA FUSÃO X FV – “M”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV

28.4303.003	PLACA FUSÃO X FV – “G”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4304.003	PLACA FUSÃO X FV – “EG”		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV
28.4305.003	PLACA NAVICULAR FV		Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Estrela Parafuso Ø 2.8 Ângulo Variável Sextavado. Bloqueador 2,8 AV

2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o dispositivo médico, segundo indicado pelo fabricante.

A finalidade do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS é promover a restauração de fraturas na região da clavícula, escápula, úmero proximal, úmero distal, radio distal, olecrano, artrodese de punho, pelve, fêmur proximal, fêmur distal, osteotomia fêmur, patela, tibia proximal, osteotomia tibia, tibia distal, fíbula distal, pé (ante pé, médio pé, retro pé). A utilização do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS é indicada para casos clínicos onde haja a necessidade de correção, restauração e estabilização de fragmentos ósseos com o objetivo de recuperar o funcionamento esperado deste segmento através da realização de osteossíntese.

Indicação - Clavícula

- Fraturas com desvio maior que 2 cm;
- Fraturas com encurtamento maior que 2 cm;
- Fraturas com 3 ou mais fragmentos;
- Fraturas segmentares;
- Fraturas expostas;
- Fraturas com iminência de exposição;
- Deformidade clínica óbvia;
- Ombro flutuante;
- Fraturas bilaterais;
- Fratura associada com lesão neurovascular;
- Fratura associada a outra fratura ipsilateral;

- Fratura associada a múltiplas fraturas de costelas;
- Pacientes politraumatizados;

Indicação – Escápula

- Fratura da glenoide com diastase ou degrau maior que 3 mm;
- Envolvimento articular maior que 20%;
- Translação dos fragmentos da borda lateral maior que 100%;
- Desvio mediolateral maior que 2 cm;
- Ângulo glenopolar menor que 20º ou maior que 60º;

Indicação – Proximal do úmero

- Fratura-luxação;
- Fratura com depressão maior que 20% da superfície articular;
- Fratura split da cabeça do úmero;
- Fraturas instáveis do colo cirúrgico;
- Fraturas das tuberosidades com desvio maior que 1 cm;
- Desvio grave em varo ou valgo;
- Fratura exposta;
- Fratura associada com lesão do complexo suspensório superior;
- Associação com lesão vascular;
- Fratura com desvio em jovem ativo;

Indicação – Distal do úmero

- Fraturas extra-articulares desviadas e instáveis;
- Fraturas articulares parciais ou totais com desvio;
- Fraturas no plano coronal com desvio;

Indicação – Olécrano

- Fraturas do olécrano simples ou complexas com desvio;
- Associação com instabilidade do cotovelo;
- Fixação de osteotomia do olecrano para via de acesso;

Indicação – Distal do rádio

- Degrau articular maior que 2 mm;
- Tilt dorsal maior que 10º ;
- Encurtamento radial maior que 3 mm;
- Fraturas instáveis;
- Pacientes jovens;
- Necessidade de recuperação acelerada;
- Fratura exposta;
- Síndrome do túnel do carpo agudo;
- Associação com síndrome compartimental;
- Falha do tratamento conservador;

Indicação – Artrodese de punho

- Grave degeneração articular (osteoartrite) primária ou secundária;
- Dor crônica no punho;
- Instabilidade carpal crônica;
- Deformidade por condição congênita, trauma ou doenças;
- Necrose avascular de osso do carpo;
- Osteomielite crônica;
- Condições neurológicas que provoquem desbalanço do punho;

Indicação – Pelve e Acetábulo

- Abertura da sínfise maior que 2,5 cm
- Fratura desviada dos ramos
- Sínfise bloqueada
- Fratura dos quatro ramos púbicos
- Necessidade de mobilização precoce
- Lesão completa da sacroilíaca
- Fratura do sacro instável
- Fratura em crescente
- Dissociação espinopélvica
- Fraturas do acetábulo com desvio > 2 mm
- Fratura do acetábulo associada a instabilidade

- Fragmento intra-articular
- Impacção marginal da parede posterior

Indicação – Proximal do fêmur

- Fratura subtrocantéricas;
- Fratura proximal associada à diáfise do fêmur;
- Fratura desviada do trocânter maior;
- Fratura patológica;
- Osteotomias corretivas;

Indicação – Distal do fêmur

- Fraturas da extremidade distal do fêmur extra-articulares;
- Fraturas da extremidade distal do fêmur articular parcial;
- Fraturas da extremidade distal do fêmur intra-articulares simples ou multifragmentada;
- Fraturas patológicas;
- Fraturas periprotética do joelho;

Indicação – Osteotomia do fêmur

- Osteotomia supracondilar do fêmur para correção angular e/ou rotacional;

Indicação – Patela

- Parcial articular e vertical;
- Articular completa e transversal;
- Fraturas simples;
- Fraturas em cunha;
- Complexa, cominutivas;
- Cominutivas com desvio.

Indicação – Proximal da tíbia

- Fratura proximal da tíbia extra-articular;
- Fratura proximal da tíbia articular parcial;
- Fratura proximal da tíbia articular simples ou multifragmentada;
- Fratura periprotética;
- Fratura patológica;

Indicação – Osteotomia tíbia

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Indicação – Distal da tíbia

- Fratura distal da tíbia extra-articular;
- Fratura distal da tíbia articular parcial;
- Fratura distal da tíbia articular simples ou multifragmentada;
- Fratura periprotética;
- Fratura patológica;

Indicação – Distal da fíbula

- Fratura distal da fíbula extra-articular;
- Fratura distal da fíbula articular parcial;
- Fratura distal da fíbula articular simples ou multifragmentada;
- Fratura periprotética;
- Fratura patológica;

Indicação – Antepé – metatarso e falange

- Fratura dos metatarsos;
- Fratura das falanges do pé;

Indicação – Mediopé

- Fratura do navicular Tarsal;
- Fratura do cuboide;
- Fratura das cunhas;

Indicação – Retropé (Calcâneo, Tálus)

- Fratura da tuberosidade do calcâneo;
- Fratura intra-articular simples e complexa do calcâneo;
- Fratura do colo do tálus simples ou complexa;

3. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do dispositivo médico, assim como seu armazenamento e transporte.

OS COMPONENTES DO SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS SÃO DE USO ÚNICO! PROIBIDO REPROCESSAR!

3.1. Precauções e restrições

Em caso de dúvida sobre o material ou técnica de uso contate o fabricante ou o distribuidor mais próximo.

Nenhum material etiquetado ou designado como produto de uso único deve voltar a ser utilizado, reprocessado ou esterilizado novamente, e deverá ser descartado de forma adequada seguindo as orientações do tópico 3.4.10.

Para colocação adequada dos implantes, a Toride recomenda a utilização de instrumentais específicos e exclusivos. Os instrumentais devem ser adquiridos separadamente e NÃO COMPÕEM o produto, pois não integram a forma de apresentação dos implantes - embalagem individual. Os implantes Toride somente devem ser utilizados com o auxílio dos instrumentais da Toride.

Resultados insatisfatórios podem ser observados em caso de:

- Seleção inadequada, o mau posicionamento e a má fixação do produto;
- Intolerância pelo paciente ao material utilizado na fabricação do produto;
- Impossibilidade do paciente em seguir o tratamento de reabilitação prescrito pelo cirurgião.

As placas e parafusos devem ser esterilizados em autoclave antes de sua utilização.

Nunca utilizar uma autoclave que não expurgue todo o ar.

Submeter as Placas e os Parafusos do Sistema de Fixação Rígida de Placas Especiais para Grandes e Pequenos Fragmentos a um processo de secagem ao final da autoclavagem, sempre que este for armazenado para uso posterior.

Fixar as Placas do Sistema de Fixação Rígida de Placas Especiais para Grandes e Pequenos Fragmentos apenas com Parafusos do Sistema de Fixação Rígida de Placas Especiais para Grandes e Pequenos Fragmentos que sejam fabricados pela empresa Tóride, é recomendados que não seja utilizado parafusos de outros fabricantes com placa Toride, ou parafuso Toride com placas de outros fabricantes.

Para facilitar colocação do Parafuso e exercer menos força sobre o mesmo, é necessário que se faça um pré-furo e que neste pré-furo seja passado macho.

Não utilizar o produto se o mesmo estiver danificado.

Produto de uso único, é expressamente proibido o reprocessamento e o reuso deste produto.

Conforme a **Resolução RDC nº 2605 de 11 de agosto de 2006**, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como “Uso Único” são proibidos de serem reprocessados. Uma vez utilizado, qualquer implante metálico deverá ser descartado. Mesmo apresentando estar em perfeito estado, o implante poderá conter fissuras ou defeitos em áreas de tensão interna, podendo levar a ruptura por fadiga.

Para segurança e efetividade no uso dos dispositivos metálicos de fixação interna, o cirurgião deve estar familiarizado com os procedimentos e recomendações para com o implante. Para assegurar a implantação adequada, somente devem ser utilizados instrumentais fabricados pela Tóride Indústria e Comércio Ltda;

Remoção do dispositivo metálico de fixação interna: Apenas o cirurgião poderá decidir sobre a retirada do dispositivo. O cirurgião deve considerar os riscos e benefícios, quando decidir quanto a remoção do dispositivo;

Antes da implantação, verificar a integridade da embalagem e as condições das placas e parafusos quanto a presença de qualquer defeito.

Em caso de dúvida sobre o material ou técnica de uso contate o fabricante ou o distribuidor mais próximo.

Com base nos resultados obtidos através dos dados de revisão de literatura clínica relevante, e em informações de resultados de ensaios realizados em dispositivos equivalentes, considera-se baixo os

riscos de eventos adversos associados ao Sistemas de Fixação Rígida de Placas para Especiais para Pequenos e Grande Fragmentos, devido a interferência por ressonância magnética, e espera-se que o sistema em questão tenha um comportamento semelhante aos verificados, que também são sistemas de fixação rígida de placas especiais para osteossíntese encontrados por meio da plataforma “The List”, os quais tiveram segurança comprovada para campos de 1,5T e/ou 3,0T.

As informações obtidas por meio de revisão de literatura científica e de buscas nas bases de dados “The List” e MAUDE, demonstraram serem baixos os riscos associados ao uso de implantes ortopédicos, incluindo implantes relacionados à Sistema de Fixação Rígida de Placas Especiais para Osteossíntese de liga de titânio de grau cirúrgico, (Ticp – Titânio Puro para Placas, e Ti6Al4V – Titânio Liga para parafuso) em ambiente de ressonância magnética, sobretudo para as intensidades de campo externo mais comumente empregadas nesse tipo de exame de imagem (1,5T e 3,0T). Dessa forma, a chance de eventos adversos relacionados ao uso do produto em um ambiente de ressonância eletromagnética é considerada remota, de maneira que os benefícios proporcionados pelo implante compensam potenciais malefícios.

Considerando que o gerenciamento de risco do produto considera que não há risco inaceitável de que um evento adverso possa ocorrer, e que os riscos envolvidos em ambientes de ressonância magnética para este produto são considerados baixos, a empresa orienta que o paciente não seja exposto a ambientes de ressonância magnética.

3.1.1. Eventuais efeitos adversos

Os efeitos adversos da implantação do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS corresponde aos riscos associados a qualquer tipo de cirurgia bem como a anestesia geral, incluindo, mas não está limitada a:

- Afrouxamento precoce ou tardio de algum ou de todos os componentes;
- Desmontagem, deformação e/ou quebra de algum ou de todos os componentes;
- Reação de corpo estranho a implantes;
- Pressão na pele pelos componentes em pacientes com cobertura de tecido inadequada sobre o implante, possivelmente causando penetração na pele, irritação e/ou dor;

- Danos nos tecidos causados por posicionamento e colocação inadequados de implantes ou instrumentos;
- Formação de cicatriz;
- Interferência com imagens radiográficas, de TC e/ou RM devido à presença dos implantes.
- Complicações incluindo dor, fratura ou problemas de cicatrização de feridas;
- Hemorragia, hematoma, seroma, embolia, edema, acidente vascular cerebral, sangramento excessivo, flebite, necrose da ferida, deiscência da ferida ou danos aos vasos sanguíneos;
- Não união. União retardada. Má união.
- Abscesso;
- Adesão(ões);
- Artrite;
- Assimetria física;
- Consolidação viciosa do osso;
- Danos nos nervos;
- Danos nos tecidos;
- Danos musculares/tendinosos;
- Deformidade/desfiguração;
- Deiscência da ferida;
- Desconforto;
- Dificuldades de deambulação;
- Diminuição da densidade óssea;
- Dispositivo incorporado em tecido ou placa;
- Dor, desconforto, dormência e/ou sensação anormal devido à presença do implante;
- Ferida;
- Fratura óssea não consolidada;
- Fratura(s) óssea(s);
- Hematoma;
- Hemorragia/sangramento;
- Hipersensibilidade/reação alérgica;

- Inchaço/edema;
- Infecção bacteriana;
- Infecção de ferida pós-operatória;
- Inflamação/irritação da pele;
- Lesão tecidual;
- Luxação articular;
- Mobilidade limitada da articulação implantada;
- Necroses ósseas;
- Osseointegração inadequada;
- Ossificação;
- Osteólise;
- Perda de amplitude de movimento (rom – ranger of motion);
- Pseudoartroses;
- Restrição ao crescimento quando implantado em indivíduos com formação óssea imatura;
- Rigidez muscular;
- Sedação;
- Soltura ou migração devido à má fixação no procedimento cirúrgico;

Efeitos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados ao fabricante e à equipe de Tecnovigilância do órgão sanitário competente (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do sítio eletrônico www.anvisa.gov.br) com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Todas as ocorrências notificadas a TORIDE são recebidas pelo Departamento de Tecnovigilância da TORIDE e submetidas à avaliação do Comitê Técnico para investigação. Ao término da investigação, uma carta resposta é elaborada pelo Departamento de Tecnovigilância para informar ao cliente se a reclamação é procedente ou não, e no caso de procedência da reclamação, a carta informa que providências serão tomadas.

Utilizado corretamente não é esperada a ocorrência de efeitos adversos na utilização do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS.

3.1.2. Contra indicação

- Condições físicas que eliminem ou tendem a eliminar o suporte adequado do implante ou retardar a cura, limitações no fornecimento de sangue, insuficiência na qualidade ou quantidade de osso, baixa qualidade de pele, infecções prévias etc.
- Condições mentais ou neurológicas que tendam a substituir as habilidades dos pacientes ou a boa vontade para restringir as atividades durante o período de recuperação, mal de Parkinson, alcoolismo crônico, abuso de drogas, retardo ou enfermidade mental etc.
- Sensibilidade corporal extrema. Quando exista suspeita de hipersensibilidade ao material, antes de determinar a seleção do material implantável deverá realizar provas apropriadas.
- Atrofia de pele ou falta de cobertura tecidual. Em uma profunda atrofia de pele, qualquer dispositivo de fixação interna deverá ser colocado com extremo cuidado, pois o risco de infecções ou problemas de recuperação das feridas é bem maior.
- Infecções ativas pré-existente ou suspeita no local de implantação ou próximo a ele.
- Gravidez.
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física).
- Limitações no fluxo sanguíneo e/ou infecções anteriores que possam tornar a cicatrização lenta e aumentar a possibilidade de infecção e/ou rejeição dos implantes.
- Qualquer processo de doença degenerativa que possa afetar adversamente a colocação apropriada dos implantes.
- Em qualidade óssea inferior ou insuficiente para ancorar com segurança o implante;

Estas contraindicações podem ser relativas ou absolutas. No uso destes dispositivos deve cuidar-se do aumento de peso e possíveis complicações bem como considerar o exame clínico completo e as contraindicações. A seguir são pontuados as principais contra indicação por especialidade.

Contra indicação - Clavícula

- Fraturas incompletas;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles local;
- Desnutrição que comprometa a cicatrização;
- Pacientes não colaborativos ou psiquiátricos;
- Falta de condições clínicas sistêmicas ;

Contra indicação - Fêmur Osteotomia

- Ausência de desalinhamento ósseo;
- Idade avançada;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Escápula

- Fratura sem desvio;
- Idade avançada;
- Grave osteoporose;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Patela

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Úmero Proximal

- Fratura sem desvio;
- Fratura do colo cirúrgico com contato e sem instabilidade;
- Fratura das tuberosidades com desvio menor que 1 cm;

Contra indicação - Proximal De Tíbia

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;

- Fratura com varo proximal menor que 45° ;
- Idade avançada;
- Grave osteoporose;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Úmero Distal

- Fratura sem desvio;
- Fratura com fragmentação grave;
- Idade avançada;
- Grave osteoporose;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Olecrano

- Fratura sem desvio;
- Idade avançada;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;

Contra indicação - Tíbia Osteotomia

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Distal de Tíbia

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;

Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Rádio distal

- Idade avançada;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;

Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Artrodese de punho

- Idade avançada;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Pélvis e Acetábulo

- Lesão estável;
- Fraturas do acetábulo sem desvio;
- Fratura baixa da coluna anterior;
- Congruência secundária;
- Politraumatizado sem condições clínicas;
- Idade avançada;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;

Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Distal Fíbula

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;

Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Calcâneo

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Talus

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Fêmur Proximal

- Politraumatizado sem condições clínicas;
- Idade avançada;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Fêmur Distal

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

Contra indicação - Médiopé

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;

Contra indicação - Antepé – Metatarso e Falange

- Politraumatizado agudo;
- Osteoporose grave;
- Grave lesão neurovascular associada;
- Paciente não colaborativo ou psiquiátrico;
- Infecção local;
- Grave lesão de partes moles;
- Falta de condições clínicas sistêmicas;

3.2. Advertências

Este dispositivo médico exige procedimento cirúrgico especializado. Somente deverá ser executado por cirurgiões habilitados com treinamento específico incluindo diagnóstico, planejamento pré-operatório e protocolo cirúrgico. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, incluindo o ambiente cirúrgico, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

O fabricante se isenta de responsabilidade por quaisquer complicações relacionadas a indicações incorretas dos procedimentos cirúrgicos ou do uso de implantes, técnica operatória inadequada, falta de assepsia, e também àquelas relacionadas aos limites dos métodos de tratamento.

É VEDADO a mistura de implantes de fabricantes distintos. O uso de implantes de fabricantes distintos insere riscos não considerados, eliminando qualquer responsabilidade da TORIDE por eventos adversos que possam acontecer. Não utilizar implantes de materiais diferentes dos apresentados.

É VEDADO a mistura de diferentes implantes não compatíveis entre si, que podem elevar o risco de corrosão, tampouco produtos similares de terceiros, cuja compatibilidade geométrica e mecânica não é conhecida. Os resultados clínicos e durabilidade do implante dependerão da técnica cirúrgica adotada, que deverá ser adequada ao tipo de produto.

Este produto é de uso único e não pode ser reprocessado, devendo seguir as orientações do tópico 3.4.10 para o descarte correto.

No pós-operatório é recomendado exercício de recuperação da força muscular e da mobilidade acompanhado por um profissional.

O paciente deve ser informado sobre os limites de esforço físico, regras de comportamento e sobre os perigos (por ex. falha do implante) no caso da não observância. Os dispositivos (placas bloqueadas) implantados destinam-se a imobilizar o osso até a consolidação óssea. Até que a consolidação óssea aconteça a placa tem dois possíveis comportamentos mecânicos: compartimento da carga ou suporte da carga. Nas fraturas em que seja possível a redução com contato entre os fragmentos ósseos, a carga será compartilhada (load sharing) entre os fragmentos em contato e a placa bloqueada. Nos casos de

fraturas fragmentadas onde não é possível o contato entre o fragmento proximal e distal principais, a carga será inicialmente absorvida (load bearing) pela placa, até que, com a evolução da consolidação óssea, ocorra o compartilhamento da carga (Load sharing) até a consolidação óssea final. O esforço do paciente deve ser adequado à situação mecânica da fratura, redução e evolução da consolidação óssea.

Em caso de sobrecarga sobre o implante esse poderá sofrer falha por fadiga. São causas de sobrecarga no implante: má redução da fratura, má técnica de implantação, excessiva carga no membro pelo paciente, retardo de consolidação óssea, não união, infecção, entre outros.

É importante que o auxílio de apoio externo (Tipoia, imobilização do membro ou região operada, andador, muletas ou bengala) seja mantido até que se estabeleça a consolidação óssea completa, evidenciada por exame clínico e radiográfico.

Fatores como o peso do paciente, nível de atividade física e adesão às instruções relativas ao suporte de pesos ou suporte de cargas influenciam na vida útil do implante. O cirurgião deve ter um conhecimento mecânico das forças que atuam sobre o implante com o osso fraturado, para orientar o paciente sobre como limitar sua atividade física até que a consolidação óssea seja completa.

Observação: O produto não promove a consolidação da fratura, apenas mantém a redução da mesma protegendo-a até a consolidação da fratura. Se a consolidação da fratura não ocorrer dentro do período esperado, seja por problemas relacionados ao paciente (energia do trauma, tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, uso de determinados medicamentos como corticoides e bisfosfonatos, carências nutricionais e doenças sistêmicas em geral), seja por falhas da fratura ou na colocação do implante, pode haver quebra do implante por fadiga.

Recomendações:

Recomendamos acompanhamento com exame radiológico e físico às 2ª, 6ª, 12ª e 24ª semanas de pós-operatório. Isto é necessário para avaliar o processo de consolidação de fraturas, tratadas com Placas especiais de fixação rígida. Em situações de evolução inesperada os prazos de reavaliação devem ser adequados ao caso. Se não houver evidência de consolidação óssea dentro de 6 meses no pós-operatório, uma troca do implante ou outras opções terapêuticas devem ser consideradas.

3.2.1. Limite de carga do implante

Embora os ensaios comprovem que a resistência mecânica dos produtos testados seja superior às cargas resultantes de atividades normais diárias, os implantes utilizados em cirurgia servem apenas para auxiliar e promover um processo normal de consolidação óssea. Esses implantes não têm a função de substituir estruturas ósseas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com fraturas não consolidadas.

Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o tipo de suporte físico, limite de carga, adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

3.2.2 Moldagem do implante

As placas da TORIDE são projetadas e fabricadas para adaptar-se adequadamente ao osso utilizando os diversos modelos e tamanhos conforme o tipo de osso a ser tratado.

Deve-se evitar sempre que possível a modelagem do implante, em determinadas situações pode ser necessário (a critério do cirurgião) moldar o implante para adequá-lo perfeitamente a anatomia do osso a ser tratado. O implante uma vez moldado não pode ser novamente moldado para sua forma original, pois poderá acarretar fratura precoce do implante e conseqüentemente falha na fixação óssea.

Utilizando instrumental especificado pela TORIDE, ao moldar a placa de forma anatomicamente precisa, principalmente para fraturas articulares se faz necessário evitar que os furos se deformem o que pode ocasionar dificuldades ou a impossibilidade da inserção do parafuso. A Toride recomenda que antes de moldar a placa seja inserido nos furos roscado os parafusos bloqueadores, com a finalidade de evitar a deformação dos furos bloqueados.

3.3. Cuidados especiais

A TORIDE não se responsabiliza pela colocação do produto com utilização de outros tipos de instrumentais.

Os instrumentais não fazem parte desse registro e devem ser adquiridos separadamente.

3.4. Esclarecimento sobre o uso do dispositivo médico

É recomendado que os componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS sejam desembalados e esterilizados imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições.

3.4.1. Procedimentos relacionados a limpeza do produto médico.

Para reduzir o risco de infecção, é recomendado que os implantes sejam limpos antes da esterilização, utilizando uma solução bactericida e antifúngica de largo espectro. Entretanto, deve-se observar:

- Não utilize agentes de limpeza agressivos, tais como ácidos minerais fortes (sulfúrico, nítrico, etc);
- Não use escovas de metal, polidores ou produtos abrasivos;
- Leia sempre as instruções do fabricante do produto desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilize somente produtos registrados na ANVISA);
- Em banhos térmicos a água nunca deve exceder 45°C para impedir coagulação das proteínas.

3.4.2. Limpeza manual.

A limpeza manual dos implantes, quando efetuada adequadamente, pode evitar danos e/ou avarias. Entretanto deve-se observar:

- A temperatura da água não pode ultrapassar a temperatura ambiente. As concentrações dos agentes de limpeza devem ser corretas;
- Utilização de escova apropriada, de preferência de nylon. Nunca utilize escova de aço ou esponjas abrasivas. Isto provoca ruptura da camada passiva;
- Os implantes devem ser cuidadosamente enxaguados após a limpeza. Se a água utilizada contiver uma alta concentração de íons, deve ser utilizada água destilada;
- Os implantes devem ser secos, imediatamente, após o término da limpeza.

3.4.3. Máquinas de limpeza.

Se usadas máquinas de limpeza para os implantes, deve-se observar:

- Os implantes devem ser colocados em bandejas para não causar danos ou avarias uns aos outros;
- Leia sempre as instruções do fabricante da solução desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilizar somente produtos registrados na ANVISA);
- O enxágüe deve remover todos os agentes utilizados na limpeza, bem como a solução desinfetante;
- A água destilada é recomendada quando há uma alta concentração de íons na água da rede pública;
- Os implantes devem ser secos, imediatamente, após o término da limpeza.

3.4.4. Limpeza ultrassônica.

Os implantes que forem limpos através de banhos ultrassônicos devem ser inicialmente desinfetados. Deve-se observar:

- Leia sempre as instruções do fabricante da solução desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilizar somente produtos registrados na ANVISA);
- A temperatura da solução desinfetante deve ser mantida rigorosamente entre 40° e 50°C;
- Enxágüe os implantes cuidadosamente.

3.4.5. Esterilização

Os componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS são fornecidos **NÃO ESTÉREIS** e são de **USO ÚNICO**, devendo ser esterilizados antes da sua utilização.

O local de esterilização do produto deverá proceder com todos os requisitos técnicos de esterilização antes de submetê-lo ao processo de esterilização (testes biológicos e físicos da autoclave). É de total

responsabilidade do hospital a validação do processo de esterilização.

Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. É responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

Recomendamos apenas o processo em AUTOCLAVE A VAPOR para esterilização dos implantes.

Utilizar autoclave hospitalar, de acordo com o procedimento padrão adequado. Norma aplicável para esterilização em autoclave a vapor: ***NBR ISO 17665:2024 - Esterilização de produtos para saúde - Vapor Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.***

Recomenda-se as temperaturas e tempos de esterilização conforme tabela 9, é extremamente importante a validação dos parâmetros do processo do tipo específico do equipamento de esterilização e configuração para colocação dos produtos de cada instituição de saúde, bem como a apropriada manutenção preventiva e corretiva do equipamento de esterilização. Cabe ao utilizador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a esterilidade dos produtos médicos.

Tabela 9: Parâmetros para Esterilização

Temperatura	Ciclo	Tempo de Exposição
121°C (250°F)	Gravidade	20 minutos (20 minutos de secagem)
134°C (273°F)	Pré-vácuo	4 minutos (20 minutos de secagem)

OBS.: O tempo só deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

Cabe ao operador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a eficácia do processo de esterilização.

3.4.6. Advertências para manuseio

A correta manipulação do implante antes e durante a operação é decisiva para o sucesso do implante;

O manuseio dos componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS deve ser realizado somente por profissionais da área médico-hospitalar, devidamente especializados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso.

Os componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS devem ser manipulados cuidadosamente e individualmente, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

Entalhes ou riscos causados nas placas podem facilitar a ação corrosiva por fluídos corpóreos. Desta forma o SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS DE PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS DE FIXAÇÃO RÍGIDA deve estar em sua embalagem original e somente ser retirados da embalagem no momento de sua esterilização, e por pessoal que tenha conhecimento desta prática.

3.4.7. Técnica cirúrgica

As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao mesmo a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

A TORIDE recomenda que o cirurgião leia e compreenda integralmente as informações contidas nas instruções de uso e na indicação de uso. Caso necessite de alguma informação adicional, o cirurgião deve contatar a TORIDE antes da implantação do dispositivo médico. A implantação do dispositivo médico não deve ocorrer caso o cirurgião possua dúvidas quanto à indicação de uso, quantidade e/ou técnica cirúrgica a ser aplicado.

Todo procedimento cirúrgico deve considerar o caso clínico do paciente bem como a qualificação do cirurgião. Apenas cirurgiões qualificados na implantação do dispositivo médico devem realizar a implantação dos componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS.

A utilização deste material deverá ser feita apenas nas indicações e dentro dos parâmetros tecnicamente aceitos no país.

A TORIDE não é responsável pela indicação da melhor técnica cirúrgica a ser aplicado caso a caso, entretanto, como sequência possível a técnica cirúrgica é apresentada abaixo:

Clavícula

A cirurgia de clavícula é mais frequentemente realizada para fraturas com grande desvio, encurtamento, ou que comprometem a pele.

- **Posicionamento:** O paciente é colocado em decúbito dorsal (deitado de costas), com o ombro elevado para expor a área.
- **Via de Acesso:** A incisão é feita na pele, diretamente sobre a clavícula, geralmente de forma transversal (horizontal) para seguir as linhas de Langer e obter um resultado estético melhor.
- **Técnica Cirúrgica:** Após a incisão, a fáscia é dissecada e os fragmentos da fratura são expostos. O hematoma da fratura é removido e os fragmentos ósseos são cuidadosamente realinhados (reduzidos) para restaurar o comprimento e a anatomia da clavícula. A fixação é realizada com uma **placa de bloqueio pré-contornada** (conforme a escolha do cirurgião) e parafusos, que são posicionados na face superior ou anteroinferior do osso para fornecer estabilidade.
- **Fechamento:** A incisão é fechada em camadas, com atenção especial à sutura da fáscia e da pele.

Escápula

A cirurgia de escápula é complexa devido à sua localização e à proximidade com vasos e nervos. É indicada para fraturas instáveis que afetam a articulação do ombro (glenoide) ou o corpo da escápula com grande desvio.

- **Posicionamento:** O paciente é posicionado em decúbito ventral (deitado de bruços) ou lateral, dependendo da área a ser acessada.
- **Via de Acesso:** A incisão mais comum é a **via de acesso posterior de Judet**, que segue a espinha da escápula. Para fraturas do colo da glenoide, uma **via de acesso deltopeitoral** pode ser utilizada.
- **Técnica Cirúrgica:** A musculatura (como o deltoide e o infraespinhoso) é cuidadosamente dissecada e rebatida para expor a fratura. Os fragmentos são reduzidos e fixados com **placas**

de bloqueio (conforme a escolha do cirurgião) e **parafusos** específicos, para a anatomia da escápula, que oferecem estabilidade para permitir a cicatrização.

- **Fechamento:** Os músculos são reposicionados e a ferida é fechada em camadas.

Úmero Proximal

A cirurgia para fraturas do úmero proximal é realizada em casos de desvios significativos, lesões neurovasculares associadas ou comprometimento da articulação do ombro.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal em "cadeira de praia" para permitir a manipulação do ombro.
- **Via de Acesso:** A **via de acesso deltopeitoral** é a mais utilizada. A incisão é feita no sulco entre o músculo deltoide e o peitoral maior.
- **Técnica Cirúrgica:** O cirurgião identifica e protege o nervo axilar. A fratura é exposta e os fragmentos (cabeça do úmero, tubérculos e diáfise) são realinhados. A fixação é geralmente feita com uma **placa de bloqueio pré-moldada** (específica para o úmero proximal) e múltiplos parafusos, que penetram a cabeça do úmero para garantir a estabilidade.
- **Fechamento:** O músculo deltoide e peitoral são fechados, e a pele é suturada.

Úmero (Diáfise)

A técnica cirúrgica para fraturas da diáfise do úmero (corpo do osso) é indicada para fraturas com grande desvio, lesões associadas ou falha no tratamento conservador.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal ou em "cadeira de praia", dependendo da localização da fratura.
- **Via de Acesso:** A **via de acesso anterolateral** é a mais comum. A incisão é feita na parte anterior e lateral do braço, entre o deltoide e o bíceps. É crucial identificar e proteger o **nervo radial**, que passa próximo ao osso.
- **Técnica Cirúrgica:** Após a exposição da fratura, os fragmentos são reduzidos e fixados. A técnica mais comum é a utilização de **placa de bloqueio** (conforme a escolha do cirurgião) e **parafusos**, para garantir a estabilidade.
- **Fechamento:** Fechamento da musculatura e da pele em camadas.

Úmero Distal

A cirurgia para fraturas do úmero distal, que afetam a articulação do cotovelo, é essencial para restaurar a anatomia e a função.

- **Posicionamento:** Decúbito ventral ou lateral, com o braço apoiado.
- **Via de Acesso:** A **via de acesso posterior** é a mais utilizada. A incisão é feita na parte de trás do braço e antebraço. O **nervo ulnar** é identificado e protegido, sendo muitas vezes transposto para evitar lesões.
- **Técnica Cirúrgica:** A fratura é exposta, e os fragmentos são reduzidos de forma anatômica. A fixação deve ocorrer geralmente o uso de **duas placas de bloqueio**, uma medial e outra lateral (placas paralelas ou 90-90) e **parafusos**, para criar uma fixação estável e suportar a carga articular.
- **Fechamento:** O nervo ulnar é protegido, a fáscia e a pele são suturadas. Realize uma avaliação radiográfica completa para verificar a redução dos fragmentos, o alinhamento e a colocação dos parafusos. Feche a incisão e imobilize, conforme a qualidade óssea e a estabilidade.

Rádio Distal

As fraturas do rádio distal são as mais comuns no punho. A cirurgia é indicada para fraturas instáveis que afetam a articulação e causam grande desvio.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal com o braço em uma mesa de mão radiotransparente.
- **Via de Acesso:** A **via de acesso volar** (palmar) é a mais comum. A incisão é feita na parte frontal do punho, lateral ao tendão do músculo flexor radial do carpo.
- **Técnica Cirúrgica:** Os tendões e o nervo mediano são identificados e protegidos. A fratura é reduzida e fixada com uma **placa volar de bloqueio**, que é posicionada na face palmar do rádio. Os parafusos de bloqueio penetram no osso, fixando firmemente os fragmentos.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realize uma avaliação radiográfica completa para verificar a redução dos fragmentos, o alinhamento e a colocação dos parafusos. Feche a incisão e imobilize, conforme a qualidade óssea e a estabilidade.

Olecrano

A fratura do olecrano, parte do cotovelo, é tratada cirurgicamente para restaurar a extensão do braço.

- **Posicionamento:** Decúbito ventral ou lateral com o braço apoiado.
- **Via de Acesso:** A **via de acesso posterior** é feita diretamente sobre o olecrano.
- **Técnica Cirúrgica:** A técnica mais comum é a **banda de tensão**. Após a redução da fratura, dois fios de Kirschner (não objeto deste registro) são inseridos longitudinalmente no olecrano. Um fio de aço (banda de tensão) é passado em "8" ao redor dos pinos e de um parafuso, comprimindo a fratura quando o cotovelo se flexiona. Para fraturas cominutivas, podem ser utilizada **placa bloqueada e parafusos**.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realize uma avaliação radiográfica completa para verificar a redução dos fragmentos, o alinhamento e a colocação dos parafusos. Feche a incisão e imobilize, conforme a qualidade óssea e a estabilidade.

Artrodese de Punho

A artrodese (fusão articular) do punho é realizada para aliviar a dor em casos de artrite grave, lesões complexas ou deformidades.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal com o braço na mesa de mão.
- **Via de Acesso:** Uma incisão dorsal longitudinal é feita sobre a articulação do punho.
- **Técnica Cirúrgica:** A cartilagem das articulações radiocarpal, intercarpais e carpometacarpal é removida. O osso é preparado e enxerto ósseo pode ser adicionado. O punho é posicionado em uma leve extensão (10 a 20 graus) e fixado com uma **placa dorsal de artrodese de punho** e parafusos.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realize uma avaliação radiográfica completa para verificar a redução dos fragmentos, o alinhamento e a colocação dos parafusos. Feche a incisão e imobilize, conforme a qualidade óssea e a estabilidade.

Pelve

A cirurgia de pelve é uma das mais complexas e de grande porte. É indicada para fraturas instáveis do anel pélvico ou do acetábulo.

- **Posicionamento:** Varia conforme a fratura, podendo ser decúbito dorsal, lateral ou ventral.
- **Via de Acesso:** Existem múltiplas vias de acesso, como a **via de acesso ilioinguinal** para fraturas anteriores do anel pélvico, e a **via de acesso de Kocher-Langenbeck** para fraturas da parede posterior do acetábulo.
- **Técnica Cirúrgica:** A técnica envolve a dissecação para exposição da fratura, os fragmentos são reduzidos, e a fixação é realizada com **placas bloqueadas e parafusos** posicionados em locais de baixa carga para restaurar a estabilidade do anel pélvico.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realize uma avaliação radiográfica completa para verificar a redução dos fragmentos, o alinhamento e a colocação dos parafusos, os tecidos são fechados e drenos podem ser utilizados devido ao grande espaço morto. Feche a incisão e imobilize para promover maior estabilidade.

Fêmur Proximal

A cirurgia do fêmur proximal com placa bloqueada é indicada para fraturas trocantéricas e subtrocantéricas. O objetivo é a fixação estável para permitir a mobilização precoce do paciente.

- **Posicionamento:** Paciente em decúbito dorsal em uma mesa de tração ortopédica, que auxilia na redução da fratura.
- **Via de Acesso:** A principal é a via de acesso lateral direta, centrada sobre o grande trocanter, expondo a face lateral do fêmur proximal.
- **Técnica Cirúrgica:** A técnica envolve a redução da fratura com o auxílio da mesa de tração e manipulação direta. A fixação é realizada com uma placa bloqueada longa, inserida na lateral do fêmur. Parafusos bloqueados são posicionados na cabeça e colo femoral, e outros parafusos são fixados na diáfise femoral para garantir estabilidade rotacional e axial.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realiza-se uma avaliação fluoroscópica (raio-x) completa para verificar a redução e o posicionamento dos implantes. A ferida é fechada em camadas, e um dreno pode ser utilizado. O protocolo pós-operatório foca na mobilização precoce com carga protegida (parcial), progredindo conforme a consolidação óssea.

Fêmur Distal

A cirurgia para fraturas do fêmur distal, que envolve a articulação do joelho, é indicada para restaurar a superfície articular.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal.
- **Via de Acesso:** A **via de acesso lateral ou medial** é utilizada. A incisão é feita na lateral ou na medial do fêmur distal.
- **Técnica Cirúrgica:** A fratura é exposta e a superfície articular é cuidadosamente reduzida e fixada com parafusos. A fixação é então complementada com uma **placa de bloqueio pré-contornada** na face lateral ou medial do fêmur para estabilizar a porção metafisária e diafisária.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realize uma avaliação radiográfica completa para verificar a redução dos fragmentos, o alinhamento e a colocação dos parafusos. Feche a incisão e imobilize, conforme a qualidade óssea e a estabilidade.

Osteotomia de Fêmur

A osteotomia femoral é um procedimento corretivo para realinhar o eixo do membro, geralmente para tratar deformidades angulares que causam dor.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal.
- **Via de Acesso:** A incisão depende do tipo de osteotomia, mas geralmente é lateral no terço médio ou distal do fêmur.
- **Técnica Cirúrgica:** Um corte cirúrgico (osteotomia) é feito no osso. O cirurgião corrige o alinhamento angular e fixa o osso em sua nova posição com uma **placa de osteotomia** específica ou uma **haste intramedular**.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realize uma avaliação radiográfica completa para verificar a redução dos fragmentos, o alinhamento e a colocação dos parafusos. Feche a incisão e imobilize, conforme a qualidade óssea e a estabilidade.

Patela

A cirurgia de patela é indicada para fraturas articulares desviadas, fraturas transversas ou, especialmente, fraturas cominutivas (multi-fragmentadas), que comprometem o mecanismo extensor do joelho. A fixação com placas bloqueadas é uma alternativa à banda de tensão, oferecendo maior estabilidade em padrões de fratura complexos ou em osso de baixa qualidade.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal (supino) em mesa radiotransparente, com um coxim sob o joelho para permitir leve flexão. Uso de garrote pneumático é habitual.
- **Via de Acesso:** Incisão longitudinal mediana anterior sobre a patela. Esta via permite excelente exposição da fratura e a reparação necessária do retináculo (tecido que cobre a patela) medial e lateral.
- **Técnica Cirúrgica:** A técnica foca na redução anatômica precisa da superfície articular (cartilagem). Os fragmentos são meticulosamente limpos e reduzidos, sendo fixados provisoriamente com fios de Kirschner finos ou pinças de redução. Uma **placa bloqueada** específica para patela é cuidadosamente moldada à superfície anterior da patela. **Parafusos bloqueados** curtos são inseridos nos furos da placa, fixando os diferentes fragmentos e criando uma construção angularmente estável. Esta montagem neutraliza as forças de tração do quadríceps.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realizar uma avaliação radiográfica (AP e Perfil) intraoperatória para confirmar a redução articular e assegurar que os parafusos não penetraram na articulação. O reparo do retináculo extensor medial e lateral é crucial e deve ser feito de forma rigorosa. A ferida é fechada em camadas. O protocolo pós-operatório permite a mobilidade precoce (passiva e ativa-assistida) do joelho para evitar rigidez. A carga (apoio de peso) é geralmente restrita (carga de toque) por 4 a 6 semanas, e um imobilizador articulado pode ser usado para proteger a fixação durante a marcha.

Tíbia Proximal

A cirurgia de tíbia proximal é indicada para fraturas articulares desviadas (classificação Schatzker), especialmente aquelas com degrau articular (incongruência), depressão da cartilagem ou instabilidade axial (mau alinhamento em varo ou valgo).

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal em mesa radiotransparente. Um coxim estéril sob o joelho (permitindo 90° de flexão) ou um distrator femoral podem ser usados para facilitar a redução e a visualização fluoroscópica.
- **Via de Acesso:** Depende do padrão da fratura. A via anterolateral é a mais comum para fraturas do platô lateral (Schatzker I-III). Para fraturas bicondilares (V, VI) ou do platô medial (IV), uma via posteromedial adicional é frequentemente necessária para aplicar uma placa de suporte ("buttress") e conter os fragmentos posteriores.
- **Técnica Cirúrgica:** A prioridade absoluta é a redução anatômica da superfície articular. Isso é feito sob visão direta (artrotomia submeniscal) ou guiada por fluoroscopia. Fragmentos articulares deprimidos são elevados (usando uma "janela" óssea na metáfise) e o defeito ósseo abaixo deles é preenchido com enxerto (substituto ósseo). A fixação é realizada com uma placa bloqueada anatômica (LCP). Os parafusos proximais (subcondrais) são inseridos paralelos à linha articular para atuar como uma "jangada" (raft), sustentando os fragmentos articulares reduzidos.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realiza-se uma avaliação fluoroscópica completa para verificar a congruência articular, o alinhamento do eixo e a correta colocação dos parafusos (assegurando que nenhum esteja intra-articular). A ferida é fechada em camadas. O protocolo pós-operatório é crítico: mobilização precoce do joelho (passiva ou com máquina de movimento contínuo - CPM) para nutrir a cartilagem e evitar rigidez, combinada com proibição de carga (sem apoiar o pé no chão) por 8 a 12 semanas, até a consolidação radiográfica.

Osteotomia de Tíbia

A cirurgia de osteotomia da tíbia é indicada para pacientes (geralmente jovens e ativos) com mau alinhamento do joelho (varo, mais comum) que causa sobrecarga e artrose em um único compartimento (medial). O objetivo é realinhar o eixo mecânico do membro para transferir a carga para o compartimento saudável.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal em mesa radiotransparente. Um coxim pode ser usado para permitir flexão do joelho, facilitando o acesso e a visualização fluoroscópica (raio-x).

- **Via de Acesso:** Via anteromedial na tíbia proximal. Uma incisão longitudinal ou oblíqua é feita distal à linha articular, sobre a face medial da tíbia.
- **Técnica Cirúrgica:** A técnica exige um planejamento pré-operatório rigoroso para calcular o ângulo exato de correção. Sob fluoroscopia, fios-guia (não objeto deste registro) são inseridos na metáfise proximal da tíbia, direcionados de medial para lateral, parando antes da cortical oposta. Usando uma serra oscilatória, um corte ósseo (osteotomia) incompleto é realizado, preservando a cortical lateral e a articulação tibiofibular proximal como uma "dobradiça". A osteotomia é então aberta gradualmente com cinzéis calibrados ou um distrator laminar até atingir a correção angular planejada. A placa bloqueada específica é posicionada na face medial, e parafusos bloqueados são inseridos proximal e distalmente para manter a correção de forma estável.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realiza-se uma avaliação radiográfica completa, usando o cabo de alinhamento, para confirmar que o eixo mecânico foi corrigido. A ferida é irrigada e fechada em camadas. O protocolo pós-operatório permite a mobilidade imediata do joelho (essencial para evitar rigidez), mas com restrição de carga (apoio parcial ou de toque) por 6 a 8 semanas, até que haja sinais radiográficos de consolidação da osteotomia.

Tíbia Distal

A cirurgia da fíbula distal é indicada para fraturas instáveis do tornozelo, que resultam em desvio, encurtamento ou rotação do maléolo lateral e levam à incongruência da articulação (pinça) do tornozelo.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal (supino) em mesa radiotransparente. Um coxim é posicionado sob o quadril do mesmo lado para rodar a perna internamente, facilitando a exposição lateral e a visualização fluoroscópica da pinça articular ("mortise").
- **Via de Acesso:** A via de acesso lateral direta é a padrão. A incisão é longitudinal, centrada sobre a fíbula, estendendo-se distalmente até a ponta do maléolo. Deve-se ter cuidado para proteger o nervo fibular superficial, que geralmente cursa anteriormente.
- **Técnica Cirúrgica:** O objetivo principal é restaurar o comprimento, o alinhamento e a rotação da fíbula. O uso de placas bloqueadas é particularmente indicado em fraturas cominutivas

(fragmentadas) ou em osso osteoporótico. A placa é moldada e posicionada na face lateral da fíbula. Parafusos bloqueados são usados para "pontear" a zona de fratura, mantendo o alinhamento. A avaliação da sindesmose (articulação entre a tíbia e a fíbula) é um passo obrigatório; se houver instabilidade após a fixação da fíbula, é necessária a inserção de um parafuso sindesmótico ou um dispositivo de fixação flexível.

- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realiza-se uma avaliação fluoroscópica completa (AP, Perfil e, mais importante, a incidência "Mortise") para confirmar a redução anatômica da fíbula e a congruência da articulação do tornozelo. A ferida é fechada em camadas. O paciente é imobilizado com uma tala gessada ou bota. O protocolo pós-operatório é rigoroso, com proibição de carga (não apoiar o pé no chão) por 6 a 8 semanas. Exercícios de amplitude de movimento sem carga são iniciados precocemente (após 1-2 semanas) para evitar rigidez.

Pé

As técnicas cirúrgicas no pé variam muito de acordo com a região.

Ante-pé (Hallux Valgus - Joanete)

A cirurgia do antepé é indicada para corrigir deformidades sintomáticas como o Hálux Valgo, "joanete", ou para estabilizar fraturas-luxações traumáticas instáveis, como as Lesões Tarsometatarsianas de Lisfranc.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal (supino) em mesa radiotransparente. Utiliza-se um garrote pneumático na coxa ou tornozelo. O uso de fluoroscopia (intensificador de imagem) é essencial.
- **Via de Acesso:** Varia conforme a patologia:

Hálux Valgo: Incisão longitudinal dorsomedial sobre a primeira articulação metatarsofalângica.

Lesão de Lisfranc: Múltiplas (geralmente duas) incisões longitudinais dorsais para expor as articulações tarsometatarsianas (TMT) medial e lateral, minimizando o risco de necrose de pele.

- **Técnica Cirúrgica:** A técnica é distinta para cada condição:

Para Hálux Valgo (Correção de Deformidade): A técnica envolve osteotomias (cortes ósseos) de realinhamento no primeiro metatarso (ex: osteotomia de base ou artrodese de Lapidus). Após corrigir o alinhamento, a fixação é realizada com placas bloqueadas de baixo perfil e parafusos, que conferem estabilidade angular superior, permitindo uma consolidação segura na posição corrigida.

Para Lesão de Lisfranc (Trauma): O objetivo é a redução anatômica rigorosa das articulações TMT. Sob visão direta e fluoroscopia, as colunas do pé são realinhadas. A fixação é feita com placas bloqueadas de baixo perfil e parafusos, geralmente realizando uma artrodese primária (fusão cirúrgica) das colunas medial e intermédia (1ª, 2ª e 3ª articulações TMT) para garantir estabilidade a longo prazo.

- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realiza-se avaliação fluoroscópica final para checar a correção (Hálux Valgo) ou a redução (Lisfranc) e o posicionamento dos implantes. O protocolo pós-operatório difere crucialmente:

Hálux Valgo: Curativo e uso de sapato de sola rígida (tipo "Barouk"), permitindo carga parcial imediata no retropé.

Lesão de Lisfranc: Imobilização gessada e proibição de carga rigorosa (sem apoiar o pé no chão) por 8 a 12 semanas, para proteger a fusão ou a cicatrização ligamentar.

Médio-pé

A cirurgia do médio pé é indicada para fraturas-luxações instáveis ou fraturas com desvio articular (ex: complexo de Lisfranc, navicular, cubóide) que comprometem a estabilidade e os arcos anatômicos (longitudinal e transversal) do pé.

- **Posicionamento:** Decúbito dorsal em mesa radiotransparente. Um coxim sob o quadril ipsilateral pode ser usado para neutralizar a rotação da perna. O uso de um distrator pode auxiliar na redução ligamentar.
- **Via de Acesso:** Vias de acesso longitudinais dorsais. Geralmente são necessárias duas incisões: uma medial (entre o 1º e 2º metatarso, para expor a coluna medial) e uma lateral (sobre o 3º

ou 4º metatarso, para a coluna lateral), protegendo os tendões extensores e os nervos cutâneos.

- **Técnica Cirúrgica:** A técnica foca na redução anatômica precisa das articulações tarsometatarsianas (TMT). A redução é iniciada pela coluna medial (1ª articulação TMT) e verificada em relação à "chave" da lesão (2ª articulação TMT), mantendo-se provisoriamente com fios de Kirschner. Placas bloqueadas de baixo perfil são aplicadas dorsalmente, "pontecendo" as articulações instáveis para neutralizar as forças. Parafusos bloqueados oferecem estabilidade angular, crucial em fraturas cominutivas ou osso de má qualidade.
- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realiza-se uma avaliação radiográfica (fluoroscopia) completa para verificar a redução anatômica (especialmente o alinhamento entre o 2º metatarso e o cuneiforme intermédio) e a posição dos implantes. A ferida é fechada em camadas. O protocolo pós-operatório é rigoroso: proibição total de carga (sem apoiar o pé no chão) por 8 a 12 semanas, com imobilização gessada ou bota robofoot, para proteger a delicada reconstrução e permitir a cicatrização dos ligamentos.

Retro-pé (Fratura de Calcâneo)

A cirurgia do retro pé é indicada para fraturas intra-articulares desviadas do calcâneo, que causam incongruência da articulação subtalar, perda da altura (ângulo de Böhler) ou alargamento e desalinhamento em varo do calcânhar.

- **Posicionamento:** Decúbito lateral (paciente deitado de lado com o membro afetado para cima), permitindo o acesso direto à face lateral do calcânhar e o uso do intensificador de imagem (fluoroscopia).
- **Via de Acesso:** A via de acesso lateral estendida (incisão em "L") é a mais tradicional, pois permite a elevação de um retalho de espessura total (incluindo os tendões fibulares), oferecendo excelente visualização da articulação subtalar e da parede lateral. Vias minimamente invasivas (sinus tarsi) também são opções.
- **Técnica Cirúrgica:** O objetivo primário é a redução anatômica da faceta articular posterior. O alinhamento geral (altura, comprimento e varo/valgo) é restaurado, muitas vezes usando um pino de Schanz na tuberosidade do calcâneo como um "joystick". Os fragmentos articulares

deprimidos são elevados e, se necessário, o defeito ósseo abaixo deles é preenchido com enxerto. A fixação é realizada com uma placa bloqueada anatômica (placa de calcâneo) na parede lateral, com parafusos subcondrais para suportar a articulação.

- **Finalização e protocolo pós-cirúrgico:** Realiza-se uma avaliação fluoroscópica completa, incluindo incidências especiais (como Broden e Harris), para verificar a congruência articular e a posição dos implantes. O fechamento da via lateral estendida deve ser meticuloso devido ao alto risco de complicações de pele. O protocolo pós-operatório exige proibição total de carga (sem apoiar o pé no chão) por um período prolongado, geralmente de 10 a 12 semanas. A mobilização precoce do tornozelo é iniciada para evitar rigidez, mas a mobilidade da articulação subtalar (inversão/eversão) é frequentemente restrita inicialmente.

Para o uso e desempenho pretendido dos componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS, é necessário a utilização de instrumentais TORIDE, devendo ser adquiridos separadamente possuindo registros próprios na ANVISA, os instrumentais necessário fazem parte dos registros abaixo, não sendo, portanto, objeto deste registro.

80084420011 - KIT INSTRUMENTAL PARA PARAFUSOS CANULADOS

80084420015 - KIT INSTRUMENTAL PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS

80084420024 - INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES

80084420025 - INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

80084420028 - INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES – ALUMÍNIO

80084420033 - INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES SEM CONEXÃO

80084420034 - INSTRUMENTAL ARTICULADO CORTANTE

80084420035 - INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

3.4.8. Tratamento pós-operatório

A mobilização física deve ser iniciada imediatamente após o pós-operatório, incluindo exercícios de movimentação. Restrições podem ser apropriadas em casos especiais, a critério do cirurgião.

O nível de atividade de um paciente e a observação das restrições pós operatórias são fatores importantes na vida funcional de qualquer dispositivo de fixação interna. Os pacientes devem ser avisados das consequências da não observação das instruções pós operatórias.

Os dispositivos não substituem o osso saudável. Não deve ser aplicada carga após a cirurgia, uma vez que o paciente deverá seguir as recomendações médicas para que o implante exerça sua função.

Não se pode esperar que os implantes suportem o esforço exercido sobre o dispositivo pelo suporte total ou parcial do peso corporal ou de carga, particularmente na presença de não consolidação, consolidação retardada ou recuperação incompleta, podendo gerar falha ou quebra do implante. Por isso, é importante que seja mantida a mobilização do local da fratura até ser estabelecida uma firme consolidação óssea. Fatores como o peso corporal, nível de atividade e respeito às limitações do suporte de peso corporal e de cargas por parte do paciente devem ser avaliados pelo cirurgião.

Os cuidados pós-operatórios incluem, mas não se limitam aos seguintes aspectos:

- Restrição do nível de atividade até se atingir a consolidação total do osso;
- Utilização de suporte externo adequado até consolidação total do osso e cuidados contra a remoção não supervisionada deste suporte;
- Evitar atividades que possam ocasionar torções, quedas, choques, que poderiam ocasionar falhas no dispositivo;
- Cuidados com a cicatrização.

3.4.9. Remoção do implante

É do cirurgião a decisão final sobre a remoção do implante. Recomendamos sempre que possível e prático para o paciente, o implante deve ser removido, visto que sua função como um auxiliar na consolidação foi desempenhada. A remoção do implante deve ser seguida por um adequado pós-operatório para evitar o risco de uma nova fratura.

Os riscos da remoção também incluem os riscos associados a qualquer tipo de cirurgia bem como os riscos associados à anestesia geral.

Caso o cirurgião necessite fazer a remoção para uma análise ou investigação, o implante deve ser explantado, se possível, na presença de pessoa autorizada pelo fabricante. Este produto deverá ser enviado para análise conforme determinado pelo fabricante.

3.4.10. Forma de descarte do implante utilizado

Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11 de agosto de 2006, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados. Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam entortadas ou cortadas para sua **inutilização**.

Produtos implantáveis explantados de pacientes, devem ser devidamente descartado pela instituição hospitalar. Fica sob responsabilidade da instituição hospitalar a completa descaracterização do implante impedindo o seu reuso, e o método utilizado para a descaracterização do implante. Recomendamos que os implantes explantados sejam deformados mecanicamente com o auxílio de martelo ou prensa de impacto devendo estar em seguida identificado com os dizeres: **“IMPRÓPRIO PARA USO”**.

Os Produtos implantáveis que sofreram quaisquer danos de armazenamento, transporte e/ou manipulação devem ser devolvidos ao fornecedor, de acordo com as condições determinadas pelas Boas Práticas Hospitalares, para que o mesmo promova o correto descarte dos implantes. Cada instituição apresenta um procedimento de recolhimento, armazenamento e descarte de seus resíduos sólidos, seguindo as normas estabelecidas, como por exemplo, os requisitos estabelecidos pela resolução.

3.4.11. Rastreabilidade dos produtos

A TORIDE, como fabricante de produtos para a saúde, é responsável pela rastreabilidade dos componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS.

A rastreabilidade dos componentes do sistema, que possuem área suficiente, são identificados de forma a possibilitar sua rastreabilidade, através de marcação do **LOGOTIPO | LOTE** no corpo do implante (marcação inviolável e com numeração única) e pelas informações constantes nas etiquetas de rastreabilidade fornecidas anexas ao produto (embalagem primária). Os componentes que não possuem área suficiente para marcação sua rastreabilidade são garantidas pelas informações constantes nas etiquetas de rastreabilidade fornecidas anexas ao produto (embalagem primária). Caso seja necessária a retirada do implante do corpo do paciente, todas as informações contidas no mesmo permanecerão inalteradas.

3.5. Armazenagem e transporte

O local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco, protegido de luz solar e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade;

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte também devem ser explicitados.

3.5.1. Cuidados no manuseio.

Os implantes devem ser manuseados com cuidado. Qualquer implante que tenha caído, arranhado, entalhado, esteja com a embalagem aberta, danificada, molhada ou que tenha sofrido qualquer outro dano deve ser descartado;

4. Formas de apresentação do dispositivo médico

Os componentes do SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS são comercializados unitariamente protegido por embalagem plástica transparente de EPD COEX selada termicamente, identificada com as informações de rastreabilidade, acompanhado de 05 Etiquetas de Rastreabilidade, como indicado na Figura 7, 8, 9 e 10.



Figura 7 – Parafuso embalado (frente)



Figura 8 – Parafuso embalado (verso)

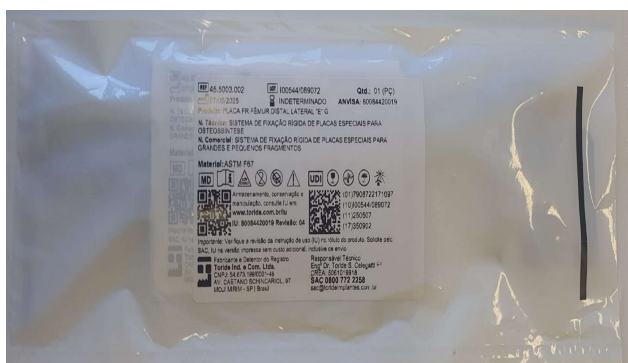


Figura 9 – Placa embalada (frente)



Figura 10 – Placa embalada (verso)

5. Modelos de rótulos e instruções de uso

5.1. Modelo de rotulagem

Dentro da embalagem primária seguem 5 (cinco) etiquetas de rastreabilidade.

Recomenda-se que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas conforme indicado abaixo:

- Etiqueta 1: Fixada no prontuário clínico do paciente;
- Etiqueta 2: Fixada no documento a ser entregue ao paciente;
- Etiqueta 3: Fixada na documentação fiscal de venda;
- Etiqueta 4: Entregue para o distribuidor para controle da rastreabilidade;
- Etiqueta 5: Entregue ao Cirurgião.

Recomenda-se que o hospital mantenha a identificação dos componentes implantados no prontuário do paciente, para tornar possível a rastreabilidade dos implantes utilizados, através do registro de, no mínimo, código, número de lote e número de registro do produto.

Recomenda-se que as informações de rastreabilidade registradas no prontuário sejam repassadas ao paciente.

Eventos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados ao fabricante com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Estas informações constam nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham a embalagem do produto.

Na figura 11 é apresentado o modelo de rotulagem, na tabela 10 são fornecidas a descrição dos dados bem como a legendas dos símbolos utilizados no rótulo. O modelo de rotulagem apresentado encontra-se em conformidade com os requisitos normativos da RDC 751/2022, RDC 591/2021 e ISO 15223-1:2021.

Passar sem nenhuma exigência é muito prazeroso e mostra que estou no caminho certo.

1	REF	0.00.00.00.00.000	3	LOT	X00000/000000-000000	5	QTD: XX
2		0000/00/00	4		0000/00/00	6	ANVISA: XXXXXXXX
7	Produto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bloqueados AV Total.						
8	N. Técnico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (N. Técnico - continuação.)						
9	N. Comercial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (N. Comercial - continuação.)						
10	Material: XXX XX				N. Registro Adicional		
12	13	14	15	16	17	18	19
							
23			Armazenamento, conservação e manipulação, consulte IU em:		26		
24					27	(01)00000000000000 (10)000000000000000000 (11)0000/00/00 (17)0000/00/00	
25			www.toride.com.br/iu				
	28		IU: 80084420003		29	rev: 000	
30	Fabricante e Detentor Registro				33	Responsável Técnico	
31	 Toride Ind. Com. Ltda CNPJ: 54.673.199/0001-48 Av. Caetano Schincariol, nº 97 Mogi Mirim-SP Brasil				Engº Dr. Toride. S. Celegatti Fº CREA: 5061019918 SAC: 0800 772 2258 sac@torideimplantes.com.br		
32					34		
					35		
36	Importante: Verifique a Revisão da Instrução de Uso (IU) no rótulo do produto.						
37	Solicite pelo SAC, IU na versão impressa sem custo adicional, inclusive de envio.						

Figura 11 – Modelo de rotulagem

Tabela 10 – Descrição das informações da rotulagem.

ID	Símbolo	Referência	Descrição
1		Referência	Indica o número do código do produto, de modo que o dispositivo médico possa ser identificado.
2		Data de Fabricação	Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado.
3		Número do Lote	Indica o código de lote do fabricante de modo que o lote possa ser identificado e rastreado.
4		Data de Validade	Indica a data limite de uso do dispositivo médico.
5	QTD	Quantidade	Indica a quantidade por embalagem.
6	ANVISA	Número Registro na ANVISA	Indica o número registro do dispositivo junto a Anvisa.
7	---	Descrição do Produto	Indica a descrição do nome comercial do dispositivo.
8	---	Nome Técnico	É o nome padronizado utilizado pela Anvisa para identificar o classificar o registro de dispositivo médico.
9	---	Nome Comercial	É o nome padronizado utilizado pelo Fabricante para identificar e classificar o registro de dispositivo médico.
10	---	Material	Indica o tipo de material que o dispositivos médico foi fabricado.
11	---	Número Registro - Adicional	Campo destinado para o número de registro de outros países quando aplicável.
12		Medical Device	Indica que o produto é um dispositivo médico.
13		Consulte IU	Indica a necessidade de o utilizador consultar as instruções de utilização - IU.

ID	Símbolo	Referência	Descrição
14		Não estéril	Indica que o dispositivo médico que não foi sujeito a um processo de esterilização, e está sendo fornecido não estéril.
15		Não reutilizar	Indica um dispositivo médico indicado para uma uso único, e que portanto é proibida o reprocessamento.
16		Embalagem danificada	Indica que o dispositivo médico que não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada ou aberta, e que o utilizador deve consultar as instruções de uso para obter mais informações.
17		Atenção	Indica que é necessária precaução ao utilizar o dispositivo.
18		UDI	Indica que o dispositivo contém informação de identificação única de dispositivo - UDI.
19		Frágil	Indica que o dispositivo médico que pode ser quebrado ou danificado se não for manuseado com cuidado.
20		Temperatura	Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto em segurança.
21		Manter Seco	Indica que o dispositivo médico deve ser protegido de humidade, e deve ser mantido e armazenado em local seco.
22		Abrigo da Luz	Indica que o dispositivo médico deve ser protegido de fontes de luz.
23		QR CODE	Indica o Lote e Quantidade.
24	---	Armazenamento, conservação e manipulação consulte IU.	Indica uma instrução que o usuário deve seguir para obter informações sobre armazenamento, conservação e manipulação.
25	---	Endereço Website da Instrução de Uso	Indica o endereço eletrônico que o usuário deve utilizar para ter acesso a IU sem custo.
26		Data Matrix	Indica a String que contém o UDI do dispositivo.

ID	Símbolo	Referência	Descrição
27	---	Visão humano do Código GTIN-13 - UDI	Indica o Código UDI na visão humana. (01) GTIN-13 (10) Lote (11) Fabric. (17) Validade
28	IU:	Número da Instrução de Uso	Indica o número da IU instrução de uso cadastrada pelo fabricante.
29	rev.:	Número da Revisão da Instrução de Uso	Indica o número da revisão atual da Instrução de uso.
30	---	Fabricante e Detentor do Registro.	Indica que o campo abaixo contém informações sobre o fabricante e o detentor do registro.
31		Fabricante	Indica o nome do fabricante, CNPJ, bem como sua logomarca.
32	---	Endereço	Indica o endereço do fabricante.
33	---	Responsável Técnico	Indica o nome do Responsável Técnico, bem como seu número de registro no conselho de classe.
34	---	Telefone SAC	Indica o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente SAC.
35	---	E-mail SAC	Indica o endereço eletrônico (e-mail) do Serviço de Atendimento ao Cliente.
36	Importante	Nota de advertência e aviso de segurança.	Indica que o usuário deve verificar a revisão da Instrução de Uso (IU) no rótulo do produto, de modo que esteja com a versão atualizada do da IU.
37	---	Nota de aviso informativa.	Indica a forma de acesso a IU através do SAC sem custo adicional.

5.2. Modelo de instrução de uso

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a TORIDE em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: <http://www.toride.com.br/instrucaodeuso>.

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Download" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo. Verifique se a versão da instrução de uso coincide com a versão mencionada no rótulo do produto.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço ao Consumidor através do telefone **08007722258** ou pelo e-mail: **sac@torideimplantes.com.br**.

6. Descrição da segurança e do desempenho do dispositivo médico, em conformidade com o regulamento vigente que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e desempenho de dispositivos médicos.

6.1. Desempenho do dispositivo médico

O seguinte desempenho é esperado na utilização SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA PLACAS ESPECIAIS PARA GRANDES E PEQUENOS FRAGMENTOS:

- Fixação estável da fratura, com restauração precoce da função, primando pelo alinhamento e redução anatômica dos fragmentos.

6.2. Características e Benefícios

A Tabela 11 apresenta as características e benefícios associados ao produto objeto desse processo de registro.

Tabela 11 - Características e Benefícios

Características	Benefícios
Saliência na cabeça do Parafuso	Garante posicionamento preciso e rente a cortical
Variedade de modelos anatômicos	Flexibilidade de instalação e redução de tempo cirúrgico.

Fabricado por:

TORIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 54.673.199.0001/48

Endereço: Avenida Caetano Schincariol, n.97, Parque das Empresas, Mogi Mirim, São Paulo, Brasil

CEP: 13803-340

Fone: (19) 3805 7580

Site: www.toride.com.br

E-mail: sac@torideimplantes.com.br

Responsável Técnico: Eng. Dr. Tóride S. Celegatti Filho – CREA/SP 5061019918

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

TORIDE SEBASTIAO
CELEGATTI

FILHO:0684988488

3

Assinado de forma digital
por TORIDE SEBASTIAO
CELEGATTI
FILHO:06849884883
Dados: 2026.07.07 16:01:31
-03'00'

Dr. Eng. Toride S. C. Filho

Responsável Técnico

CREA 5061019918